

 (EN) Dry-Sponge	Hydrated-Sponge
 (FR) Eponge sèche	Eponge Humidifiée
 (DE) Probenschwamm, trocken	Befeuchteter Schwamm
 (IT) Spugna secca	Spugna idratata
 (ES) Esponja seca	Esponja hidratada
 (NL) Dry-Sponge	Gehydrateerde spons
 (SV) Dry-Sponge	Hydrerad svamp
 (DA) Dry-sponge	Forvædet svamp
 (NO) Tørr svamp	Fuktet svamp
 (FI) Dry-Sponge Sienitikku	Hydraattisieni
 (PT) Dry-Sponge	Esponja Hidratada
 (EL) Ξηρός Σπόγγος	Ενυδατωμένος Σπόγγος
 (PL) Sucha gąbka	Wilgotna gąbka
 (HU) Dry-Sponge száraz szivacs	Hidratált szivacs
 (CS) Suchá houbička	Navlhčená houbička
 (RO) Burete uscat	Burete hidratat
 (RU) Губка сухая для отбора проб	Губка увлажненная
 (TR) Dry-Sponge	Hidrate-Sünger
 (JA) ドライスポンジ	ハイドラ - スポンジ
 (ZH) 干海绵	涂抹海绵
 (TH) ทรายสปันจ์	ฟองน้ำชุบหมาด
 (KO) 드라이-스폰지	수화 스폰지

Product Instructions

Dry-Sponge

Hydrated-Sponge

PRODUCT DESCRIPTION

Dry or Pre-hydrated and biocide-free 3.8 x 7.6 cm (1.5 x 3 in.) sponge in sample bag. Pre-hydrated with specified agent. With or without gloves. For Laboratory Use Only. Safety Data Sheet available.

SAFETY

The user should read, understand, and follow all safety information in the instructions. Retain the safety instructions for future reference.

⚠ WARNING Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury and/or property damage.

NOTICE Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in property damage.

⚠ WARNING

To reduce the risks associated with environmental contamination:

- Follow current industry standards and local regulations for disposal of contaminated waste.

To reduce the risks associated with exposure to biohazards:

- Dispose of samples according to all applicable government regulations and applicable laboratory procedures.

To reduce the risk associated with false negatives resulting in the use of contaminated carcass or environmental surfaces for food or beverage products:

- Always reference package label for storage instruction and expiration date.
- Always reference product instruction for usage.

To reduce the risks associated with exposure to chemicals and biohazards:

- Always follow standard good laboratory safety practices (GLP¹ or ISO 17025²), including proper containment procedures, wearing appropriate protective apparel while handling testing materials and test samples.

NOTICE

To reduce the risk of false-positive results due to cross contaminated carcass or environmental surfaces for food or beverage products that may result in re-testing or the rejection of food or beverage product:

- Do not touch the sponge to any unintended surface.
- Do not reach into the sponge bag.

To reduce the risk of cross contamination from reuse of sample handling device:

- Do not use the same sponge more than once.

USER RESPONSIBILITY

Users are responsible for familiarizing themselves with product instructions and information. Visit our website at www.neogen.com, or contact your local Neogen representative or distributor for more information.

When selecting a test method, it is important to recognize that external factors such as sampling methods, testing protocols, sample preparation, handling, and laboratory technique may influence results.

It is the user's responsibility in selecting any test method or product to evaluate a sufficient number of samples with the appropriate matrices and microbial challenges to satisfy the user that the chosen test method meets the user's criteria.

It is also the user's responsibility to determine that any test methods and results meet its customers' and suppliers' requirements.

As with any test method, results obtained from use of any Neogen Food Safety product do not constitute a guarantee of the quality of the matrices or processes tested.

LIMITATION OF WARRANTIES / LIMITED REMEDY

EXCEPT AS EXPRESSLY STATED IN A LIMITED WARRANTY SECTION OF INDIVIDUAL PRODUCT PACKAGING, NEOGEN DISCLAIMS ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE. If any Neogen Food Safety Product is defective, Neogen or its authorized distributor will, at its option, replace or refund the purchase price of the product. These are your exclusive remedies. Please contact your Neogen representative or authorized Neogen distributor for any further questions.



LIMITATION OF NEOGEN LIABILITY

NEOGEN WILL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGES, WHETHER DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS. In no event shall Neogen's liability under any legal theory exceed the purchase price of the product alleged to be defective.

STORAGE AND DISPOSAL

Storage: Refer to package label for storage information.

Disposal: Follow current industry standards and local regulations for disposal of contaminated waste. Consult the Safety Data Sheet for additional information.

Product Description	Volume	REF	Volume of Bag	Gloves
Neogen® Dry-Sponge	0 mL	BP133ES	0.9 L (30 oz.)	0
Neogen® Dry-Sponge with Glove	0 mL	BP237SPG	0.9 L (30 oz.)	1
Neogen® Hydrated-Sponge with Buffered Peptone Water Broth	10 mL	HS10BPW	0.9 L (30 oz.)	0
Neogen® Hydrated-Sponge with Buffered Peptone Water Broth, 2 Gloves	10 mL	HS10BPW2G	0.9 L (30 oz.)	2
Neogen® Hydrated-Sponge with D/E Neutralizing Buffer, 2 Gloves	10 mL	HS10DE2G	0.9 L (30 oz.)	2
Neogen® Hydrated-Sponge with Lethen Broth	10 mL	HS10LET	0.9 L (30 oz.)	0
Neogen® Hydrated-Sponge with Lethen Broth, 2 Gloves	10 mL	HS10LET2G	0.9 L (30 oz.)	2
Neogen® Hydrated-Sponge with Neutralizing Buffer	10 mL	HS10NB	0.9 L (30 oz.)	0
Neogen® Hydrated-Sponge with Neutralizing Buffer, 2 Gloves	10 mL	HS10NB2G	0.9 L (30 oz.)	2

INSTRUCTIONS FOR USE

- Shake sponge to end of bag.
- Tear bag open.
NOTE: Add sterile diluent or broth to dry sponge.
- Push sponge to extend from bag.
- Bend blue wires to form open bag.
- Put on sterile gloves.
- Aseptically remove sponge.
- Aseptically swab across the entire sampling surface ^{3,4,5,6}.
- Turn sponge over. Change direction 90°. Aseptically swab the same sampled surface.
- Aseptically place sponge into bag.
- Fold bag to close.
- Fold ends of blue wires inward.
- Following user established procedures, remove any remaining enrichment broth or neutralizing solution residue from the sampled surface.












REFERENCES

- U.S. Food and Drug Administration. Code of Federal Regulations, Title 21, Part 58. Good Laboratory Practice for Nonclinical Laboratory Studies.
- ISO/IEC 17025. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.
- American Public Health Association - Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - Chapter 3: Microbiological Monitoring of the Food Processing Environment, 4th edition.
- US Food and Drug Administration - Bacteriological Analytical Method (available online at <https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/bacteriological-analytical-manual-bam>).
- United States Department of Agriculture - Microbiological Lab Guidebook - Chapters 4.04, 5.04, and 8.07.
- American Public Health Association - Standard Methods for the Examination of Dairy Products - Chapter 13: Microbiological Tests for Equipment, Containers, Water, and Air, 17th edition.

Refer to the current version of the standard methods listed above.

EXPLANATION OF SYMBOLS

info.neogen.com/symbols

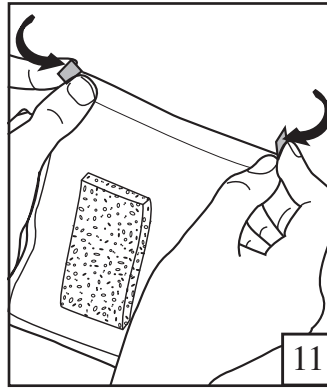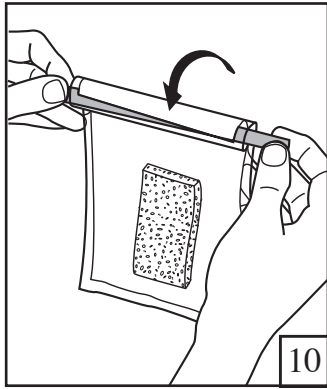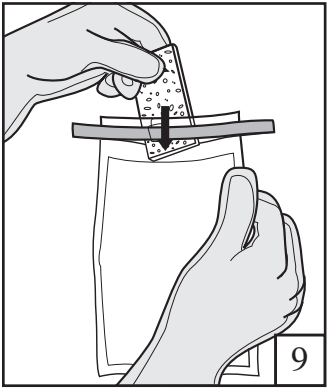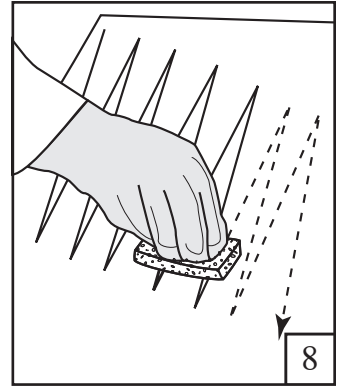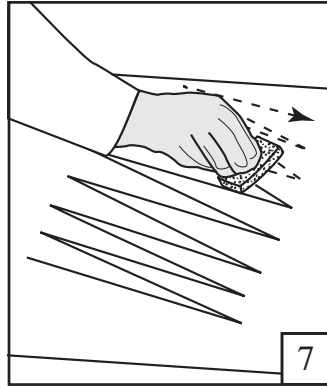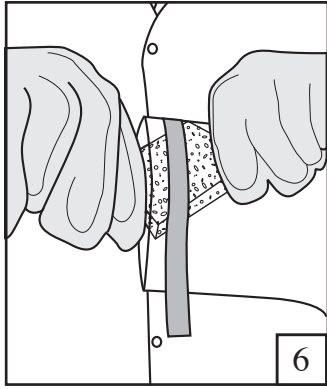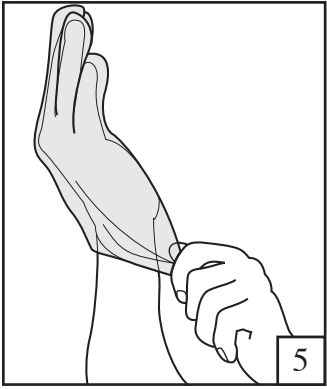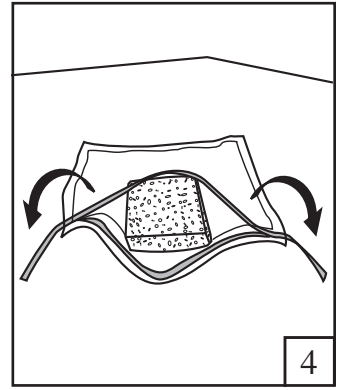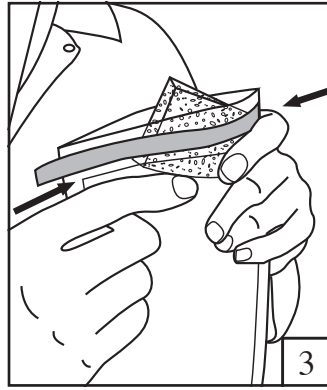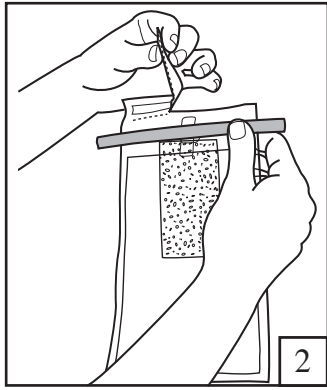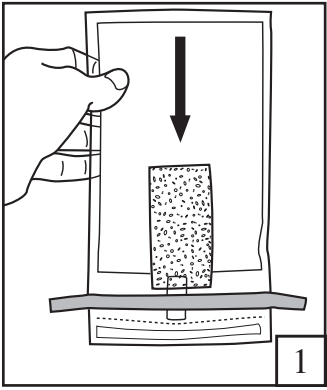

Neogen Food Safety

Neogen Corporation

620 Leshar Place
Lansing, MI 48912 USA
neogen.com

Neogen Europe Ltd.

The Dairy School
Auchincruive
Ayr, KA6 5HU
Scotland, UK

Neogen Ireland, Ltd.

Bray Business Park, Bray
Co. Wicklow
A98YV29, Ireland



Neogen Corporation

620 Leshar Place Lansing, MI 48912 USA
www.neogen.com

Neogen is a trademark of Neogen Corporation.

© Neogen Corporation 2024.

All rights reserved.

FS00834A

Instructions relatives au produit

Eponge sèche

Eponge Humidifiée

DESCRIPTION DU PRODUIT

Eponge sèche ou humidifiée sans biocide de 3,8 x 7,6 cm (1,5 x 3 po.) dans un sac à échantillons. Humidifiée avec un agent spécifié. Avec ou sans gants.

Destiné uniquement à l'usage en laboratoire. Fiche signalétique de sécurité du produit disponible.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'utilisateur doit lire, comprendre et suivre toutes les informations de sécurité mentionnées dans les instructions. Conserver ces consignes de sécurité.

⚠ AVERTISSEMENT Indique une situation dangereuse, qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner le décès, des blessures graves et/ou des dommages matériels.

AVIS Indique une situation dangereuse, qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des dommages matériels.

⚠ AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques de pollution environnementale :

- Se conformer aux normes actuelles du secteur quant à l'élimination des déchets contaminés.

Afin de réduire les risques d'exposition à des dangers biologiques :

- Éliminer les échantillons conformément à toutes les réglementations gouvernementales et aux procédures de laboratoire en vigueur.

Afin de réduire le risque de résultats faux négatifs causés par l'utilisation de surfaces de l'environnement ou de carcasses contaminées pour les boissons ou les produits alimentaires :

- Toujours se reporter à l'étiquette de l'emballage pour les instructions de stockage et la date de péremption.
- Toujours se reporter aux instructions du produit pour l'utilisation.

Afin de réduire les risques associés à l'exposition aux produits chimiques et biologiques dangereux :

- Toujours respecter les pratiques de sécurité réglementaires en laboratoire (GLP¹ ou ISO 17025²), notamment les procédures de confinement appropriées et le port d'un équipement protecteur adéquat lors de la manipulation des produits et des échantillons d'analyse.

AVIS

Afin de réduire le risque de résultats faux positifs causés par la contamination croisée de surfaces de l'environnement ou de carcasses contaminées pour les boissons ou la nourriture, pouvant entraîner une nouvelle analyse ou un rejet de la boisson ou du produit alimentaire :

- L'éponge ne doit pas entrer en contact avec des surfaces non appropriées.
- Ne pas mettre la main dans le sac de l'éponge.

Afin de réduire le risque de contamination croisée due à la réutilisation des dispositifs de transport d'échantillon :

- N'utiliser l'éponge qu'une seule fois.

RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR

Il incombe aux utilisateurs de connaître les instructions et les informations relatives au produit. Se rendre sur le site www.neogen.com pour obtenir de plus amples informations ou contacter le représentant ou distributeur local Neogen.

Lors du choix d'une méthode d'analyse, il est important de savoir que des facteurs externes comme les méthodes d'échantillonnage, les protocoles d'analyse, la préparation des échantillons, la manipulation et les techniques de laboratoire peuvent avoir un impact sur les résultats.

Il incombe à l'utilisateur de sélectionner une méthode ou un produit d'analyse adapté(e) pour évaluer un nombre suffisant d'échantillons avec les matrices et les souches microbiennes appropriées, afin de garantir que la méthode d'analyse est conforme à ses critères.

C'est également à lui de déterminer que les méthodes de test et les résultats correspondent aux exigences de ses clients et de ses fournisseurs.

Comme pour toute méthode d'analyse, les résultats obtenus avec un produit Sécurité Alimentaire Neogen ne constituent pas une garantie en ce qui concerne la qualité des matrices ou des processus testés.

LIMITATION DE GARANTIE / LIMITES DE RECOURS

SAUF MENTION EXPRESSE DANS LA SECTION DE GARANTIE LIMITÉE D'UN EMBALLAGE DE PRODUIT INDIVIDUEL, NEOGEN REJETTE TOUTE GARANTIE EXPLICITE ET IMPLICITE, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALISATION OU DE POSSIBILITÉ D'UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. En cas de défaut sur tout produit Neogen Sécurité Alimentaire, Neogen ou son distributeur agréé s'engage, à leur entière discrétion, à remplacer ou réparer le produit, ou à le rembourser à son prix d'achat. Ce sont là les uniques recours. Merci de contacter votre représentant Neogen ou votre distributeur Neogen agréé pour toute autre question.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ DE NEOGEN

NEOGEN NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES PERTES OU DES DOMMAGES ÉVENTUELS, QU'ILS SOIENT DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIFIQUES, ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, LES PERTES DE BÉNÉFICES. En aucun cas et en aucune manière, la responsabilité de Neogen ne sera engagée légalement au-delà du prix d'achat du produit présenté comme défectueux.

CONSERVATION ET TRAITEMENT DES DÉCHETS

Stockage : se reporter à l'étiquette pour connaître les informations concernant le stockage.

Élimination des déchets : respecter les normes du secteur actuelles et les réglementations locales pour l'élimination des déchets. Consulter la fiche signalétique de sécurité du produit pour plus de renseignements.

Description du PRODUIT	Volume	RÉF.	Volume du sac	Gants
Neogen® Eponge sèche	0 ml	BP133ES	0,9 l (30 fl oz)	0
Neogen® Eponge sèche avec gant	0 ml	BP237SPG	0,9 l (30 fl oz)	1
Neogen® Eponge Humidifiée avec Eau Peptonée Tamponnée	10 ml	HS10BPW	0,9 l (30 fl oz)	0
Neogen® Eponge Humidifiée avec Eau Peptonée Tamponnée, 2 Gants	10 ml	HS10BPW2G	0,9 l (30 fl oz)	2
Neogen® Eponge Humidifiée avec Tampon Neutralisant D/E, 2 Gants	10 ml	HS10DE2G	0,9 l (30 fl oz)	2
Neogen® Eponge Humidifiée avec Bouillon Lethen	10 ml	HS10LET	0,9 l (30 fl oz)	0
Neogen® Eponge Humidifiée avec Bouillon Lethen, 2 Gants	10 ml	HS10LET2G	0,9 l (30 fl oz)	2
Neogen® Eponge Humidifiée avec Tampon Neutralisant	10 ml	HS10NB	0,9 l (30 fl oz)	0
Neogen® Eponge Humidifiée avec Tampon Neutralisant, 2 Gants	10 ml	HS10NB2G	0,9 l (30 fl oz)	2

MODE D'EMPLOI

1. Manipuler l'éponge jusqu'à ce qu'elle atteigne le fond du sac.
2. Ouvrir le sac.
REMARQUE : ajouter un diluant stérile ou un bouillon sur l'éponge sèche.
3. Pousser l'éponge vers l'extérieur du sac.
4. Replier les bandes bleues afin de maintenir le sac ouvert.
5. Mettre des gants stériles.
6. Retirer l'éponge de manière aseptique.
7. Prélever de manière aseptique sur toute la surface d'échantillonnage ^{3, 4, 5, 6}.
8. Retourner l'éponge. Changer la direction de 90°. Prélever de manière aseptique sur la même surface de l'échantillon.
9. Replacer l'éponge dans le sac de manière aseptique.
10. Plier le sac de sorte à le fermer.
11. Plier les extrémités des bandes bleues vers l'intérieur.
12. En respectant les procédures établies pour l'utilisateur, retirer tout résidu de solution neutralisante ou de bouillon d'enrichissement de la surface échantillonnée.












RÉFÉRENCES

1. Food and Drug Administration (États-Unis). Code of Federal Regulations, Title 21, Part 58. Good Laboratory Practice for Nonclinical Laboratory Studies.
2. ISO/IEC 17025. Exigences générales relatives aux compétences pour les analyses et les étalonnages en laboratoire.
3. American Public Health Association - Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - Chapter 3: Microbiological Monitoring of the Food Processing Environment, 4th edition.
4. Food and Drug Administration (États-Unis) - Bacteriological Analytical Method (disponible en ligne en anglais à l'adresse suivante : <https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/bacteriological-analytical-manual-bam>).
5. United States Department of Agriculture - Microbiological Lab Guidebook - Chapters 4.04, 5.04 et 8.07.
6. American Public Health Association - Standard Methods for the Examination of Dairy Products - Chapter 13: Microbiological Tests for Equipment, Containers, Water, and Air, 17th edition.

Se reporter aux versions en cours de validité des méthodes normalisées citées plus haut.

EXPLICATION DES SYMBOLES

info.neogen.com/symbols

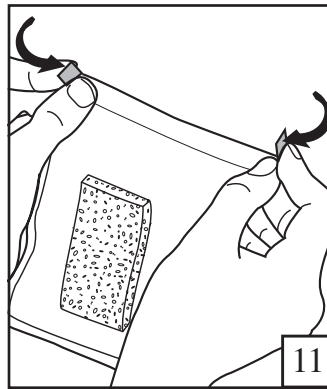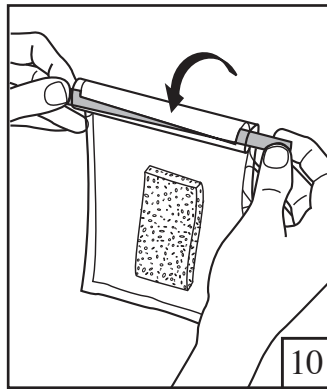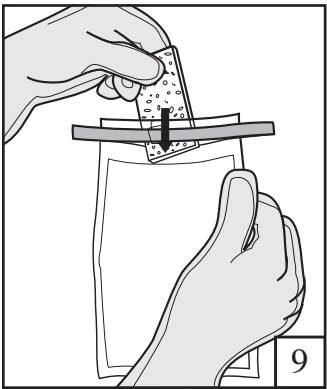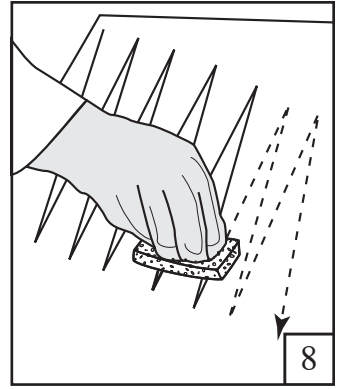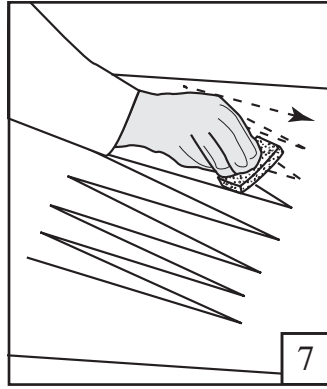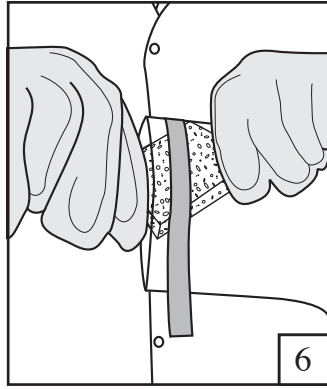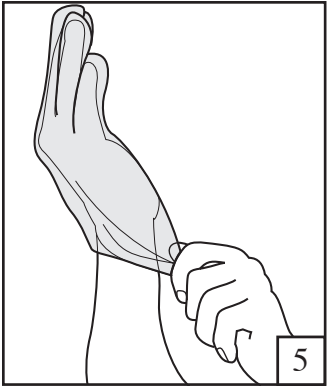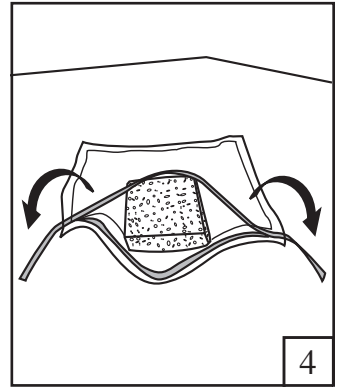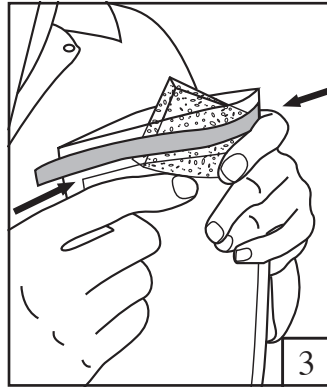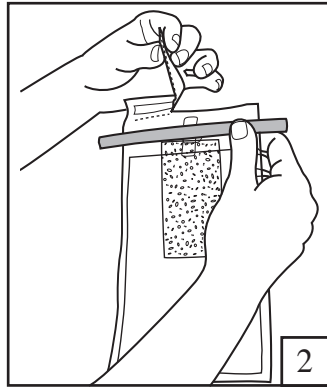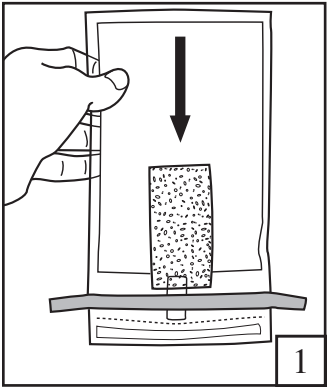

Neogen Food Safety

Neogen Corporation

620 Leshar Place
Lansing, MI 48912 USA
neogen.com

Neogen Europe Ltd.

The Dairy School
Auchincruive
Ayr, KA6 5HU
Scotland, UK

Neogen Ireland, Ltd.

Bray Business Park, Bray
Co. Wicklow
A98YV29, Ireland



Neogen Corporation

620 Leshar Place Lansing, MI 48912 USA
www.neogen.com

Neogen is a trademark of Neogen Corporation.

© Neogen Corporation 2024.

All rights reserved.

FS00834A

Produktanweisungen

Probenschwamm, trocken Befeuchteter Schwamm

PRODUKTBESCHREIBUNG

Trockener oder befeuchteter und biozidfreier Schwamm (3,8 x 7,6 cm) im Probenbeutel. Mit angegebenem Mittel befeuchtet. Mit oder ohne Handschuhe.

Nur für den Laborgebrauch bestimmt. Sicherheitsdatenblatt verfügbar.

SICHERHEIT

Der Benutzer muss alle Sicherheitshinweise der Anleitung lesen, verstehen und befolgen. Diese Sicherheitshinweise aufbewahren, um später auf sie zurückgreifen zu können.

⚠️ WARNUNG Deutet auf eine Gefahrensituation hin, die bei Nichteinhaltung der Sicherheitsmaßnahmen zum Tod oder zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen kann.

BEACHTEN Deutet auf eine potentielle Gefahrensituation hin, die bei Nichteinhaltung der Sicherheitsmaßnahmen zu Sachschäden führen kann.

⚠️ WARNUNG

Zur Verminderung der Risiken, die mit Umweltverschmutzung verbunden sind:

- Die aktuellen Industriestandards und geltenden Vorschriften zur Entsorgung von kontaminiertem Müll beachten.

Zur Verminderung der Risiken, die mit einer Belastung durch Chemikalien verbunden sind:

- Die Proben in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und der gültigen Vorgehensweise im Labor entsorgen.

Zur Verminderung der Risiken, die mit falsch negativen Ergebnissen verbunden sind und zur Verwendung von kontaminierten Schlachtkörpern oder kontaminierten Flächen für Lebensmittel- und Getränkeprodukte führen:

- Immer die Angaben auf dem Verpackungsetikett bezüglich Lagerung und Haltbarkeit beachten.
- Immer die Anweisungen zur Verwendung des Produkts beachten.

Zur Verminderung der Risiken, die mit der Belastung durch Chemikalien und Biogefährdung verbunden sind:

- Immer die Standard-Sicherheitsmaßnahmen für eine gute Laborpraxis (GLP¹ oder die Norm ISO 17025²) einhalten. Dies umfasst die ordnungsgemäße Verwendung von Sicherheitsbehältern sowie das Tragen angemessener Schutzkleidung beim Umgang mit Testmaterialien und -proben.

BEACHTEN

Zur Verminderung der Risiken, die durch falsch negative Ergebnisse verursacht werden, die wiederum aufgrund von durch Kreuzkontamination verschmutzten Schlachtkörpern oder kontaminierten Flächen für Lebensmittel- und Getränkeprodukte entstehen, sowie zur Verringerung von neuen Tests oder der Ausmusterung von Lebensmittel- oder Getränkeprodukten, die aufgrund dieser Risiken erforderlich sind:

- Der Schwamm darf keine nicht für ihn vorgesehene Oberfläche berühren.
- Nicht in den Schwammbeutel greifen.

Zur Verminderung des Risikos einer Kreuzkontamination durch Wiederverwendung eines Probenbearbeitungsgeräts:

- Ein Schwamm darf nicht wiederverwendet werden.

VERANTWORTUNG DES ANWENDERS

Anwender müssen sich auf eigene Verantwortung mit den Gebrauchsanweisungen und Informationen des Produkts vertraut machen. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website unter www.neogen.com oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Neogen Verkaufsvertreter oder Händler.

Bei der Auswahl einer Testmethode ist zu beachten, dass externe Faktoren wie Probennahme, Testprotokoll, Probenaufbereitung, Handhabung und Labortechnik die Ergebnisse beeinflussen können.

Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, bei der Auswahl einer Testmethode oder eines Produkts, diese bzw. dieses mit einer ausreichenden Anzahl von Proben mit geeigneten Matrizen und mikrobiellen Pathogenen zu evaluieren, um sicherzustellen, dass die gewählte Testmethode den Anforderungen entspricht.

Der Anwender trägt ebenfalls die Verantwortung dafür, dass die angewendeten Testmethoden und Ergebnisse den Anforderungen seiner Kunden und Lieferanten entsprechen.

Wie bei allen Testmethoden stellen die mit Neogen Food Safety erzielten Ergebnisse keine Garantie für die Qualität der untersuchten Matrizen oder Prozesse dar.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN / BESCHRÄNKTE RECHTSMITTEL

AUSSER ES WIRD AUSDRÜCKLICH ANDERS IM ABSCHNITT DER HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN DER VERPACKUNG DES JEWEILIGEN PRODUKTS ANGEGEBEN, LEHNT NEOGEN ALLE AUSDRÜCKLICHEN UND STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AB. Sollte sich ein Produkt von Neogen Food Safety als defekt herausstellen, wird es von Neogen oder einem autorisierten Vertragshändler nach eigenem Ermessen ersetzt, repariert oder der Kaufpreis zurückerstattet. Gewährleistungsansprüche bestehen nicht. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Neogen-Vertreter oder autorisierten Neogen-Händler.

NEOGEN HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN

NEOGEN HAFTET NICHT FÜR VERLUSTE ODER SCHÄDEN, GANZ GLEICH OB MITTELBARE, UNMITTELBARE, SPEZIELLE, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF ENTGANGENEN GEWINN. In keinem Fall übersteigt die Haftung der Neogen den Kaufpreis des angeblich defekten Produkts.

LAGERUNG UND ENTSORGUNG

Lagerung: Informationen zur Lagerung bitte dem Verpackungsetikett entnehmen.

Entsorgung: Die aktuellen Industriestandards und geltenden Vorschriften zur Entsorgung von kontaminiertem Müll beachten. Weitere Informationen sind mit Material Sicherheitsdatenblatt (MSDS) enthalten.

Produktbeschreibung	Volumen	Bestellnr.	Beutelvolumen	Handschuhe
Neogen® Probenschwamm, trocken	0 ml	BP133ES	0,9 l (30 oz.)	0
Neogen® Probenschwamm, trocken mit Handschuh	0 ml	BP237SPG	0,9 l (30 oz.)	1
Neogen® Mit gepuffertem Peptonwasser befeuchteter Schwamm	10 ml	HS10BPW	0,9 l (30 oz.)	0
Neogen® Mit gepuffertem Peptonwasser befeuchteter Schwamm und 2 Handschuhe	10 ml	HS10BPW2G	0,9 l (30 oz.)	2
Neogen® Mit D/E-Neutralisationsbouillon befeuchteter Schwamm und 2 Handschuhe	10 ml	HS10DE2G	0,9 l (30 oz.)	2
Neogen® Mit Leethen-Bouillon befeuchteter Schwamm	10 ml	HS10LET	0,9 l (30 oz.)	0
Neogen® Mit Leethen-Bouillon befeuchteter Schwamm und 2 Handschuhe	10 ml	HS10LET2G	0,9 l (30 oz.)	2
Neogen® Mit Neutralisationspuffer befeuchteter Schwamm	10 ml	HS10NB	0,9 l (30 oz.)	0
Neogen® Mit Neutralisationspuffer befeuchteter Schwamm und 2 Handschuhe	10 ml	HS10NB2G	0,9 l (30 oz.)	2

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Schwamm an Beutelende schütteln.
- Beutel aufreißen.
HINWEIS: Steriles Verdünnungsmittel oder sterile Bouillon zum trockenen Schwamm hinzufügen.
- Schwamm ans Ende des Beutels drücken.
- Den offenen Beutel mit den blauen Drähten stabilisieren.
- Sterile Handschuhe anziehen.
- Den Schwamm aseptisch herausnehmen.
- Die gesamte Probenfläche mit dem Schwamm aseptisch abtupfen^{3, 4, 5, 6}.
- Schwamm drehen. Richtung um 90° ändern. Dieselbe Probenfläche mit dem Schwamm aseptisch abtupfen.
- Den Schwamm aseptisch in den Beutel zurücklegen.
- Beutel zum Schließen falten.
- Die Enden der blauen Drähte nach innen falten.
- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Verfahren Rückstände der Anreicherungsbouillon oder Neutralisierungslösung von der Probenfläche entfernen.

LITERATURANGABEN












- U.S. Food and Drug Administration. Code of Federal Regulations, Title 21, Part 58. Good Laboratory Practice for Nonclinical Laboratory Studies.
- ISO/IEC 17025. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.
- American Public Health Association - Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - Chapter 3: Microbiological Monitoring of the Food Processing Environment, 4th edition.
- US Food and Drug Administration - Bacteriological Analytical Method (siehe <https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/bacteriological-analytical-manual-bam>).

5. United States Department of Agriculture - Microbiological Lab Guidebook - Chapters 4.04, 5.04, and 8.07.
6. American Public Health Association - Standard Methods for the Examination of Dairy Products - Chapter 13: Microbiological Tests for Equipment, Containers, Water, and Air, 17th edition.

Bitte beachten Sie die aktuellen Versionen der oben aufgeführten Standardverfahren.

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

info.neogen.com/symbols

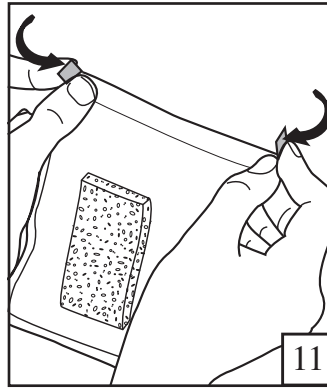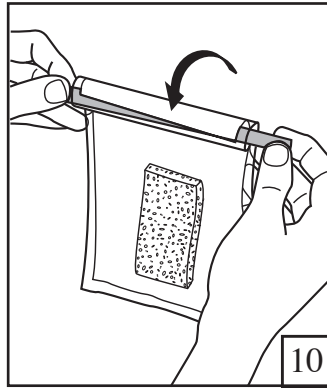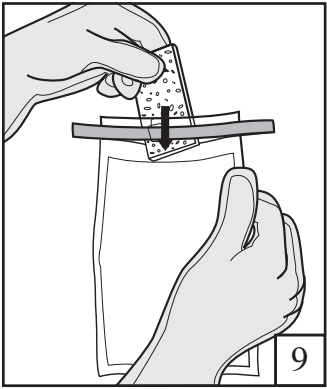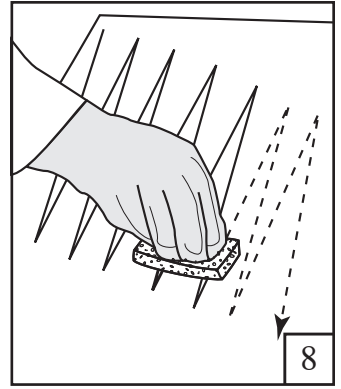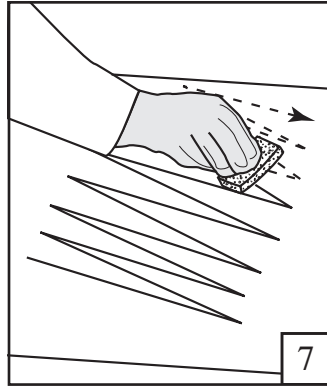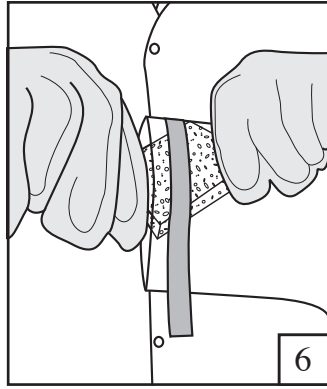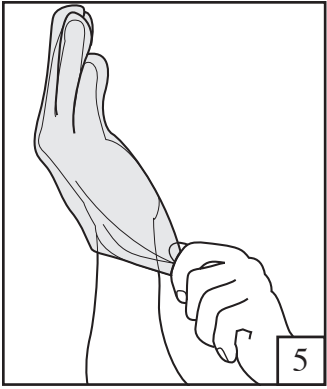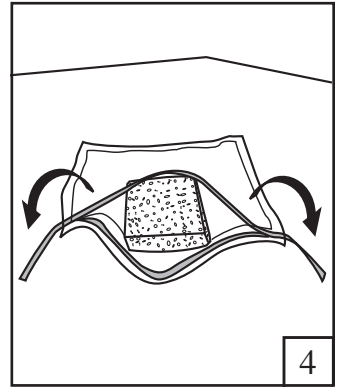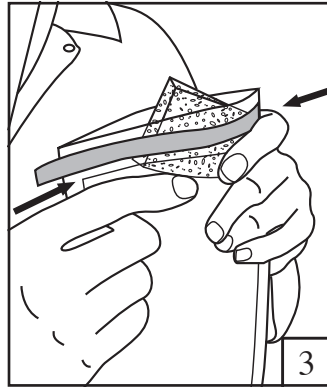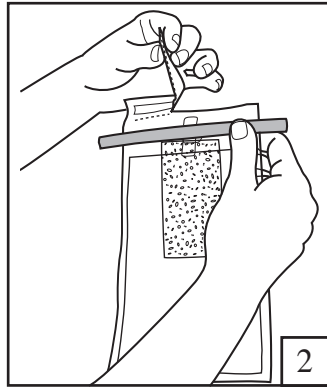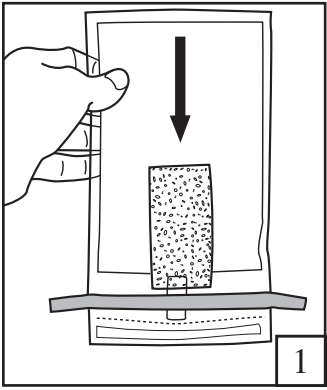

Neogen Food Safety

Neogen Corporation

620 Leshar Place
Lansing, MI 48912 USA
neogen.com

Neogen Europe Ltd.

The Dairy School
Auchincruive
Ayr, KA6 5HU
Scotland, UK

Neogen Ireland, Ltd.

Bray Business Park, Bray
Co. Wicklow
A98YV29, Ireland



Neogen Corporation

620 Leshar Place Lansing, MI 48912 USA
www.neogen.com

Neogen is a trademark of Neogen Corporation.

© Neogen Corporation 2024.

All rights reserved.

FS00834A

Istruzioni sul prodotto

Spugna secca

Spugna idratata

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Spugna secca o pre-idratata e priva di biocidi 3,8 x 7,6 cm (1,5 x 3 in.) in sacchetto campione. Pre-idratata con l'agente specificato. Con o senza guanti.

Esclusivamente per uso di laboratorio. È disponibile la scheda di sicurezza del materiale.

SICUREZZA

L'utente deve leggere, comprendere e seguire tutte le informazioni per la sicurezza contenute nelle istruzioni. Conservare queste istruzioni per la sicurezza per poterle consultare in futuro.

⚠ AVVERTENZA Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare la morte o una lesione grave e/o danni materiali.

AVVISO Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare danni materiali.

⚠ AVVERTENZA

Per ridurre i rischi associati alla contaminazione ambientale:

- Seguire gli standard di settore correnti e le norme locali per lo smaltimento di rifiuti contaminati.

Per ridurre i rischi associati all'esposizione a sostanze a rischio biologico:

- Smaltire i campioni secondo tutte le norme governative e procedure di laboratorio applicabili.

Per ridurre il rischio associato ai falsi negativi che comporterebbero l'uso di carcasse o superfici ambientali contaminate per alimenti o bevande:

- Controllare sempre l'etichetta sulla confezione per le istruzioni di conservazione e la data di scadenza.
- Fare sempre riferimento alle istruzioni del prodotto per l'utilizzo.

Per ridurre i rischi associati all'esposizione a sostanze chimiche e pericoli biologici:

- Seguire sempre le corrette pratiche di sicurezza standard di laboratorio (GLP¹ o ISO 17025²), incluse le adeguate procedure di contenimento e l'indossare indumenti protettivi quando si maneggiano materiali e campioni da test.

AVVISO

Per ridurre il rischio di risultati falsi positivi dovuti a carcasse o superfici ambientali contaminate per alimenti o bevande che possono portare a ripetere i test o al rifiuto dell'alimento o della bevanda:

- Non toccare la spugna con qualsiasi superficie non prevista.
- Non pescare dal sacchetto della spugna.

Per ridurre il rischio di contaminazione crociata da riutilizzo del dispositivo di manipolazione campioni:

- Non utilizzare la stessa spugna più di una volta.

RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

Gli utenti sono tenuti a leggere e apprendere le istruzioni e le informazioni relative al prodotto. Visitare il sito Web www.neogen.com o contattare il distributore o il rappresentante Neogen di zona per ulteriori informazioni.

Nella scelta di un metodo di test, è importante tener conto del fatto che fattori esterni quali i metodi di campionamento, i protocolli di analisi, la preparazione del campione, la manipolazione e le tecniche di laboratorio possono influenzare i risultati.

È responsabilità dell'utente, nel selezionare un qualsiasi metodo di test o prodotto, valutare un numero sufficiente di campioni con le matrici appropriate e con particolari caratteristiche microbiche per soddisfare i criteri relativi alla metodologia di test scelta dall'utente.

L'utente ha inoltre la responsabilità di accertarsi che tutti i metodi di analisi utilizzati e i risultati ottenuti soddisfino i requisiti dei propri clienti e fornitori.

Come per qualsiasi metodo di test, i risultati ottenuti grazie all'uso di prodotti di Neogen Sicurezza alimentare non costituiscono una garanzia della qualità delle matrici o dei processi sottoposti a prova.

LIMITAZIONE DI GARANZIA/RIMEDIO LIMITATO

SALVO NEI CASI ESPRESSAMENTE INDICATI IN UNA SEZIONE DI GARANZIA LIMITATA DELLA SINGOLA CONFEZIONE DEL PRODOTTO, NEOGEN NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON A ESSE LIMITATE, LE EVENTUALI GARANZIE DI COMMERCIALITÀ O DI IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. Qualora un prodotto Neogen Sicurezza Alimentare sia difettoso, Neogen o il suo distributore autorizzato provvederanno, a loro discrezione, alla sostituzione o al rimborso del prezzo d'acquisto del prodotto. Questi sono gli unici rimedi a disposizione del cliente. Per ulteriori domande, contattare il rappresentante Neogen o il distributore autorizzato Neogen.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DA PARTE DI NEOGEN

NEOGEN NON SARÀ RESPONSABILE DI PERDITE O DANNI, DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEGUENTI, INCLUSA, MA NON IN VIA LIMITATIVA, LA PERDITA DI PROFITTO. In nessun caso la responsabilità legale di Neogen andrà oltre il prezzo d'acquisto del prodotto presunto difettoso.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Conservazione: fare riferimento all'etichetta sulla confezione per le informazioni di conservazione.

Smaltimento: seguire gli standard di settore correnti e le norme locali per lo smaltimento di rifiuti contaminati. Consultare la scheda di sicurezza del materiale per informazioni aggiuntive.

Descrizione del PRODOTTO	Volume	REF	Volume del sacchetto	Guanti
Spugna secca Neogen®	0 ml	BP133ES	0,9 l (30 once)	0
Spugna secca Neogen® con guanto	0 ml	BP237SPG	0,9 l (30 once)	1
Spugna idratata Neogen® con acqua peptonata tamponata	10 ml	HS10BPW	0,9 l (30 once)	0
Spugna idratata Neogen® con acqua peptonata tamponata, 2 guanti	10 ml	HS10BPW2G	0,9 l (30 once)	2
Spugna idratata Neogen® con tampone neutralizzante Dey-Engley, 2 guanti	10 ml	HS10DE2G	0,9 l (30 once)	2
Spugna idratata Neogen® con brodo Letheen	10 ml	HS10LET	0,9 l (30 once)	0
Spugna idratata Neogen® con brodo Letheen, 2 guanti	10 ml	HS10LET2G	0,9 l (30 once)	2
Spugna idratata Neogen® con tampone neutralizzante	10 ml	HS10NB	0,9 l (30 once)	0
Spugna idratata Neogen® con tampone neutralizzante, 2 guanti	10 ml	HS10NB2G	0,9 l (30 once)	2

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Scuotere la spugna sino alla fine del sacchetto.
2. Aprire il sacchetto.
NOTA: aggiungere diluente sterile o brodo alla spugna secca.
3. Spingere la spugna per farla fuoriuscire dal sacchetto.
4. Piegare i fili blu per tenere aperto il sacchetto.
5. Indossare guanti sterili.
6. Rimuovere asetticamente la spugna.
7. Tamponare asetticamente lungo l'intera superficie di campionamento^{3,4,5,6}.
8. Capovolgere la spugna. Cambiare la direzione di 90°. Tamponare asetticamente la stessa superficie campionata.
9. Riporre asetticamente la spugna nel sacchetto.
10. Ripiegare il sacchetto per chiuderlo.
11. Piegare le estremità dei fili blu verso l'interno.
12. Seguendo le procedure prestabilite dall'utente, rimuovere ogni residuo di brodo arricchente o soluzione neutralizzante dalla superficie campionata.












RIFERIMENTI

1. U.S. Food and Drug Administration. Code of Federal Regulations, Title 21, Part 58. Good Laboratory Practice for Nonclinical Laboratory Studies.
2. ISO/IEC 17025. Requisiti generali per la competenza dei laboratori di test e di calibrazione.
3. American Public Health Association - Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods – Capitolo 3: Microbiological Monitoring of the Food Processing Environment, 4a edizione.
4. US Food and Drug Administration - Bacteriological Analytical Method (disponibile online all'indirizzo <https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/bacteriological-analytical-manual-bam>).
5. United States Department of Agriculture - Microbiological Lab Guidebook - Capitoli 4.04, 5.04 e 8.07.
6. American Public Health Association - Standard Methods for the Examination of Dairy Products – Capitolo 13: Microbiological Tests for Equipment, Containers, Water, and Air, 17a edizione.

Fare riferimento alla versione attuale dei metodi standard elencati in precedenza.

LEGENDA DEI SIMBOLI

info.neogen.com/symbols

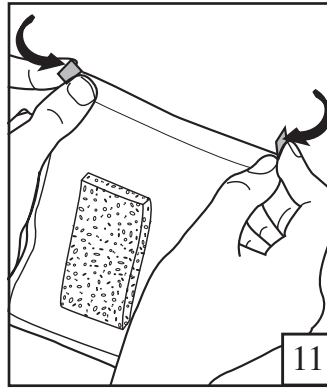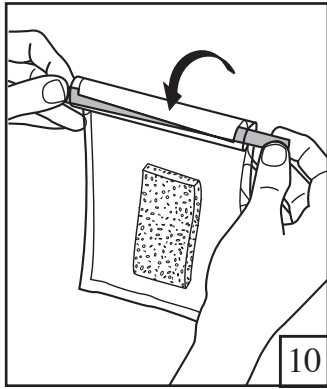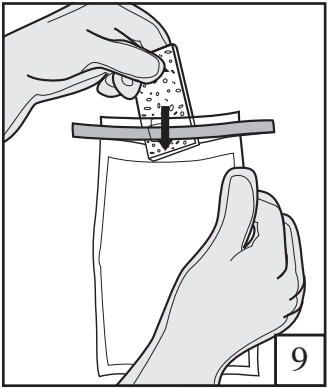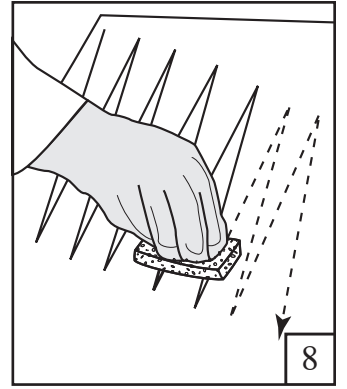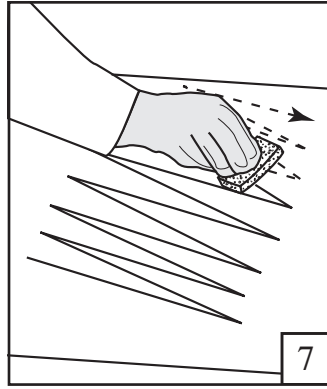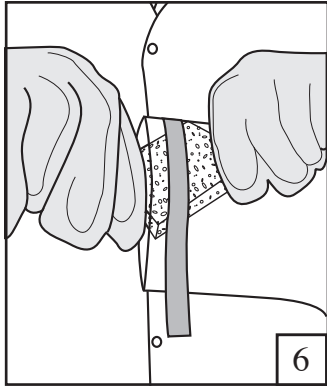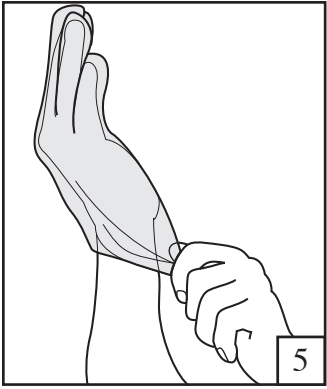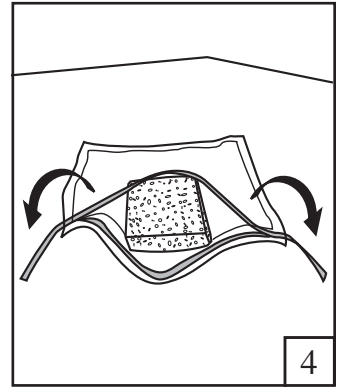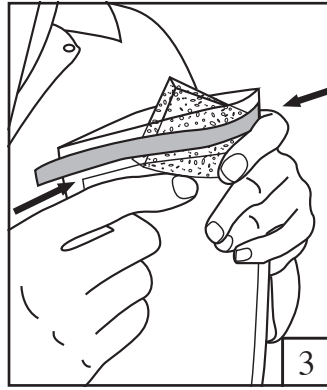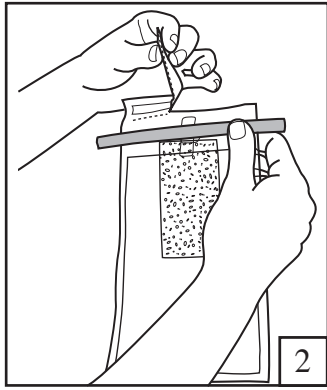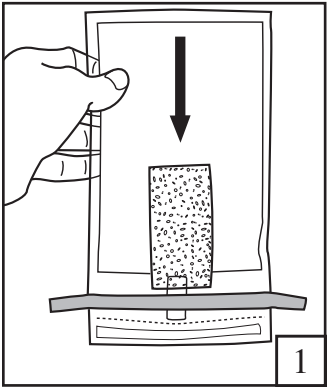

Neogen Food Safety

Neogen Corporation

620 Leshar Place
Lansing, MI 48912 USA
neogen.com

Neogen Europe Ltd.

The Dairy School
Auchincruive
Ayr, KA6 5HU
Scotland, UK

Neogen Ireland, Ltd.

Bray Business Park, Bray
Co. Wicklow
A98YV29, Ireland



Neogen Corporation

620 Leshar Place Lansing, MI 48912 USA
www.neogen.com

Neogen is a trademark of Neogen Corporation.

© Neogen Corporation 2024.

All rights reserved.

FS00834A

Instrucciones del producto

Esponja seca

Esponja hidratada

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esponja seca o hidratada previamente y libre de biocida de 3,8 x 7,6 cm (1,5 x 3 pulg.) en bolsa de muestreo. Hidratada previamente con agente especificado. Con o sin guantes.

Solo para uso de laboratorio. Está disponible la Hoja de datos sobre seguridad de materiales.

SEGURIDAD

El usuario debe leer, comprender y respetar toda la información de seguridad que se incluye en las instrucciones. Guarde las instrucciones de seguridad para referencias futuras.

 **ADVERTENCIA** Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría ocasionar la muerte o lesiones graves y/o daños a la propiedad.

AVISO Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría ocasionar daños a la propiedad.

ADVERTENCIA

Para reducir los riesgos relacionados con la contaminación ambiental:

- Proceda de acuerdo con la normativa local y los estándares de la industria actuales para el desecho de desperdicios contaminados.

Para reducir los riesgos relacionados con la exposición a riesgos biológicos:

- Deseche las muestras conforme a todas las normativas gubernamentales vigentes y a todos los procedimientos de laboratorio correspondientes.

Para reducir los riesgos relacionados con resultados falso negativos debido al uso de carcacas o superficies ambientales contaminadas para productos alimenticios o bebibles:

- Consulte siempre la etiqueta de empaque para obtener instrucciones de almacenamiento y la fecha de vencimiento.
- Consulte siempre las instrucciones de uso del producto.

Para reducir los riesgos relacionados con la exposición a productos químicos y riesgos biológicos:

- Respete siempre las buenas prácticas estándares de seguridad de laboratorio (GLP¹ o ISO 17025²), incluidos los procedimientos de contención correctos y el uso de la ropa protección adecuada durante la manipulación de materiales y muestras de prueba.

AVISO

Para reducir los riesgos de resultados falso positivos debido a carcacas o superficies ambientales para productos alimenticios o bebibles con contaminación cruzada que puedan provocar la repetición de pruebas o el rechazo de productos alimenticios o bebibles:

- No ponga la esponja en contacto con ninguna superficie no deseada.
- No meta la mano dentro de la bolsa de la esponja.

Para reducir los riesgos de contaminación cruzada por la reutilización del dispositivo de manipulación de muestras:

- No use la misma esponja más de una vez.

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

Los usuarios son responsables de familiarizarse con la información y las instrucciones del producto. Visite nuestro sitio web en www.neogen.com o comuníquese con su representante o distribuidor local de Neogen para obtener más información.

Al seleccionar un método de prueba, es importante reconocer que factores externos tales como los métodos de muestreo, los protocolos de prueba, la preparación de la muestra, la manipulación y la técnica de laboratorio pueden afectar los resultados.

Al seleccionar cualquier método de prueba o producto, es responsabilidad del usuario evaluar un número suficiente de muestras con retos microbianos y matrices apropiadas para satisfacer al usuario en cuanto a que el método de prueba cumple los criterios necesarios.

Además, es responsabilidad del usuario determinar que cualquier método de prueba y sus resultados cumplen los requisitos de sus clientes y proveedores.

Como sucede con cualquier método de prueba, los resultados obtenidos del uso de cualquier producto de Neogen Food Safety no constituyen una garantía de calidad de las matrices ni de los procesos analizados.

LIMITACIÓN DE GARANTÍAS/RECURSO LIMITADO

SALVO LO EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN UNA SECCIÓN DE GARANTÍA LIMITADA EN EL EMBALAJE DE UN PRODUCTO ESPECÍFICO, NEOGEN RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS Y TÁCITAS, INCLUIDAS –ENTRE OTRAS– GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN USO EN PARTICULAR. Si un producto de Neogen Food Safety es defectuoso, Neogen o su distribuidor autorizado reemplazará el producto o reembolsará el precio de compra del producto, a su elección. Estos son sus recursos exclusivos. Póngase en contacto con su representante de Neogen o distribuidor autorizado de Neogen para que se le responda cualquier otra pregunta.



LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE NEOGEN

NEOGEN NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA PÉRDIDA NI NINGÚN DAÑO, YA SEA DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL O RESULTANTE, INCLUYENDO –PERO SIN LIMITARSE A– LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS. En ningún caso, la responsabilidad de Neogen conforme a ninguna teoría legal excederá el precio de compra del producto supuestamente defectuoso.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO

Almacenamiento: consulte la etiqueta de empaque para obtener información de almacenamiento.

Desecho: proceda de acuerdo con la normativa local y los estándares de la industria actuales para el desecho de desperdicios contaminados. Consulte la Hoja de datos sobre seguridad de materiales para obtener más información.

Descripción del producto	Volumen	REF	Volumen de la bolsa	Guantes
Neogen® Esponja Seca	0 ml	BP133ES	0,9 l (30 onzas)	0
Neogen® Esponja Seca con Guante	0 ml	BP237SPG	0,9 l (30 onzas)	1
Neogen® Esponja hidratada con caldo de agua peptonada tamponada	10 ml	HS10BPW	0,9 l (30 onzas)	0
Neogen® Esponja hidratada con caldo de agua peptonada tamponada, dos guantes	10 ml	HS10BPW2G	0,9 l (30 onzas)	2
Neogen® Esponja hidratada con tampón neutralizante D/E, dos guantes	10 ml	HS10DE2G	0,9 l (30 onzas)	2
Neogen® Esponja hidratada con caldo Lethen	10 ml	HS10LET	0,9 l (30 onzas)	0
Neogen® Esponja hidratada con caldo Lethen, dos guantes	10 ml	HS10LET2G	0,9 l (30 onzas)	2
Neogen® Esponja hidratada con tampón neutralizante	10 ml	HS10NB	0,9 l (30 onzas)	0
Neogen® Esponja hidratada con tampón neutralizante, dos guantes	10 ml	HS10NB2G	0,9 l (30 onzas)	2

INSTRUCCIONES DE USO

- Sacuda la esponja hasta el extremo de la bolsa.
- Rompa la bolsa para abrirla.
NOTA: Agregue diluyente estéril o caldo a la esponja seca.
- Empuje la esponja para que sobresalga de la bolsa.
- Curve las cintas azules para que formen una bolsa abierta.
- Póngase los guantes estériles.
- Extraiga asépticamente la esponja.
- Frote asépticamente la esponja por toda la superficie de muestreo^{3,4,5,6}.
- De vuelta la esponja. Cambie la dirección en 90°. Frote asépticamente la esponja por la misma superficie de muestreo.
- Coloque la esponja asépticamente dentro de la bolsa.
- Doble la bolsa para cerrarla.
- Doble los extremos de las cintas azules hacia adentro.
- De acuerdo con los procedimientos establecidos para el usuario, quite cualquier resto de caldo de enriquecimiento o residuo de solución neutralizante de la superficie de muestreo.












REFERENCIAS

- U.S. Food and Drug Administration. Code of Federal Regulations, Title 21, Part 58. Good Laboratory Practice for Nonclinical Laboratory Studies.
- ISO/IEC 17025. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.
- American Public Health Association - Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - Chapter 3: Microbiological Monitoring of the Food Processing Environment, 4th edition.
- US Food and Drug Administration - Bacteriological Analytical Method (disponible en línea en <https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/bacteriological-analytical-manual-bam>).
- United States Department of Agriculture - Microbiological Lab Guidebook - Chapters 4.04, 5.04, and 8.07.
- American Public Health Association - Standard Methods for the Examination of Dairy Products - Chapter 13: Microbiological Tests for Equipment, Containers, Water, and Air, 17th edition.

Consulte las versiones actuales de los métodos estándares enumerados anteriormente.

EXPLICACIÓN DE SÍMBOLOS

info.neogen.com/symbols

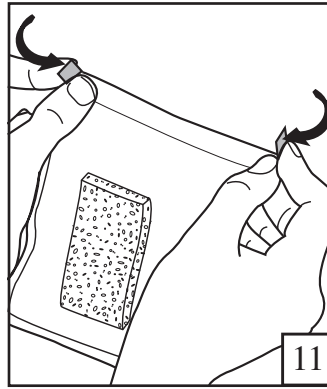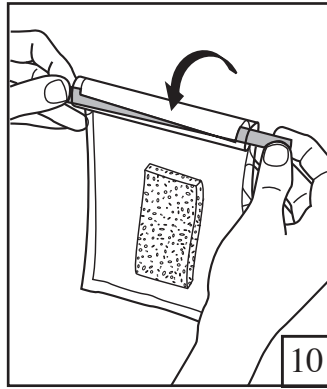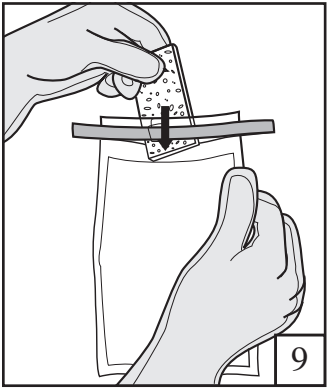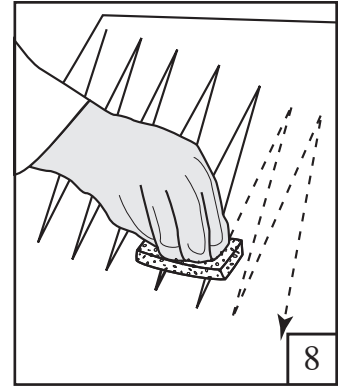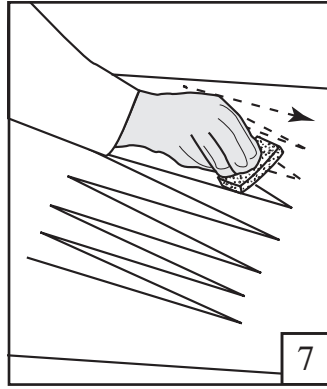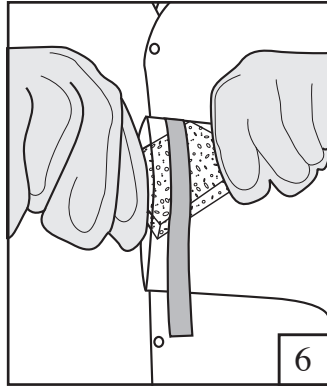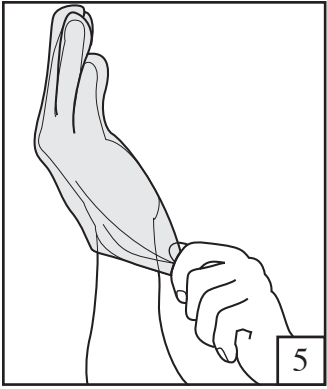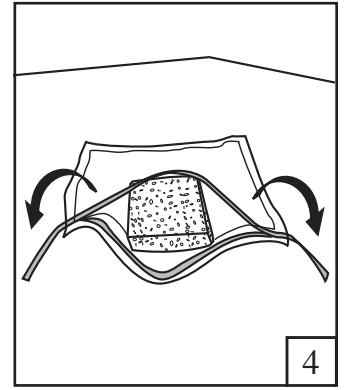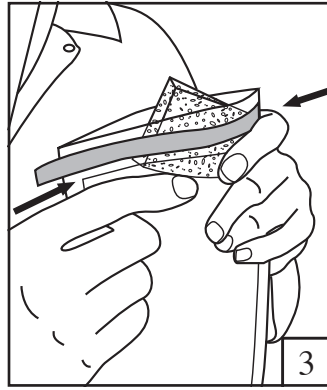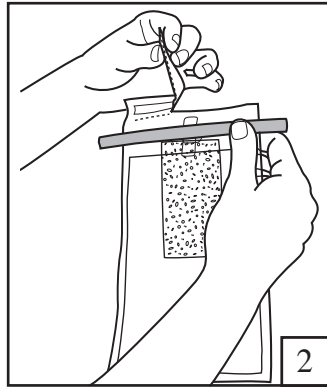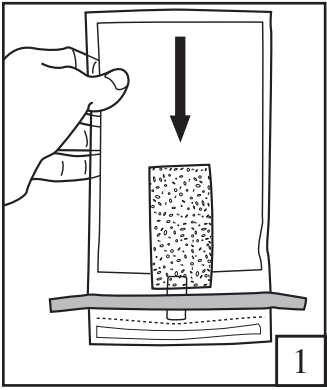

Neogen Food Safety

Neogen Corporation

620 Leshar Place
Lansing, MI 48912 USA
neogen.com

Neogen Europe Ltd.

The Dairy School
Auchincruive
Ayr, KA6 5HU
Scotland, UK

Neogen Ireland, Ltd.

Bray Business Park, Bray
Co. Wicklow
A98YV29, Ireland



Neogen Corporation

620 Leshar Place Lansing, MI 48912 USA
www.neogen.com

Neogen is a trademark of Neogen Corporation.

© Neogen Corporation 2024.

All rights reserved.

FS00834A

Productinstructies

Dry-Sponge

Gehydrateerde spons

PRODUCTBESCHRIJVING

Droge of gehydrateerde en biocidevrije spons van 3,8 x 7,6 cm (1,5 x 3 in.) in monsterzak. Gehydrateerd met gespecificeerd middel. Met of zonder handschoenen.

Uitsluitend voor laboratoriumgebruik. Veiligheidsinformatieblad beschikbaar.

VEILIGHEID

De gebruiker dient alle veiligheidsinformatie in de instructies te lezen, te begrijpen en zich eraan te houden. Bewaar de veiligheidsinstructies om later te kunnen raadplegen.

⚠ WAARSCHUWING Geeft een gevaarlijke situatie aan, die als ze niet vermeden wordt, de dood of ernstig letsel en/of materiële schade tot gevolg kan hebben.

MEDEDELING Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als ze niet vermeden wordt, kan resulteren in materiële schade.

⚠ WAARSCHUWING

Om de risico's van milieuverontreiniging te verminderen:

- Houd u aan de gangbare industriële normen en lokale verordeningen voor het afvoeren van verontreinigd afval.

Om de risico's van blootstelling aan biorisico's te verminderen:

- Voer monsters af overeenkomstig alle toepasselijke overheidsverordeningen en laboratoriumprocedures.

Om het risico op vals negatieve resultaten, resulterend in het gebruik van verontreinigde karkassen of omgevingsoppervlakken voor voedsel- en drankproducten, te verminderen:

- Raadpleeg altijd het etiket op de verpakking voor opslaginstructies en de vervaldatum.
- Raadpleeg altijd de productinstructies voordat u het product gebruikt.

Om het risico op blootstelling aan chemicaliën en biorisico's te vermijden:

- Houd u altijd aan de normale praktijken voor een goede laboratoriumveiligheid (GLP¹ of ISO 17025²), waaronder passende procedures voor insluiting, en draag passende beschermende kleding terwijl u testmaterialen en testmonsters hanteert.

MEDEDELING

Om het risico op vals positieve resultaten ten gevolge van kruisbesmetting op karkassen of omgevingsoppervlakken voor voedsel- en drankproducten, hetgeen kan leiden tot her testen of afkeuring van het voedsel- of drankproduct, te verminderen:

- Zorg dat de spons niet in contact komt met een oppervlak waarvoor het niet is bedoeld.
- Steek uw hand niet in de sponszak.

Om het risico op kruisbesmetting als gevolg van hergebruik van het monsternameapparaat te verminderen:

- Gebruik dezelfde spons niet meer dan één keer.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

Gebruikers worden geacht zich vertrouwd te maken met de productinstructies en -informatie. Bezoek onze website www.neogen.com of neem contact op met uw plaatselijke Neogen-vertegenwoordiger of -distributeur voor meer informatie.

Bij het kiezen van een testmethode is het belangrijk om te erkennen dat externe factoren zoals proefmethoden, testprotocollen, monstervoorbereiding en -behandeling en laboratoriumtechniek invloed kunnen hebben op de resultaten.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de selectie van een testmethode of product waarbij een voldoende aantal monsters met gepaste matrices en microbiële problemen wordt onderzocht zodat de gekozen testmethode voldoet aan de criteria van de gebruiker.

Het is ook de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of de testmethoden en resultaten voldoen aan de vereisten van klanten en leveranciers.

Zoals bij elke testmethode, garanderen de verkregen resultaten van het gebruik van een Neogen Voedselveiligheidsproduct de kwaliteit van de geteste matrices of processen niet.

BEPERKTE GARANTIE/BEPERKT VERHAAL

BEHALVE WAAR UITDRUKKELIJK VERMELD IN EEN BEPERKTE GARANTIEBEPALING VAN EEN INDIVIDUELE PRODUCTVERPAKKING, WIJST NEOGEN ALLE UITDRUKKELIJKE EN IMPLICIETE GARANTIES AF, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ELKE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE GOEDE WERKING EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Als een Neogen Voedselveiligheidsproduct gebrekkig is, zal Neogen of zijn gevolmachtigde distributeur, naar eigen keuze het product vervangen of de aankoopprijs van het product terugbetalen. Dit is het enige rechtsmiddel waarover u beschikt. Neem contact op met uw Neogen-vertegenwoordiger of erkende Neogen-distributeur voor verdere vragen.

BEPERKING VAN NEOGEN AANSPRAKELIJKHEID

NEOGEN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE, ONGEACHT OF HET GAAT OM RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING. In geen geval zal de wettelijke aansprakelijkheid van Neogen onder om het even welke juridische theorie de aankoopprijs van het zogenaamd gebrekkige product overschrijden.

OPSLAG EN AFVALVERWERKING

Opslag: raadpleeg het etiket op de verpakking voor informatie over opslag.

Verwijdering: houd u aan de gangbare industriële normen en lokale verordeningen voor het afvoeren van verontreinigd afval. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Productbeschrijving	Volume	REF	Volume van de zak	Handschoenen
Neogen® Dry-Sponge	0 ml	BP133ES	0,9 l (30 oz.)	0
Neogen® Dry-Sponge met handschoen	0 ml	BP237SPG	0,9 l (30 oz.)	1
Neogen® Gehydrateerde spons met gebufferd peptonwater	10 ml	HS10BPW	0,9 l (30 oz.)	0
Neogen® Gehydrateerde spons met gebufferd peptonwater, 2 handschoenen	10 ml	HS10BPW2G	0,9 l (30 oz.)	2
Neogen® Gehydrateerde spons met D/E neutraliserende buffer, 2 handschoenen	10 ml	HS10DE2G	0,9 l (30 oz.)	2
Neogen® Gehydrateerde spons met letheenbouillon	10 ml	HS10LET	0,9 l (30 oz.)	0
Neogen® Gehydrateerde spons met letheenbouillon, 2 handschoenen	10 ml	HS10LET2G	0,9 l (30 oz.)	2
Neogen® Gehydrateerde spons met neutraliserende buffer	10 ml	HS10NB	0,9 l (30 oz.)	0
Neogen® Gehydrateerde spons met neutraliserende buffer, 2 handschoenen	10 ml	HS10NB2G	0,9 l (30 oz.)	2

GEbruIKSAANWIJZINGEN

- Schud de spons naar het uiteinde van de zak.
- Scheur de zak open.
OPMERKING: voeg steriel verdunningsmiddel of bouillon aan de droge spons toe.
- Duw tegen de spons tot deze uit de zak steekt.
- Buig de blauwe draden om de zak open te houden.
- Trek steriele handschoenen aan.
- Haal de spons op aseptische wijze uit de zak.
- Neem op aseptische wijze een uitstrijkje van het gehele oppervlak van het monster^{3,4,5,6}.
- Draai de spons om. Verander de richting 90°. Neem op aseptische wijze een uitstrijkje van hetzelfde monsteroppervlak.
- Plaats de spons op aseptische wijze in de zak.
- Vouw de zak om deze te sluiten.
- Vouw de uiteinden van de blauwe draden naar binnen.
- Verwijder, conform de vaste gebruikersprocedures, alle resten van de verrijkbingsbouillon of neutraliserende oplossing van het oppervlak waarvan u een monster hebt genomen.












REFERENTIES

- De Amerikaanse Food and Drug Administration. Code of Federal Regulations, hoofdstuk 21, deel 58. Good Laboratory Practice voor niet-medisch laboratoriumonderzoek.
- ISO/IEC 17025. Algemene eisen voor de bekwaamheid van test- & kalibratielaboratoria.
- American Public Health Association - Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - Hoofdstuk 3: Microbiological Monitoring of the Food Processing Environment, 4e uitgave.
- US Food and Drug Administration - Bacteriological Analytical Method (online beschikbaar op <https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/bacteriological-analytical-manual-bam>).
- United States Department of Agriculture - Microbiological Lab Guidebook - Hoofdstuk 4.04, 5.04 en 8.07.
- American Public Health Association - Standard Methods for the Examination of Dairy Products - Hoofdstuk 13: Microbiological Tests for Equipment, Containers, Water, and Air, 17e uitgave.

Raadpleeg de huidige versies van de standaardmethodes die hierboven zijn opgesomd.

VERKLARING VAN SYMBOLEN

info.neogen.com/symbols

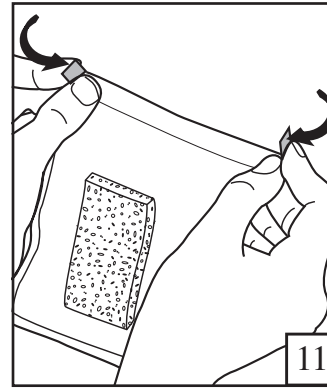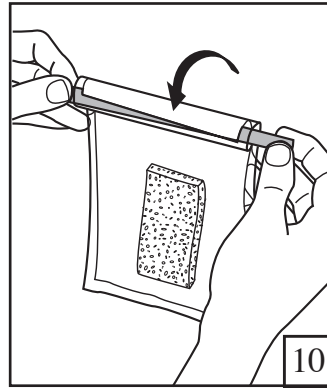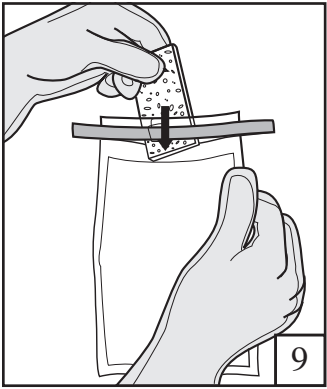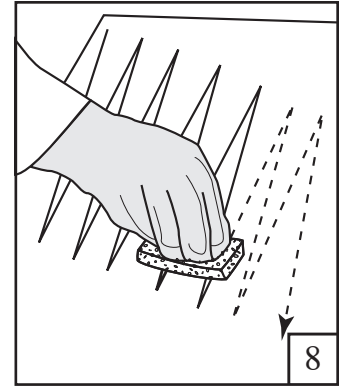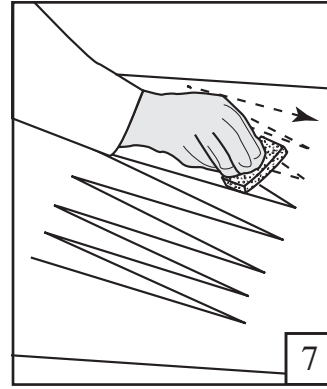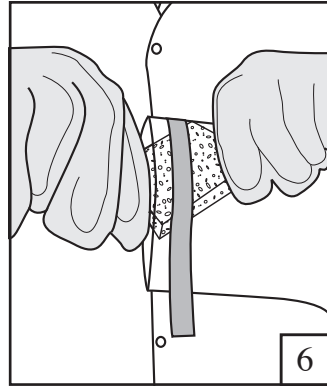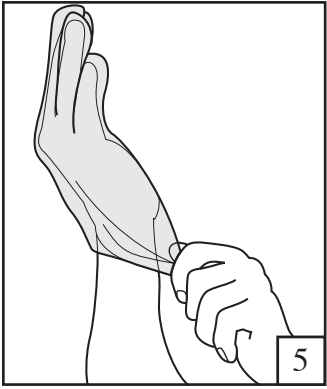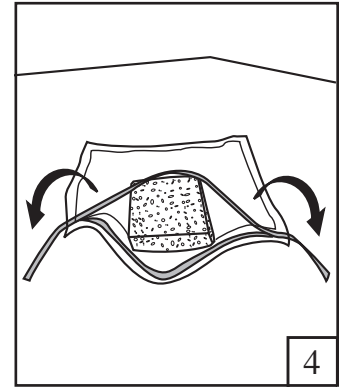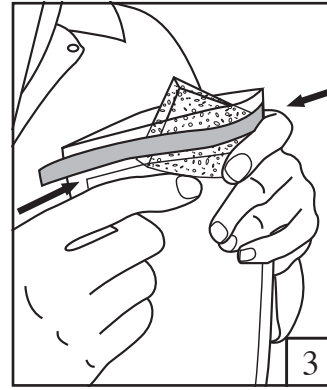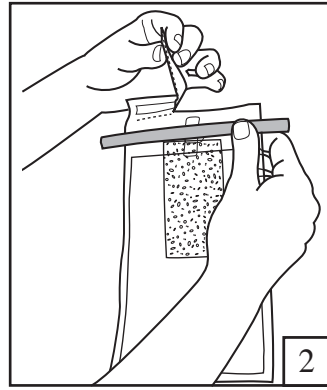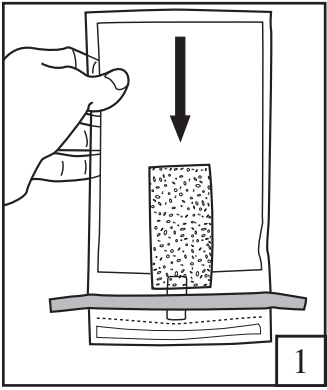

Neogen Food Safety

Neogen Corporation

620 Leshar Place
Lansing, MI 48912 USA
neogen.com

Neogen Europe Ltd.

The Dairy School
Auchincruive
Ayr, KA6 5HU
Scotland, UK

Neogen Ireland, Ltd.

Bray Business Park, Bray
Co. Wicklow
A98YV29, Ireland



Neogen Corporation

620 Leshar Place Lansing, MI 48912 USA
www.neogen.com

Neogen is a trademark of Neogen Corporation.

© Neogen Corporation 2024.

All rights reserved.

FS00834A

Produktinformation

Dry-Sponge

Hydrerad svamp

PRODUKTBESKRIVNING

Torr eller förhydrerad samt biocidfri 3,8 x 7,6 cm (1,5 x 3 tum) svamp i provtagningspåse. Förhydrerad med specificerad agens. Med eller utan handskar.

Endast för laboratoriebruk. Säkerhetsdatablad för material finns tillgängligt.

SÄKERHET

Användaren ska läsa, förstå och följa all säkerhetsinformation i instruktionerna. Behåll dessa säkerhetsföreskrifter för framtida referens.

⚠ VARNING Anger en farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador och/eller materiella skador.

OBSERVERA Anger en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka materiella skador.

⚠ VARNING

För att minska riskerna som förknippas med miljöförorening ska du:

- Följ nuvarande industristandarder och lokala föreskrifter gällande kassering av kontaminerat avfall.

För att minska riskerna som förknippas med exponering för biologiska risker ska du:

- Kassera prover enligt alla tillämpliga statliga regler och tillämpliga laboratorierutiner.

För att minska riskerna som förknippas med falska negativa resultat som leder till användning av kontaminerade slaktkroppar eller ytor för livsmedels- eller dryck produkter ska du:

- Alltid läsa förpackningsetiketten för förvaringsinstruktioner och utgångsdatum.
- Alltid läsa produktens bruksanvisning.

För att minska riskerna som förknippas med exponering för kemikalier och biologiska säkerhetsrisker:

- Följ alltid standardiserad, god laboratoriesed för säkerhet (GLP¹ eller ISO 17025²), inklusive rutiner för korrekt inneslutning, och bär lämplig skyddsklädsel vid hantering av testmaterial och testprover.

OBSERVERA

För att minska riskerna för falska positiva resultat på grund av korskontaminerade slaktkroppar eller ytor för livsmedels- eller dryck produkter, vilket kan leda till återtestning eller avvísning av livsmedels- eller dryck produkten, ska du:

- Inte röra med svampen vid icke avsedda ytor.
- Inte sträcka dig ner i svamppåsen.

För att minska risken för korskontaminering vid återanvändning av provhanteringsenheten ska du:

- Inte använda samma svamp mer än en gång.

ANVÄNDARENS ANSVAR

Det åligger användarna att göra sig införstådda med produktinstruktioner och produktinformation. Besök vår webbsida på adressen www.neogen.com eller kontakta din lokala Neogen-representant eller -leverantör för mer information.

Vid val av testmetod är det viktigt att inse att externa faktorer såsom provtagningsmetod, testprotokoll, provpreparering, hantering och laborieteknik kan påverka resultaten.

Det åligger användaren att vid val av testmetoder eller produkter utvärdera tillräckligt många prover med lämpliga matriser och utmaningar för att övertyga användaren att den valda metoden uppfyller användarens krav.

Det åligger också användaren att fastställa att alla testmetoder och deras resultat uppfyller kraven från dennes kunder och leverantörer.

I likhet med alla testmetoder utgör inte resultat som erhållits genom användning av någon produkt från Neogen Livsmedelshygien en garanti för kvaliteten hos de matriser eller processer som testats.

GARANTIBEGRÄNSNINGAR/BEGRÄNSAD ERSÄTTNING

MED UNDANTAG AV VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I AVSNITT OM GARANTIBEGRÄNSNING FÖR INDIVIDUELLA FÖRPACKNINGAR FRÅNSÄGER SIG NEOGEN ALLA UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ALLA GARANTIER BETRÄFFANDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Om någon produkt från Neogen Livsmedelshygien är defekt kommer Neogen eller dess auktoriserade leverantör att efter eget gottfinnande ersätta produkten eller återbetala produktens inköpspris. Detta är den enda ersättning som ges. Kontakta din Neogen-representant eller en godkänd Neogen-distributör om du har fler frågor.

NEOGEN:S ANSVARSBEGRÄNSNING

NEOGEN KOMMER INTE ATT ÅTA SIG NÅGOT ANSVAR FÖR FÖRLUST ELLER SKADOR, VARE SIG DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER EFTERFÖLJANDE SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, FÖRLORADE VINSTER. Under inga omständigheter ska Neogen:s ansvar i något som helst lagrum överskrida inköpspriset för den påstått defekta produkten.

FÖRVARING OCH KASSERING

Förvaring: Läs förpackningens etikett för information om förvaring.

Kassering: Följ nuvarande industristandarder och lokala föreskrifter gällande kassering av kontaminerat avfall. Läs säkerhetsdatabladet för materialet för ytterligare information.

Produktbeskrivning	Volym	REF	Påsens volym	Handskar
Neogen® Dry-Sponge	0 ml	BP133ES	0,9 l (30 oz.)	0
Neogen® Dry-Sponge med handske	0 ml	BP237SPG	0,9 l (30 oz.)	1
Neogen® Hydrerad svamp med buffrad peptonvattenbuljong	10 ml	HS10BPW	0,9 l (30 oz.)	0
Neogen® Hydrerad svamp med buffrad peptonvattenbuljong, 2 handskar	10 ml	HS10BPW2G	0,9 l (30 oz.)	2
Neogen® Hydrerad svamp med D/E neutraliserande buffert, 2 handskar	10 ml	HS10DE2G	0,9 l (30 oz.)	2
Neogen® Hydrerad svamp med Lethen-buljong	10 ml	HS10LET	0,9 l (30 oz.)	0
Neogen® Hydrerad svamp med Lethen-buljong, 2 handskar	10 ml	HS10LET2G	0,9 l (30 oz.)	2
Neogen® Hydrerad svamp med neutraliserande buffert	10 ml	HS10NB	0,9 l (30 oz.)	0
Neogen® Hydrerad svamp med neutraliserande buffert, 2 handskar	10 ml	HS10NB2G	0,9 l (30 oz.)	2

BRUKSANVISNING

- Skaka svampen till påsens ände.
- Riv upp påsen.
OBS: Tillsätt sterilt utspädningsmedel eller buljong till den torra svampen.
- Tryck på svampen så att den sticker ut från påsen.
- Böj de blåa trådarna för att forma den öppna påsen.
- Ta på dig sterila handskar.
- Avlägsna svampen aseptiskt.
- Svabba aseptiskt över hela provtagningsytan ^{3, 4, 5, 6}.
- Vänd på svampen. Ändra riktning 90°. Svabba aseptiskt samma provtagningsyta.
- Placera svampen aseptiskt i påsen.
- Vik påsen för att stänga den.
- Vik ändarna på de blåa trådarna inåt.
- Följ rutiner bestämda av användaren och avlägsna eventuella rester av kvarvarande anrikningsbuljong eller neutraliseringslösning från den provtagna ytan.












REFERENSER

- USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet. Code of Federal Regulations, titel 21, avsnitt 58. Good Laboratory Practice for Nonclinical Laboratory Studies.
- ISO/IEC 17025. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.
- American Public Health Association - Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - Kapitel 3: Microbiological Monitoring of the Food Processing Environment, 4:e upplagan.
- USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet - Bacteriological Analytical Method (tillgänglig online på <https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/bacteriological-analytical-manual-bam>).
- USA:s jordbruksdepartement - Microbiological Lab Guidebook - Kapitel 4.04, 5.04, och 8.07.
- American Public Health Association - Standard Methods for the Examination of Dairy Products - Kapitel 13: Microbiological Tests for Equipment, Containers, Water, and Air, 17:e upplagan.

Se de aktuella versionerna av standardmetoderna som anges ovan.

SYMBOLFÖRKLARING

info.neogen.com/symbols

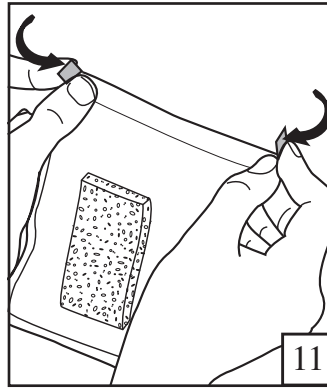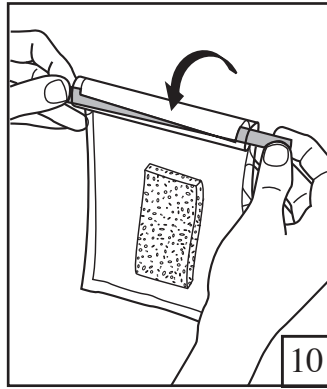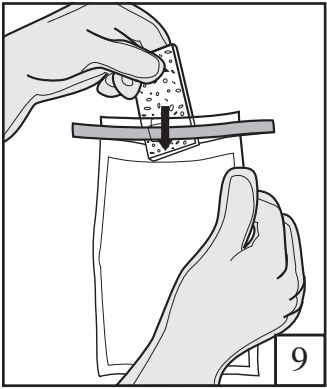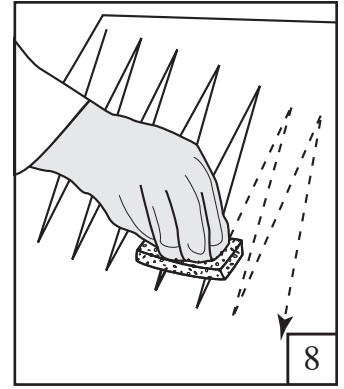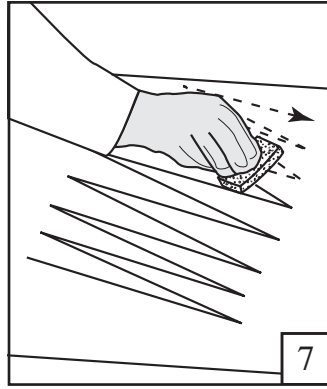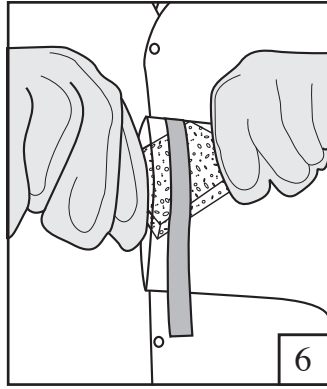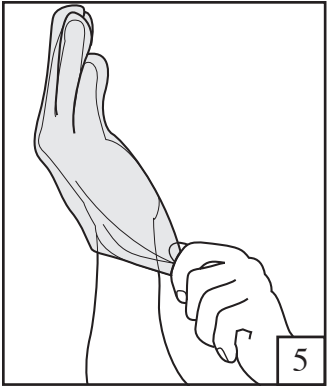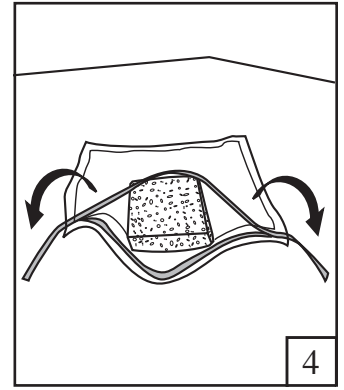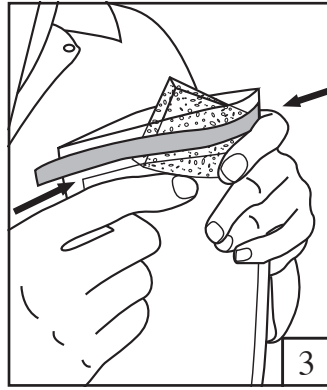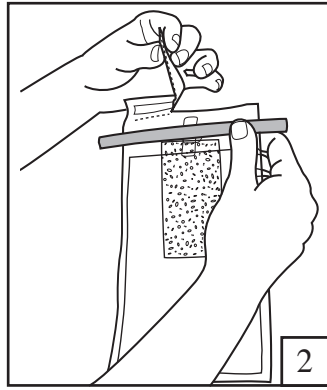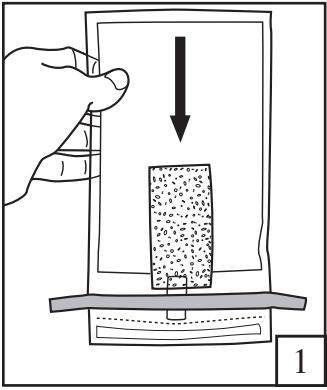

Neogen Food Safety

Neogen Corporation

620 Leshar Place
Lansing, MI 48912 USA
neogen.com

Neogen Europe Ltd.

The Dairy School
Auchincruive
Ayr, KA6 5HU
Scotland, UK

Neogen Ireland, Ltd.

Bray Business Park, Bray
Co. Wicklow
A98YV29, Ireland



Neogen Corporation

620 Leshar Place Lansing, MI 48912 USA
www.neogen.com

Neogen is a trademark of Neogen Corporation.

© Neogen Corporation 2024.

All rights reserved.

FS00834A

Produktinstruktioner

Dry-sponge

Forvædet svamp

PRODUKTBESKRIVELSE

Tør eller forvædet og biocidfri 3,8 x 7,6 cm svamp i en prøvepose. Forvædet med et specificeret stof. Med eller uden handsker.
Kun til laboratoriebrug. Sikkerhedsdatablad er tilgængeligt.

SIKKERHED

Brugeren skal læse, forstå og følge alle sikkerhedsoplysninger i instruktionerne. Opbevar disse sikkerhedsinstruktioner til senere brug.

⚠ ADVARSEL Angiver en farlig situation, som udgør risiko for død eller alvorlig personskade samt skade på ejendom, hvis den ikke kan undgås.

BEMÆRK Angiver en potentiel farlig situation, som udgør risiko for beskadigelse af ejendom, hvis den ikke kan undgås.

⚠ ADVARSEL

For at reducere risici forbundet med miljøforurening:

- Følg aktuelle branchestandarder og lokale regulativer for bortskaffelse af kontamineret affald.

For at reducere risici forbundet med eksponering for biologiske farer:

- Bortskaf prøverne i overensstemmelse med alle gældende statsregulativer og gældende laboratorieprocedurer.

For at reducere risikoen forbundet med falske negative resultater, der medfører kontamineret kadaver- eller miljøoverflader til føde- og drikkevarerprodukter:

- Der henvises altid til æskens etiket for opbevaringsinstruktioner og udløbsdato.
- Der henvises altid til produktinstruktionerne for anvendelse.

For at reducere risici i forbindelse med eksponering til kemikalier og miljörisici:

- Følg altid standarden for god sikkerhedspraksis i laboratoriet (GLP¹ eller ISO 17025²), inklusive korrekte opbevaringsprocedurer, brug af passende beskyttelsesudstyr under håndtering af analysematerialer og prøver.

BEMÆRK

For at reducere risikoen forbundet med falske positive resultater, der skyldes krydskontamineret kadaver- eller miljøoverflader til føde- og drikkevarerprodukter, der kan medføre gentestning eller afvisning af føde- og drikkevarerproduktet:

- Lad ikke svampen komme i berøring med en utilsigtet overflade.
- Stik ikke hånden ned i svampens pose.

For at reducere risikoen for krydskontaminering fra genanvendelse af prøvehåndteringsenheden:

- Den samme svamp må ikke bruges mere end én gang.

BRUGERANSVAR

Brugerne er ansvarlige for at gøre sig bekendt med produktinstruktioner og -oplysninger. Besøg vores hjemmeside på www.neogen.com, eller kontakt din lokale Neogen konsulent eller distributør for yderligere oplysninger.

Når der vælges en analysemetode, er det vigtigt, at man er klar over, at eksterne faktorer, såsom prøveudtagningsmetoder, testprotokoller, klargøring af prøven, håndtering samt laboratorieteknikker, kan påvirke resultaterne.

Det er brugerens eget ansvar at vælge en analysemetode, som evaluerer et tilstrækkeligt antal prøver med de passende matricer og udfordringer for derved at sikre brugeren, at den valgte analysemetode lever op til brugerens krav.

Det er også brugerens ansvar at fastsætte, at analysemetoderne og resultaterne lever op til kundernes og leverandørernes krav.

Som med alle andre analysemetoder gælder det, at de resultater, der opnås med dette Neogen fødevarerproduktudstyr, ikke giver garanti for kvaliteten af de testede matricer og processer.

BEGRÆNSNING AF GARANTIER / BEGRÆNSET RETSMIDDEL

BORTSET FRA HVAD DER ER UDTRYKKELIGT ANFØRT I DEN BEGRÆNSEDE GARANTI PÅ DEN INDIVIDUELLE PRODUKTEMBALLAGE, FRASIGER NEOGEN SIG ALLE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE GARANTIER INDBEFATTET, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ENHVER GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL EN BESTEMT ANVENDELSE. Hvis et Neogen fødevarerprodukt er behæftet med fejl eller mangler, vil Neogen eller en af dennes autoriserede distributører efter eget skøn udskifte eller refundere produktets købspris. Dette er det eneste til rådighed værende retsmiddel. Kontakt venligst din Neogen-repræsentant eller autoriserede Neogen-distributør for yderligere spørgsmål.



BEGRÆNSNING AF NEOGEN'S ANSVAR

NEOGEN KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR EVT. TAB ELLER SKADER, HVAD END DE ER OPSTÅET DIREKTE, INDIREKTE, UNDER SÆRLIGE OMSTÆNDIGHEDER ELLER TILFÆLDIGE SKADER INDBEFATTET, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, MISTET FORTJENESTE. Under ingen omstændigheder skal Neogen's erstatningsansvar kunne overstige købsprisen af produktet, der efter sigende er behæftet med fejl.

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE

Opbevaring: Der henvises til æskens etiket for opbevaringsoplysninger.

Bortskaffelse: Følg aktuelle branchestandarder og lokale regulativer for bortskaffelse af kontamineret affald. Se sikkerhedsdatabladet for yderligere oplysninger.

Produktbeskrivelse	Volumen	REF.	Posens volumen	Handsker
Neogen® Dry-Sponge	0 ml	BP133ES	0,9 l (30 oz.)	0
Neogen® Dry-Sponge med handske	0 ml	BP237SPG	0,9 l (30 oz.)	1
Neogen® Forvædet svamp med bufferet pepton vand bouillon	10 ml	HS10BPW	0,9 l (30 oz.)	0
Neogen® Forvædet svamp med bufferet pepton vand bouillon, 2 handske	10 ml	HS10BPW2G	0,9 l (30 oz.)	2
Neogen® Forvædet svamp med D/E neutraliserings buffer, 2 handske	10 ml	HS10DE2G	0,9 l (30 oz.)	2
Neogen® Forvædet svamp Letheen bouillon	10 ml	HS10LET	0,9 l (30 oz.)	0
Neogen® Forvædet svamp Letheen bouillon, 2 handske	10 ml	HS10LET2G	0,9 l (30 oz.)	2
Neogen® Forvædet svamp med neutraliserings buffer	10 ml	HS10NB	0,9 l (30 oz.)	0
Neogen® Forvædet svamp med neutraliserings buffer, 2 handske	10 ml	HS10NB2G	0,9 l (30 oz.)	2

BRUGSANVISNING

1. Ryst svampen ned i enden af posen.
2. Riv posen åben.
BEMÆRK: Put steril fortynder eller bouillon på den tørre svamp.
3. Skub svampen, så den stikker ud af posen.
4. Bøj de blå ledninger, så de danner en åben pose.
5. Tag sterile handske på.
6. Tag svampen ud vha. en aseptisk metode.
7. Gnid en vatpind over hele prøveoverfladen vha. en aseptisk metode^{3,4,5,6}.
8. Vend svampen om. Skift retning med 90°. Gnid den samme prøveoverflade med en vatpind vha. en aseptisk metode.
9. Anbring svampen i posen vha. en aseptisk metode.
10. Fold posen for at lukke den.
11. Fold de blå ledningers ender indad.
12. Følg brugeretablerede procedurer, fjern al resterende opformeringsbouillon eller rester af neutraliseringsopløsning fra prøveoverfladerne.












LITTERATURHENVISNINGER

1. U.S. Food and Drug Administration. Code of Federal Regulations, Title 21, Part 58. Good Laboratory Practice for Nonclinical Laboratory Studies.
2. ISO/IEC 17025. Generelle krav til kompetencer af test- og kalibreringslaboratorier.
3. American Public Health Association - Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - Chapter 3: Microbiological Monitoring of the Food Processing Environment, 4th edition.
4. US Food and Drug Administration - Bacteriological Analytical Method (tilgængelig online på <https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/bacteriological-analytical-manual-bam>).
5. United States Department of Agriculture - Microbiological Lab Guidebook - Chapters 4.04, 5.04, and 8.07.
6. American Public Health Association - Standard Methods for the Examination of Dairy Products - Chapter 13: Microbiological Tests for Equipment, Containers, Water, and Air, 17th edition.

Vi henviser til de opdaterede versioner af de standardmetoder, som er angivet ovenfor.

SYMBOLFORKLARINGER

info.neogen.com/symbols

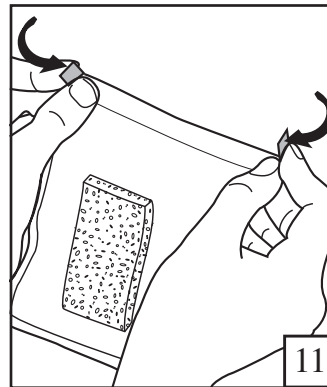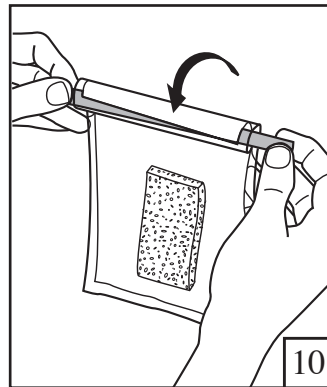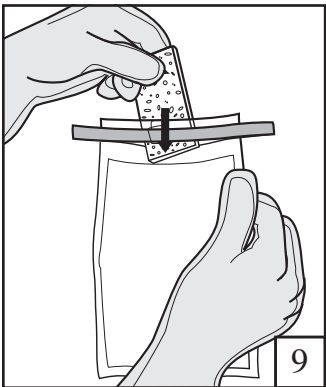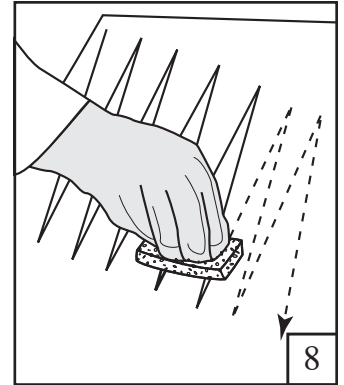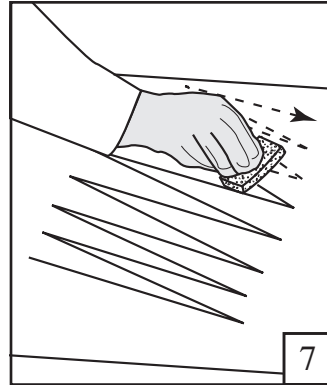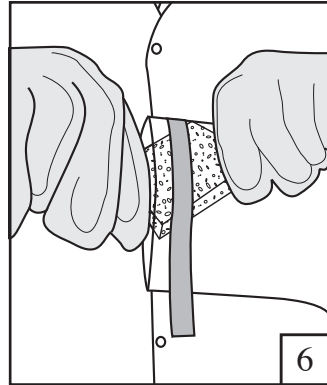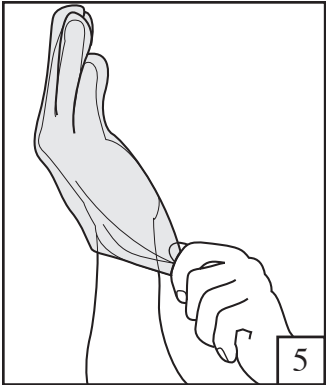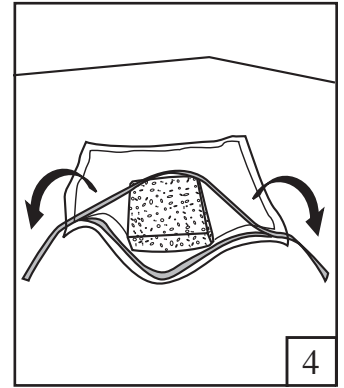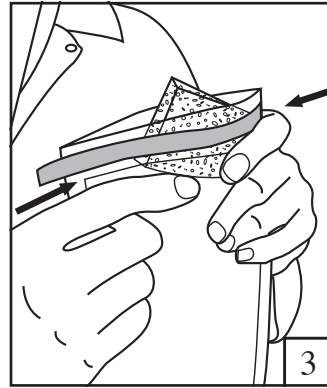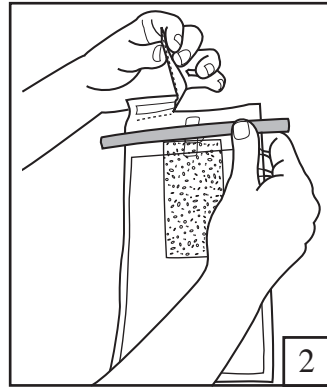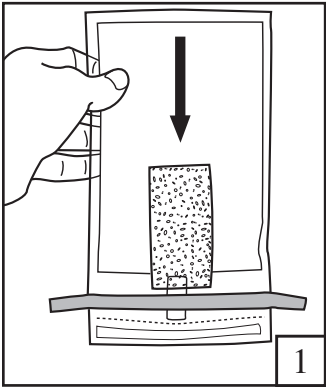

Neogen Food Safety

Neogen Corporation

620 Leshar Place
Lansing, MI 48912 USA
neogen.com

Neogen Europe Ltd.

The Dairy School
Auchincruive
Ayr, KA6 5HU
Scotland, UK

Neogen Ireland, Ltd.

Bray Business Park, Bray
Co. Wicklow
A98YV29, Ireland



Neogen Corporation

620 Leshar Place Lansing, MI 48912 USA
www.neogen.com

Neogen is a trademark of Neogen Corporation.

© Neogen Corporation 2024.

All rights reserved.

FS00834A

Produktveiledning

Tørr svamp

Fuktet svamp

PRODUKTBESKRIVELSE

Tørr eller forfuktet og biocid-fri 3,8 x 7,6 cm (1,5 x 3 tommer) svamp i prøvepose. Forfuktet med spesifisert middel. Med eller uten hansker. Kun til laboratoriebruk. HMS-datablad tilgjengelig.

SIKKERHET

Brukeren må lese, forstå og følge all sikkerhetsinformasjon i denne anvisningen. Oppbevar sikkerhetsinstruksjonene for fremtidig referanse.

⚠ ADVARSEL Indikerer en farlig situasjon, som, dersom den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlig skade og/eller skade på materiell.

MERKNAD Indikerer en potensielt farlig situasjon, som, dersom den ikke unngås, kan føre til skade på materiell.

⚠ ADVARSEL

For å redusere risiko forbundet med miljøforurensning:

- Følg gjeldende industristandarder og lokale forskrifter for avhending av spesialavfall.

For å redusere risikoene forbundet med eksponering for biologiske farer:

- Avhend prøver i henhold til alle gjeldende offentlige forskrifter og gjeldende laboratorieprosedyrer.

For å redusere risikoen forbundet med falsk-negative resultater ved bruk av kontaminerte skrotter eller miljøoverflater for mat- eller drikkevarerprodukter:

- Se alltid på pakningsmerkingen for informasjon om lagring og utløpsdato.
- Se alltid i produktinstruksjonene for bruk.

For å redusere risiko forbundet med eksponering for kjemikalier og biologiske farer:

- Følg alltid standard god laboratoriepraksis (GLP¹ eller ISO 17025²), samt korrekte oppsamlingsprosedyrer, bruk av egnet verneutstyr ved håndtering av testmaterialer og prøver.

MERKNAD

For å redusere risikoen for falsk-positive resultater på grunn av krysskontaminerte skrotter eller miljøoverflater for mat- eller drikkeprodukter som kan resultere i ny testing eller at mat- eller drikkeproduktet forkastes:

- Ikke la svampen berøre utilsiktede overflater.
- Ikke stikk hånden inn i posen med svampen.

For å redusere risikoen for krysskontaminering ved gjenbruk av håndteringsenhet for prøver.

- Bruk aldri samme svamp mer enn én gang.

BRUKERANSVAR

Brukere er ansvarlige for å sette seg inn i instruksjoner og informasjon om produktet. Besøk nettsiden vår www.neogen.com eller kontakt din lokale Neogen-representant eller distributør for mer informasjon.

Ved valg av testmetode er det viktig å ta hensyn til at eksterne faktorer som metoder for stikkprøver, testprotokoller, preparering av prøver, håndtering og laboratorieteknikk kan påvirke resultatene.

Ved valg av testmetode er det brukerens ansvar å vurdere et tilstrekkelig antall prøver med passende matriser og mikrobielle utfordringer for å tilfredsstille brukeren om at den valgte prøvemethoden oppfyller brukerens kriterier.

Det er også brukerens ansvar å fastslå at alle prøvemethoder og resultater tilfredsstiller kundens og leverandørens krav.

Som med alle testmetoder, utgjør ikke resultatene som oppnås ved bruk av noe Neogen Food Safety-produkt noen garanti om kvaliteten av matrisene eller prosessene som testes.

BEGRENSNING AV GARANTIER / BEGRENSEDE RETTSMIDLER

MED MINDRE DET ER UTTRYKkelig SKREVET I EN BEGRENSET GARANTI PÅ EN PRODUKTPAKNING, FRASKRIVER NEOGEN SEG ALLE DIREKTE OG INDIREKTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, ENHVER GARANTI OM SALGBARHET ELLER ANVENDELSE TIL ET BESTEMT FORMÅL. Hvis noe Neogen Food Safety-produkt er defekt vil Neogen eller dets autoriserte distributør erstatte, reparere eller refundere produktets kjøpesum etter eget skjønn. Dette er dine ubetingede rettsmidler. Kontakt Neogen-representanten din eller den autoriserte Neogen-distributøren hvis du har flere spørsmål.



BEGRENSNING AV NEOGENS ANSVAR

NEOGEN VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOE TAP ELLER SKADE, DIREKTE ELLER INDIREKTE, SPESIELL, TILFELDIG ELLER FØLGESKADE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAPT FORTJENESTE. Ikke under noen omstendighet skal Neogens ansvar, under noen juridisk teori, overstige kjøpesummen for et produkt som antas å være defekt.

OPPBEVARING OG AVHENDIG

Oppbevaring: Se pakningsmerkingen for informasjon om lagring.

Avhending: Følg gjeldende industristandarder og lokale forskrifter for avhending av spesialavfall. Se HMS-databladet for ytterligere informasjon.

Produktbeskrivelse	Volum	REF	Posevolum	Hansker
Neogen® tørr svamp	0 ml	BP133ES	0,9 l (30 oz.)	0
Neogen® tørr svamp med hanske	0 ml	BP237SPG	0,9 l (30 oz.)	1
Neogen® Fuktet svamp med buffret peptonvann	10 ml	HS10BPW	0,9 l (30 oz.)	0
Neogen® Fuktet svamp med buffret peptonvann, 2 hansker	10 ml	HS10BPW2G	0,9 l (30 oz.)	2
Neogen® Fuktet svamp med D/E nøytraliserende buffer, 2 hansker	10 ml	HS10DE2G	0,9 l (30 oz.)	2
Neogen® Fuktet svamp med letheenbuljong	10 ml	HS10LET	0,9 l (30 oz.)	0
Neogen® Fuktet svamp med letheenbuljong, 2 hansker	10 ml	HS10LET2G	0,9 l (30 oz.)	2
Neogen® Fuktet svamp med nøytraliserende buffer	10 ml	HS10NB	0,9 l (30 oz.)	0
Neogen® Fuktet svamp med nøytraliserende buffer, 2 hansker	10 ml	HS10NB2G	0,9 l (30 oz.)	2

BRUKSANVISNING

- Rist svampen til enden av posen.
- Riv opp posen.
MERK: Tilfør sterilt fortynningsmiddel eller buljong til tørr svamp.
- Trykk svampen ut av posen.
- Bøy de blå trådene for åpne posen.
- Ta på sterile hansker.
- Ta ut svampen aseptisk.
- Før svampen aseptisk over hele prøveflaten^{3,4,5,6}.
- Vend svampen rundt. Endre retning 90°. Før svampen aseptisk over den samme prøveflaten.
- Legg svampen aseptisk ned i posen.
- Fold sammen posen for å lukke den.
- Fold endene på de blå trådene innover.
- Følg brukereablerte prosedyrer ved fjerning av eventuell gjenværende oppformert buljong eller rester av nøytraliserende oppløsning fra prøveoverflaten.












REFERANSER

- U.S. Food and Drug Administration. "Føderale forskrifter (USA), tittel 21, avsnitt 58. God laboratoriepraksis for ikke-kliniske studier."
- ISO/IEC 17025. Generelle krav til kompetanse for testings- og kalibreringslaboratorier.
- American Public Health Association – Kompendium for metoder for mikrobiologiske undersøkelser av mat – Kapittel 3: Mikrobiologisk overvåking av miljøer i matproduksjon, 4. utgave.
- US Food and Drug Administration – Bakteriologiske analysemetoder (tilgjengelig på <https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/bacteriological-analytical-manual-bam>).
- United States Department of Agriculture – Håndbok for mikrobiologisk lab – Kapitlene 4.04, 5.04 og 8.07.
- American Public Health Association – Standardmetoder for undersøkelse av meieriprodukter – Kapittel 13: Mikrobiologiske tester for utstyr, beholdere, vann og luft, 17. utgave.

Se gjeldende versjon av standardmetodene oppført ovenfor.

SYMBOLFORKLARING

info.neogen.com/symbols

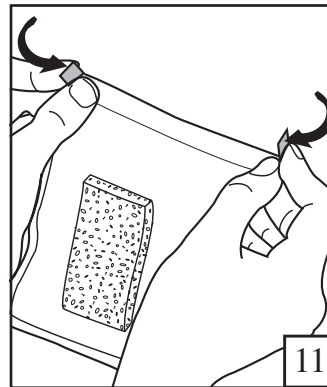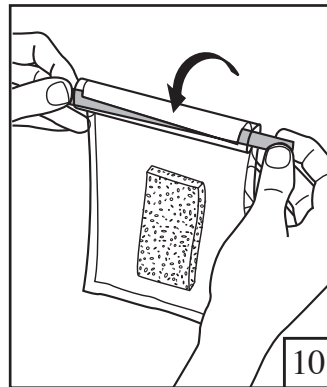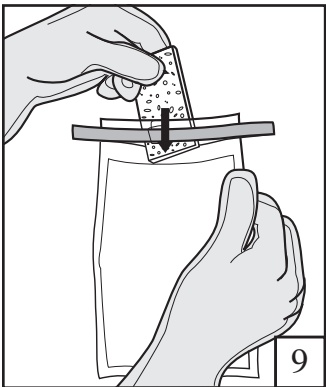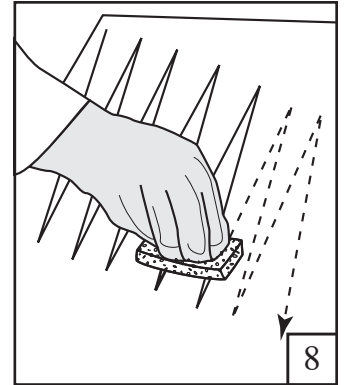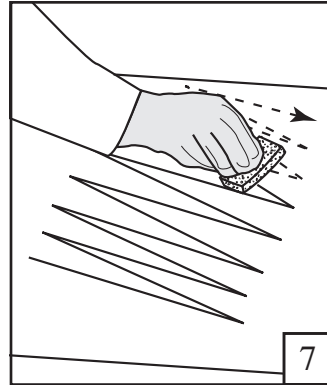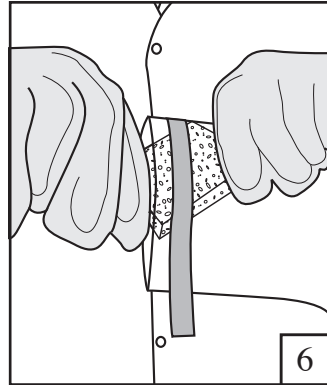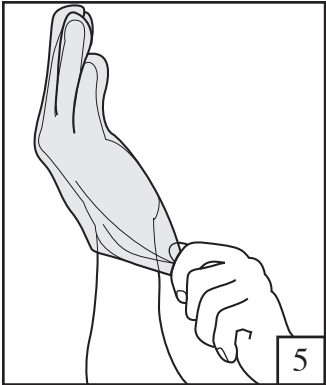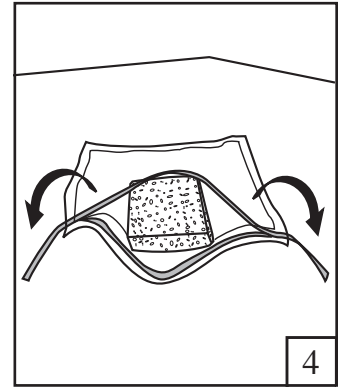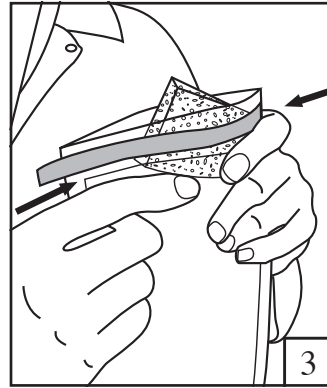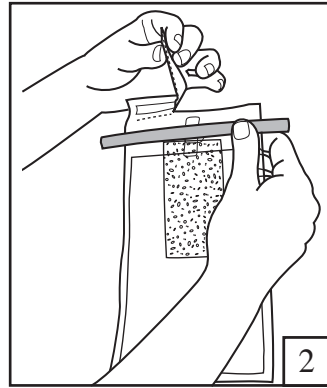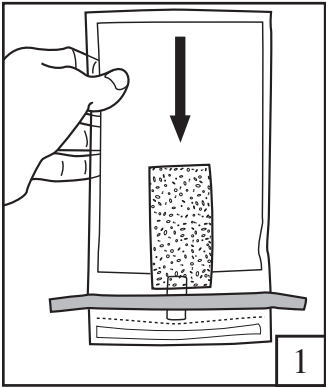

Neogen Food Safety

Neogen Corporation

620 Leshar Place
Lansing, MI 48912 USA
neogen.com

Neogen Europe Ltd.

The Dairy School
Auchincruive
Ayr, KA6 5HU
Scotland, UK

Neogen Ireland, Ltd.

Bray Business Park, Bray
Co. Wicklow
A98YV29, Ireland



Neogen Corporation

620 Leshar Place Lansing, MI 48912 USA
www.neogen.com

Neogen is a trademark of Neogen Corporation.

© Neogen Corporation 2024.

All rights reserved.

FS00834A

Tuoteohjeet

Dry-Sponge Sienitikku Hydraattisieni

TUOTTEEN KUVAUS

Kuiva tai esikostutettu ja biosiditon 3,8 x 7,6 cm (1,5 x 3 tuumaa) sieni näytepussissa. Esikostutettu, sisältää ilmoitettua ainetta. Suojakäsineillä tai ilman.

Ainoastaan laboratoriokäyttöön. Käyttöturvallisuustiedote saatavissa.

TURVALLISUUS

Käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää kaikki annetut turvaohjeet sekä noudattaa niitä. Säilytä turvallisuusohjeet myöhempää käyttöä varten.

VAROITUS Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen ja/tai omaisuusvahinkoon, jos tilannetta ei vältetä.

HUOMIO Osoittaa mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka saattaa johtaa omaisuusvahinkoon, jos tilannetta ei vältetä.

VAROITUS

Jotta voit vähentää ympäristön saastumiseen liittyviä riskejä:

- Hävitä kontaminoituneet jätteet alan nykystandardien ja paikallisten määräysten mukaan.

Vähennä biologisiin vaaratekijöihin liittyviä riskejä noudattamalla seuraavia ohjeita:

- Hävitä näytteet kaikkien sovellettavien viranomaismääräysten ja laboratoriomenettelyiden mukaan.

Elintarvikkeiden tai juomien kontaminoituneessa ruuossa tai ympäristön pinnoilla käytöstä johtuvien väriin negatiivisten vaaran vähentäminen:

- Katso varastointiohjeet ja viimeinen käyttöpäivä aina pakkausmerkinnöistä.
- Tutustu aina tuotteen käyttöohjeisiin.

Vähennä kemikaaleille altistumiseen ja biologisiin vaaratekijöihin liittyviä riskejä noudattamalla seuraavia ohjeita:

- Noudata normaaleja hyviä laboratorion turvallisuuskäytäntöjä (GLP¹ tai ISO 17025²) mukaan lukien asianmukaiset suojausmenettelyt ja suojavaatteiden käyttö koemateriaalien ja testinäytteiden käsittelyn yhteydessä.

HUOMIO

Ristiinkontaminoituneesta ruuosta tai ympäristön pinnoista johtuvien uusintatestaukseen tai elintarvikkeen tai juoman hylkäämiseen johtavien väriin positiivisten vaaran vähentäminen:

- Estä sienien pääsy kosketuksiin tahattomien pintojen kanssa.
- Älä tartu sienien pussiin.

Näytteiden käsittelylaitteen uudelleenkäytöstä johtuvan ristikontaminaation vaaran vähentäminen:

- Käytä kutakin sientä vain kerran.

KÄYTTÄJÄN VASTUU

Käyttäjän vastuulla on tutustua tuotteen käyttöohjeisiin ja tietoihin. Saat lisätietoja verkkosivuiltamme osoitteessa www.neogen.com tai ottamalla yhteyttä paikalliseen Neogen-edustajaan tai -jälleenmyyjään.

Testausmenetelmää valitessa on tärkeää ottaa huomioon, että ulkoiset tekijät, kuten näytteenottomenetelmät, testauskäytännöt, näytteiden valmistus, käsittely ja laboratoriotekniikat voivat vaikuttaa testituloksiin.

Käyttäjä on aina testausmenetelmää valitessaan vastuussa siitä, että hän arvioi riittävän määrän näytteitä kyseisistä elintarvikkeista ja mikrobialtistuksista varmistamaan käyttäjän kriteerien täytymisen.

Käyttäjän vastuulla on myös varmistaa, että testausmenetelmä ja tulokset täyttävät hänen asiakkaidensa tai toimittajiensa vaatimukset.

Kuten kaikkien testausmenetelmien kohdalla, minkä tahansa Neogen Food Safety -tuotteen käytöstä saadut tulokset eivät ole takuu matriisien tai testattujen prosessien laadusta.

TAKUUN RAJOITUS / RAJOITETTU KORVAUSVELVOLLISUUS

NEOGEN KIISTÄÄ KAIKKI NIMENOMAISET JA EPÄSUORAT TAKUUT MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, KAIKKI TAKUUT KÄYPPYDESTÄ TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, PAITSI JOS TUOTEPAKKAUKSEN TAKUUOSIOSSA TOISIN MAINITAAN. Jos mikä tahansa Neogen Food Safety -tuote on viallinen, Neogen tai sen valtuutettu jälleenmyyjä joko korvaa tuotteen, korjaa tuotteen tai palauttaa sen ostohinnan. Nämä ovat ainoat myönnettävät korvaukset. Ota yhteyttä Neogen-edustajaasi tai valtuutettuun Neogen-jälleenmyyjään, jos sinulla on kysyttävää.

NEOGEN:N VASTUUN RAJOITUKSET

NEOGEN EI OLE VASTUUSSA MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, OLIVAT NE SITTEN SUORIA, EPÄSUORIA, ERITYISLAATUIKSA, SATUNNAISIA TAI VÄLILLISIÄ, MUKAAN LUKIEN (MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN) VOITONMENETYKSET. Missään tapauksessa Neogen:n vastuu ei minkään laillisen perusteen mukaan ole suurempi kuin vialliseksi väitetyn tuotteen hinta.

SÄILYTYS JA HÄVITTÄMINEN

Varastointi: Katso säilytystä koskevat tiedot pakkausetiketistä.

Hävittäminen: Hävitä kontaminoituneet jätteet alan nykystandardien ja paikallisten määräysten mukaan. Lisätietoja saat käyttöturvallisuustiedotteesta.

Tuotteen kuvaus	Tilavuus	VIITE	Pussin tilavuus	Käsineet
Neogen® Dry-Sponge Sienitikku	0 ml	BP133ES	0,9 l (30 unssia)	0
Neogen® Dry-Sponge Sienitikku suojakäsineellä	0 ml	BP237SPG	0,9 l (30 unssia)	1
Neogen® Hydraattisieni puskuroidulla peptonivesiseoksella	10 ml	HS10BPW	0,9 l (30 unssia)	0
Neogen® Hydraattisieni puskuroidulla peptonivesiseoksella, 2 käsinettä	10 ml	HS10BPW2G	0,9 l (30 unssia)	2
Neogen® Hydraattisieni neutralisoivalla puskurilla D/E, 2 käsinettä	10 ml	HS10DE2G	0,9 l (30 unssia)	2
Neogen® Hydraattisieni Letheet-seoksella	10 ml	HS10LET	0,9 l (30 unssia)	0
Neogen® Hydraattisieni Letheet-seoksella, 2 käsinettä	10 ml	HS10LET2G	0,9 l (30 unssia)	2
Neogen® Hydraattisieni neutralisoivalla puskurilla	10 ml	HS10NB	0,9 l (30 unssia)	0
Neogen® Hydraattisieni neutralisoivalla puskurilla, 2 käsinettä	10 ml	HS10NB2G	0,9 l (30 unssia)	2

KÄYTTÖOHJEET

- Ravista sieni pussin pohjalle.
- Revi pussi auki.
HUOMAUTUS: Lisää sienitikkuun steriiliä laimennusainetta tai seosta.
- Työnnä sientä siten, että osa siitä tulee ulos pussista.
- Avaa pussi taivuttamalla sinisiä johtoja.
- Laita käteen steriilit käsineet.
- Ota sieni ulos aseptisesti.
- Pyyhi aseptisesti koko näytteenottoalueelta ^{3, 4, 5, 6}.
- Käännä sieni. Vaihda suuntaa 90°. Pyyhi aseptisesti sama näytepinta.
- Laita sieni aseptisesti pussiin.
- Sulje taittamalla pussi.
- Taita sinisten johtojen päät sisäänpäin.
- Poista jäljellä oleva rikastusliuos tai neutralisointiliuos näytepinnasta käyttämällä vakiintuneita menettelytapoja.












LÄHDEVIITTEET

- U.S. Food and Drug Administration. Code of Federal Regulations, Title 21, Part 58. Good Laboratory Practice for Nonclinical Laboratory Studies.
- ISO/IEC 17025. Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyyden yleiset vaatimukset.
- American Public Health Association - Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - Chapter 3: Microbiological Monitoring of the Food Processing Environment, 4th edition.
- US Food and Drug Administration - Bacteriological Analytical Method (käytettävissä osoitteessa <https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/bacteriological-analytical-manual-bam>).
- United States Department of Agriculture - Microbiological Lab Guidebook - Chapters 4.04, 5.04, and 8.07.
- American Public Health Association - Standard Methods for the Examination of Dairy Products - Chapter 13: Microbiological Tests for Equipment, Containers, Water, and Air, 17th edition.

Katso edellä mainittujen standardien mukaisten menetelmien ajantasaiset versiot.

MERKKIEN SELITYKSET

info.neogen.com/symbols

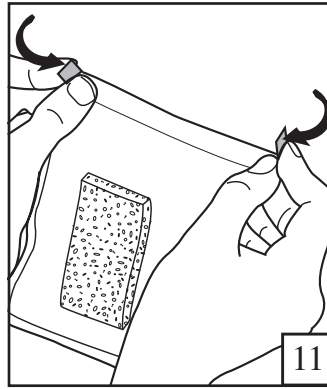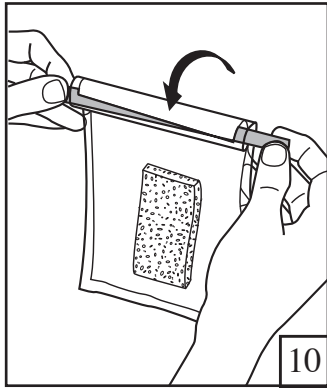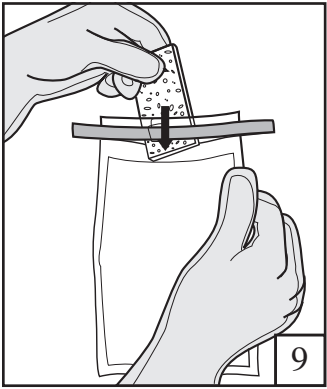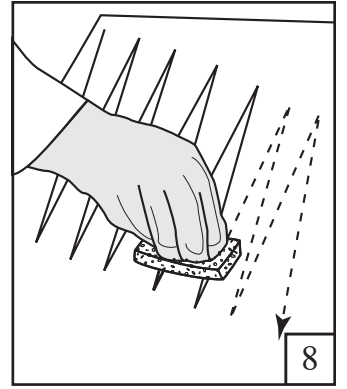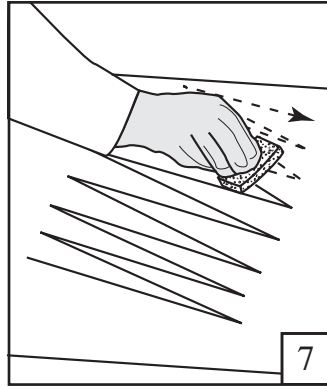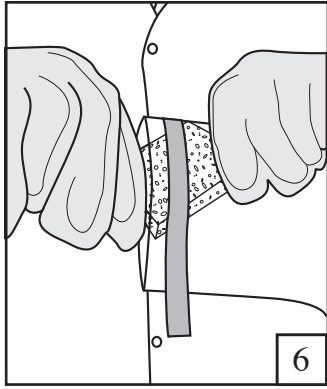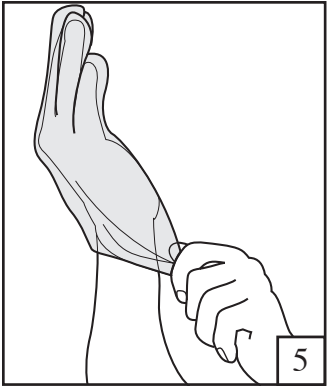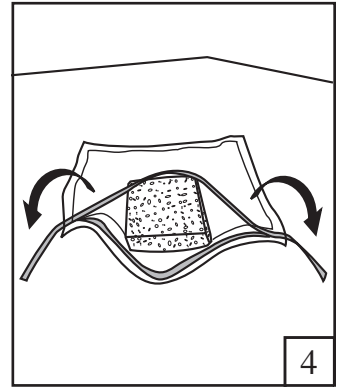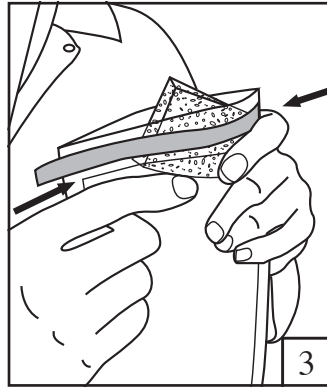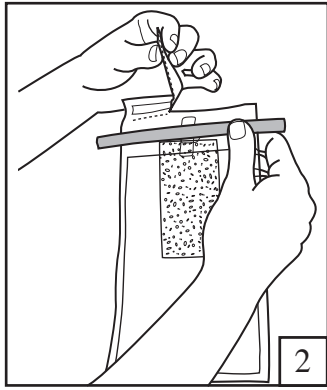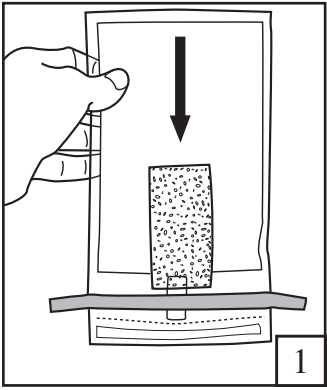

Neogen Food Safety

Neogen Corporation

620 Leshar Place
Lansing, MI 48912 USA
neogen.com

Neogen Europe Ltd.

The Dairy School
Auchincruive
Ayr, KA6 5HU
Scotland, UK

Neogen Ireland, Ltd.

Bray Business Park, Bray
Co. Wicklow
A98YV29, Ireland



Neogen Corporation

620 Leshar Place Lansing, MI 48912 USA
www.neogen.com

Neogen is a trademark of Neogen Corporation.

© Neogen Corporation 2024.

All rights reserved.

FS00834A

Instruções do produto

Dry-Sponge

Espunja Hidratada

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Seca ou pré-hidratada e livre de biocidas 3,8 x 7,6 cm (1,5 x 3 in.) Espunja em bolsas de amostra. Pré-hidratada com agente especificado. Com ou sem luvas.

Apenas para uso no laboratório. Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico disponível.

SEGURANÇA

O usuário deve ler, compreender e seguir todas as informações de segurança contidas nas instruções. Conservar as instruções de segurança para consulta posterior.

 **AVISO** Indica uma situação de risco, que, caso não evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves e/ou danos materiais.

INFORMAÇÃO Indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em danos materiais.

AVISO

Para reduzir os riscos associados à contaminação ambiental:

- Siga os padrões atuais do setor e os regulamentos locais para o descarte de resíduos contaminados.

Para reduzir os riscos associados à exposição a agentes nocivos biológicos:

- Descarte as amostras de acordo com os regulamentos governamentais e os procedimentos laboratoriais aplicáveis.

Para reduzir os riscos associados a um resultado falso negativo, que pode resultar no uso de carcaça contaminada ou superfícies ambientais para alimentos ou bebidas:

- Sempre consulte o rótulo da embalagem para obter informações sobre instruções de armazenamento e data de validade.
- Sempre consulte as instruções de uso do produto.

Para reduzir os riscos de exposição a produtos químicos e agentes nocivos biológicos:

- Sempre siga o padrão de melhores práticas laboratoriais (GLP¹ ou ISO 17025²), inclusive procedimentos de contenção adequados, usando equipamentos de proteção apropriados e proteção para os olhos ao manipular materiais e amostras de testes.

INFORMAÇÃO

Para reduzir o risco de um resultado falso positivo devido a carcaças ou superfícies ambientais contaminadas para alimentos ou bebidas, que pode resultar na retestagem ou rejeição de alimentos ou bebidas:

- Não toque a esponja em qualquer superfície indesejada.
- Não coloque a mão dentro da bolsa da esponja.

Para reduzir os riscos de contaminação cruzada devido ao reuso do dispositivo de manipulação de amostra:

- Não utilize a mesma esponja mais de uma vez.

RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO

Os usuários são responsáveis por se familiarizar com as instruções e informações do produto. Visite nosso site Web em www.neogen.com, ou entre em contato com seu representante ou distribuidor Neogen local para obter mais informações.

Ao selecionar qualquer método de teste, é importante considerar que fatores externos, como métodos de amostragem, protocolos de teste, preparo de amostras, manipulação e a técnica de laboratório utilizada, podem influenciar nos resultados.

É responsabilidade do usuário, ao selecionar qualquer método de teste ou produto, avaliar um número suficiente de amostras com as matrizes e testes microbiológicos que permitam assegurar que os métodos escolhidos satisfaçam os critérios por ele estabelecidos.

Também é responsabilidade do usuário determinar que o método de teste e os resultados satisfaçam as exigências de seus clientes ou fornecedores. Como em qualquer outro método, os resultados obtidos com qualquer produto da Neogen Food Safety não constituem uma garantia da qualidade das matrizes ou processos com eles testados.

LIMITAÇÕES DA GARANTIA/RECURSOS LIMITADOS

EXCETO SE EXPRESSAMENTE ESTABELECIDO EM UMA SEÇÃO DE GARANTIA LIMITADA DE EMBALAGEM DE PRODUTO INDIVIDUAL, A NEOGEN REJEITA TODOS OS TERMOS EXPRESSOS E IMPLÍCITOS DE GARANTIA INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU DE ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO USO. Se qualquer produto da Neogen Food Safety estiver com defeito, a Neogen ou seu distribuidor autorizado procederá à respectiva substituição ou, se assim o decidir, restituirá o dinheiro da compra do produto. Estes são os seus únicos termos de recurso. Entre em contato com seu representante da Neogen ou distribuidor autorizado da Neogen para qualquer dúvida adicional.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA NEOGEN

A NEOGEN NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS, SEJAM DIRETOS, INDIRETOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU SUBSEQUENTES INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, A PERDA DE LUCROS. Em nenhuma circunstância deverá a responsabilidade da Neogen sob qualquer teoria jurídica exceder o preço de compra dos produtos supostamente defeituosos.

ARMAZENAMENTO E DESCARTE

Armazenamento: Consulte o rótulo da embalagem para obter informações sobre o armazenamento.

Descarte: Siga os padrões atuais da indústria e os regulamentos locais para o descarte de resíduos contaminados. Consulte a planilha de dados de segurança de materiais para obter informações adicionais.

Descrição do Produto	Volume	REF	Volume da bolsa	Luvas
Neogen® Dry-Sponge	0 mL	BP133ES	0,9 L (30 oz.)	0
Neogen® Dry-Sponge com luvas	0 mL	BP237SPG	0,9 L (30 oz.)	1
Neogen® Esponja Hidratada com Água Peptonada Tamponada	10 mL	HS10BPW	0,9 L (30 oz.)	0
Neogen® Esponja Hidratada com Água Peptonada Tamponada, 2 Luvas	10 mL	HS10BPW2G	0,9 L (30 oz.)	2
Neogen® Esponja Hidratada com Tampão Neutralizante D/E, 2 Luvas	10 mL	HS10DE2G	0,9 L (30 oz.)	2
Neogen® Esponja Hidratada com Caldo Lethen	10 mL	HS10LET	0,9 L (30 oz.)	0
Neogen® Esponja Hidratada com Caldo Lethen, 2 Luvas	10 mL	HS10LET2G	0,9 L (30 oz.)	2
Neogen® Esponja Hidratada com Tampão Neutralizante	10 mL	HS10NB	0,9 L (30 oz.)	0
Neogen® Esponja Hidratada com Tampão Neutralizante, 2 Luvas	10 mL	HS10NB2G	0,9 L (30 oz.)	2

INSTRUÇÕES DE USO

1. Agite a esponja para o final da bolsa.
2. Rasgue a bolsa.
NOTA: Adicione o diluente estéril ou o caldo à esponja seca.
3. Pressione a esponja para estender a partir da bolsa.
4. Dobre os fios azuis para formar a bolsa aberta.
5. Coloque luvas estéreis.
6. Remova assepticamente a esponja.
7. Esfregue assepticamente toda a superfície de amostragem ^{3,4,5,6}.
8. Vire a esponja. Mude a direção em 90°. Esfregue assepticamente a mesma superfície de amostragem.
9. Coloque a esponja dentro da bolsa assepticamente.
10. Dobre a bolsa para fechar.
11. Dobre as extremidades dos fios azuis para dentro.
12. Seguindo os procedimentos estabelecidos pelo usuário, remova qualquer resíduo remanescente de caldo de enriquecimento ou de solução neutralizadora da superfície de amostragem.












REFERÊNCIAS

1. U.S. Food and Drug Administration. Code of Federal Regulations, Title 21, Part 58. Good Laboratory Practice for Nonclinical Laboratory Studies.
2. ISO/IEC 17025. Requisitos gerais para a competência de laboratório de teste e calibração.
3. American Public Health Association - Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - Chapter 3: Microbiological Monitoring of the Food Processing Environment, 4th edition.
4. US Food and Drug Administration - Bacteriological Analytical Method (disponível online em <https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/bacteriological-analytical-manual-bam>).
5. United States Department of Agriculture - Microbiological Lab Guidebook - Chapters 4.04, 5.04, and 8.07.
6. American Public Health Association - Standard Methods for the Examination of Dairy Products - Chapter 13: Microbiological Tests for Equipment, Containers, Water, and Air, 17th edition.

Consulte as versões atuais dos métodos padrão listados acima.

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

info.neogen.com/symbols

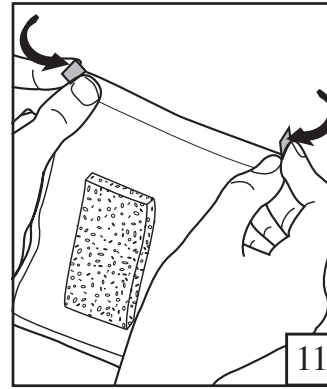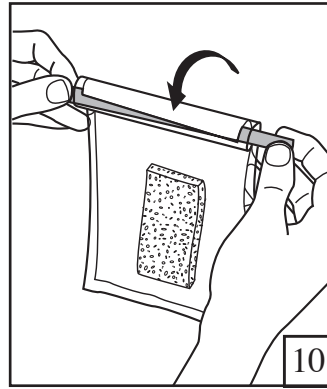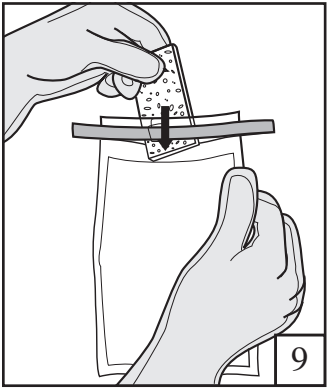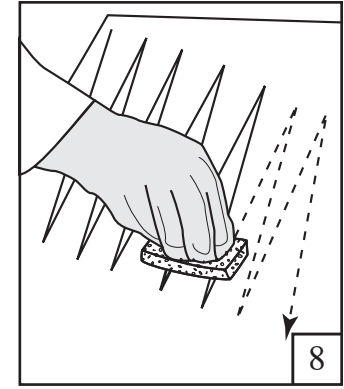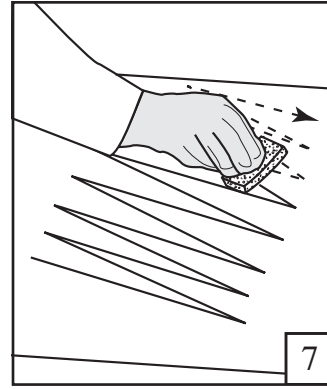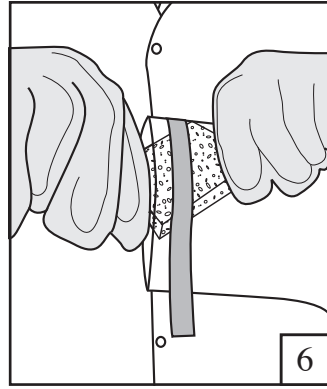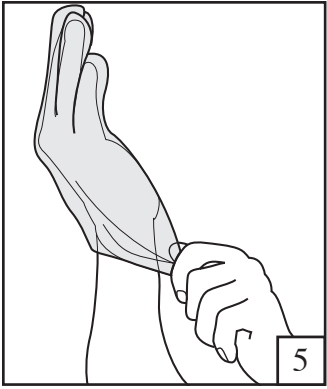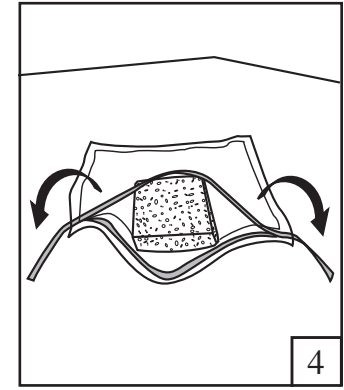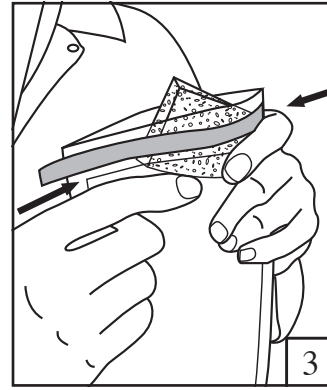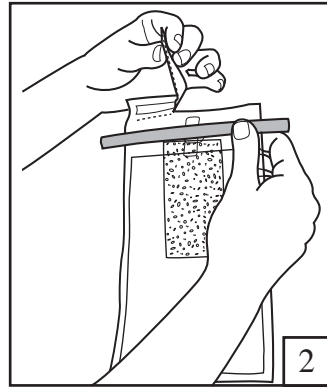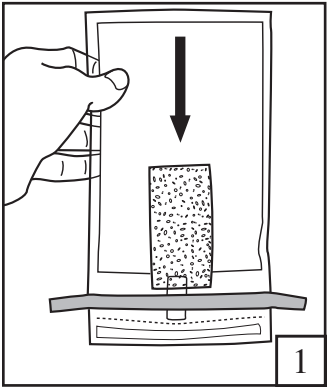

Neogen Food Safety

Neogen Corporation

620 Leshar Place
Lansing, MI 48912 USA
neogen.com

Neogen Europe Ltd.

The Dairy School
Auchincruive
Ayr, KA6 5HU
Scotland, UK

Neogen Ireland, Ltd.

Bray Business Park, Bray
Co. Wicklow
A98YV29, Ireland



Neogen Corporation

620 Leshar Place Lansing, MI 48912 USA
www.neogen.com

Neogen is a trademark of Neogen Corporation.

© Neogen Corporation 2024.

All rights reserved.

FS00834A

Πληροφορίες προϊόντος

Ξηρός Σπόγγος

Ενυδατωμένος Σπόγγος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ξηρός ή προ-ενυδατωμένος και ελεύθερος βιοκτόνου σπόγγος 3,8 x 7,6 cm (1,5 x 3 in.) σε σάκο δειγματοληψίας. Προ-ενυδατωμένος με καθορισμένο παράγοντα. Με ή χωρίς γάντια.

Μόνο για εργαστηριακή χρήση. Διατίθεται Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο χρήστης πρέπει να διαβάσει, κατανοήσει και ακολουθήσει όλες τις πληροφορίες ασφαλείας στις οδηγίες. Φυλάξτε τις πληροφορίες ασφαλείας για μελλοντική αναφορά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ή/και καταστροφική ιδιοκτησία.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ Υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα καταστροφή ιδιοκτησίας.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με περιβαλλοντική μόλυνση:

- Ακολουθήστε τα τρέχοντα πρότυπα της βιομηχανίας και τους τοπικούς κανονισμούς για τη απόρριψη των μολυσμένων αποβλήτων.

Για να μειώσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με έκθεση σε βιολογικούς κινδύνους:

- Απορρίψτε τα δείγματα σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κρατικούς κανονισμούς και τις ισχύουσες εργαστηριακές διαδικασίες.

Για να μειώσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με ψευδή αρνητικά αποτελέσματα που οδηγούν στη χρήση μολυσμένων σφαγίων ή περιβαλλοντικών επιφανειών για προϊόντα τροφίμων ή ποτών:

- Ανατρέχετε πάντα στην ετικέτα της συσκευασίας για οδηγίες αποθήκευσης και την ημερομηνία λήξης.
- Ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.

Για να μειώσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση σε χημικές ουσίες και τους βιολογικούς κινδύνους:

- Ακολουθείτε πάντα τις τυπικές καλές πρακτικές ασφαλείας εργαστηρίου (GLP¹ ή ISO 17025²), συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών σωστού περιορισμού, φορώντας κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία ενώ χειρίζεστε υλικά δοκιμασίας και εξεταζόμενα δείγματα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο ψευδών θετικών αποτελεσμάτων λόγω διασταυρούμενης μόλυνσης σφαγίων ή περιβαλλοντικών επιφανειών για προϊόντα τροφίμων ή ποτών, που μπορεί να οδηγήσει σε επανάληψη του ελέγχου ή στην απόρριψη προϊόντων τροφίμων ή ποτών:

- Μην αγγίζετε με το σπόγγο καμία μη προβλεπόμενη επιφάνεια.
- Μην πιάνετε το εσωτερικό του σάκου του σπόγγου.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης από την επαναχρησιμοποίηση της συσκευής χειρισμού δειγμάτων:

- Μη χρησιμοποιείτε τον ίδιο σπόγγο πάνω από μία φορά.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι να εξοικειωθούν με τις οδηγίες και τις πληροφορίες του προϊόντος. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.neogen.com, ή επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή διανομέα της Neogen για περισσότερες πληροφορίες.

Κατά την επιλογή μιας μεθόδου ελέγχου, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε ότι εξωτερικοί παράγοντες, όπως μέθοδοι δειγματοληψίας, πρωτόκολλα ελέγχου, προετοιμασία και χειρισμός δειγμάτων και η εργαστηριακή τεχνική μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα.

Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να επιλέξει οποιαδήποτε μέθοδο ή προϊόν ελέγχου, για να αξιολογήσει έναν επαρκή αριθμό δειγμάτων με τις κατάλληλες μέτρες και μικροβιακές προκλήσεις, ώστε η επιλεγμένη μέθοδος να ικανοποιεί τα κριτήρια του χρήστη.

Αποτελεί επίσης ευθύνη του χρήστη να καθορίσει ότι οποιοδήποτε μέθοδοι ελέγχου και τα αποτελέσματα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών και των προμηθευτών του.

Όπως και με κάθε μέθοδο ελέγχου, τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος Neogen Food Safety δεν συνιστούν εγγύηση της ποιότητας των μητρών ή των διαδικασιών που υποβάλλονται σε δοκιμή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, Η NEOGEN ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ. Εάν οποιοδήποτε προϊόν Neogen Food Safety είναι ελαττωματικό, η Neogen ή ο εξουσιοδοτημένος διανομέας της, κατά την κρίση τους, θα αντικαταστήσουν ή επιστρέψουν την τιμή αγοράς του προϊόντος. Αυτές είναι οι αποκλειστικές σας αποκαταστάσεις. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Neogen ή τον εξουσιοδοτημένο διανομέα της Neogen για περαιτέρω ερωτήσεις.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΓΕΝ

Η ΝΕΟΓΕΝ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ, ΕΙΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ. Η ευθύνη της Neogen δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση και υπό καμία νομική θεωρία την τιμή αγοράς του προϊόντος που εικάζεται ότι είναι ελαττωματικό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Αποθήκευση: Ανατρέξτε στην ετικέτα της συσκευασίας για πληροφορίες αποθήκευσης.

Απόρριψη: Ακολουθήστε τα τρέχοντα πρότυπα της βιομηχανίας και τους τοπικούς κανονισμούς για τη απόρριψη των μολυσμένων αποβλήτων. Συμβουλευθείτε το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών για πρόσθετες πληροφορίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Όγκος	ΚΩΔ.	Όγκος σάκου	Γάντια
Neogen® Ξηρός Σπόγγος	0 mL	BP133ES	0,9 L (30 oz.)	0
Neogen® Ξηρός Σπόγγος με Γάντι	0 mL	BP2375PG	0,9 L (30 oz.)	1
Neogen® Ενυδατωμένος Σπόγγος με Θρεπτικό Υλικό Ρυθμιζόμενης Πεπτόνης	10 mL	HS10BPW	0,9 L (30 oz.)	0
Neogen® Ενυδατωμένος Σπόγγος με Θρεπτικό Υλικό Ρυθμιζόμενης Πεπτόνης, 2 γάντια	10 mL	HS10BPW2G	0,9 L (30 oz.)	2
Neogen® Ενυδατωμένος Σπόγγος με Ρυθμιστικό Διάλυμα Ουδετεροποίησης D/E, 2 γάντια	10 mL	HS10DE2G	0,9 L (30 oz.)	2
Neogen® Ενυδατωμένος Σπόγγος με Θρεπτικό υλικό Lethcen	10 mL	HS10LET	0,9 L (30 oz.)	0
Neogen® Ενυδατωμένος Σπόγγος με Θρεπτικό Υλικό Lethcen, 2 γάντια	10 mL	HS10LET2G	0,9 L (30 oz.)	2
Neogen® Ενυδατωμένος Σπόγγος με Ρυθμιστικό Διάλυμα Ουδετεροποίησης	10 mL	HS10NB	0,9 L (30 oz.)	0
Neogen® Ενυδατωμένος Σπόγγος με Ρυθμιστικό Διάλυμα Ουδετεροποίησης, 2 γάντια	10 mL	HS10NB2G	0,9 L (30 oz.)	2

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Αναταράξτε το σπόγγο στην άκρη του σάκου.
2. Ανοίξτε το σάκο σχίζοντάς τον.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσθέστε αποστειρωμένο αραιωτικό ή ζωμό στον ξηρό σπόγγο.
3. Ωθήστε το σπόγγο ώστε να προεξέχει από το σάκο.
4. Λυγίστε τα μπλε σύρματα για να σχηματίσετε έναν ανοιχτό σάκο.
5. Φορέστε τα αποστειρωμένα γάντια.
6. Αφαιρέστε το σπόγγο με ασηπτικό τρόπο.
7. Περάστε με ασηπτικό τρόπο ολόκληρη την επιφάνεια δειγματοληψίας^{3,4,5,6}.
8. Αναποδογυρίστε το σπόγγο. Αλλάξτε κατεύθυνση κατά 90°. Περάστε με ασηπτικό τρόπο την ίδια επιφάνεια δειγματοληψίας.
9. Τοποθετήστε το σπόγγο με ασηπτικό τρόπο μέσα στο σάκο.
10. Διπλώστε το σάκο για να τον κλείσετε.
11. Διπλώστε τα άκρα των μπλε συρμάτων προς τα μέσα.
12. Ακολουθώντας τις καθιερωμένες διαδικασίες του χρήστη, αφαιρέστε τυχόν υπολειπόμενο ζωμό εμπλουτισμού ή υπόλειμμα διαλύματος ουδετεροποίησης από την επιφάνεια δειγματοληψίας.












ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

1. U.S. Food and Drug Administration (Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α.) Code of Federal Regulations (Κωδικός Ομοσπονδιακών Κανονισμών), Τίτλος 21, Τμήμα 58. Good Laboratory Practice for Nonclinical Laboratory Studies (Καλές πρακτικές εργαστηρίου για μη κλινικές εργαστηριακές μελέτες).
2. ISO/IEC 17025. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Γενικές απαιτήσεις για την ακρίβεια εργαστηρίων δοκιμής και βαθμονόμησης).
3. American Public Health Association (Αμερικανική Ένωση Δημόσιας Υγείας) - Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods (Επιτομή των μεθόδων για τη μικροβιολογική εξέταση των τροφίμων) - Κεφάλαιο 3: Microbiological Monitoring of the Food Processing Environment (Μικροβιολογική παρακολούθηση του περιβάλλοντος επεξεργασίας τροφίμων), 4η έκδοση.
4. U.S. Food and Drug Administration (Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α.) - Bacteriological Analytical Method (Βακτηριολογική αναλυτική μέθοδος) (διαθέσιμο online στη διεύθυνση <https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/bacteriological-analytical-manual-bam>).
5. United States Department of Agriculture (Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών) - Microbiological Lab Guidebook (Οδηγός για μικροβιολογικά εργαστήρια) - Κεφάλαια 4.04, 5.04 και 8.07.
6. American Public Health Association (Αμερικανική Ένωση Δημόσιας Υγείας) - Standard Methods for the Examination of Dairy Products (Πρότυπες μέθοδοι για την εξέταση των γαλακτοκομικών προϊόντων) - Κεφάλαιο 13: Microbiological Tests for Equipment, Containers, Water, and Air (Μικροβιολογικές δοκιμές για εξοπλισμό, δοχεία, νερό και αέρα), 17η έκδοση.

Αναφερθείτε στην τρέχουσα έκδοση των τυπικών μεθόδων που δίνονται παραπάνω.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

info.neogen.com/symbols

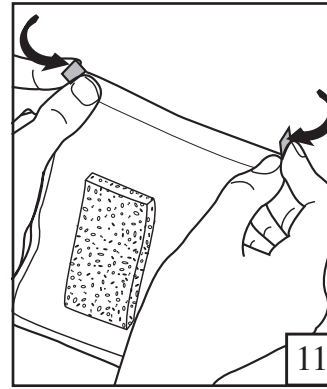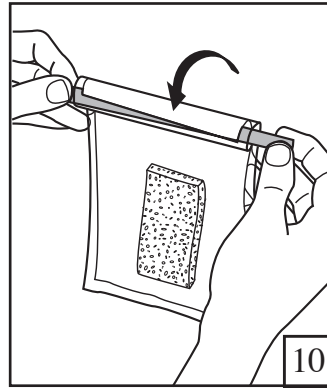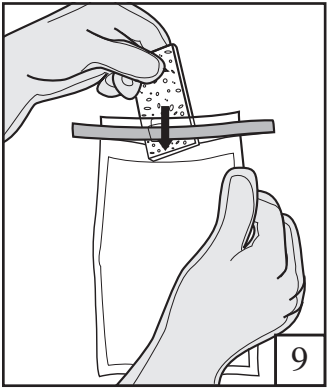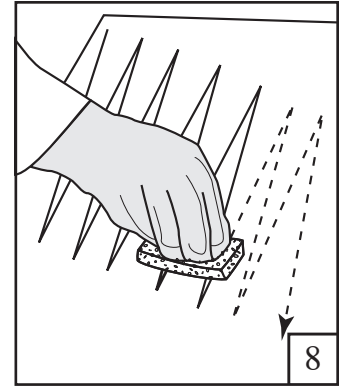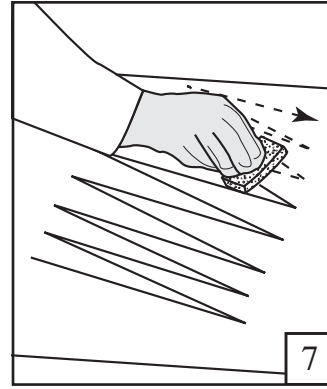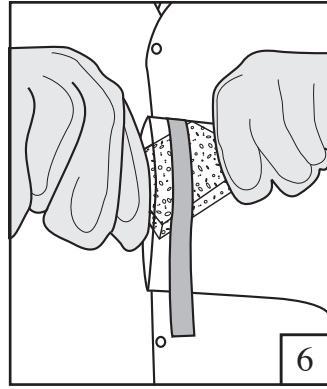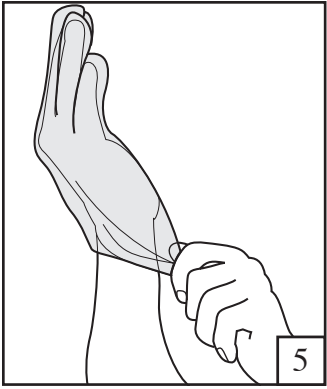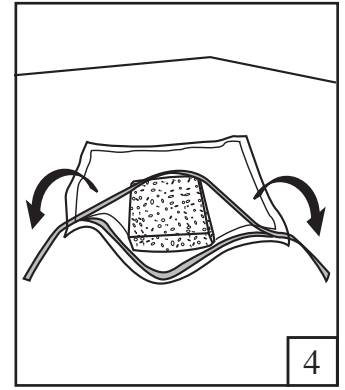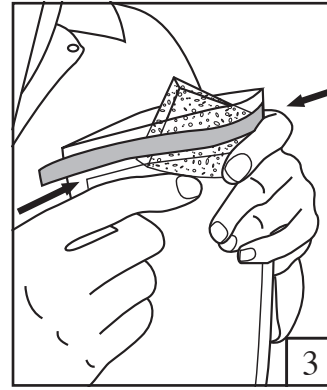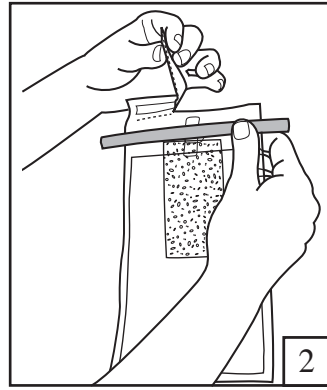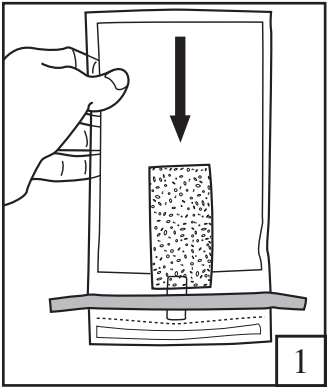

Neogen Food Safety

Neogen Corporation

620 Leshar Place
Lansing, MI 48912 USA
neogen.com

Neogen Europe Ltd.

The Dairy School
Auchincruive
Ayr, KA6 5HU
Scotland, UK

Neogen Ireland, Ltd.

Bray Business Park, Bray
Co. Wicklow
A98YV29, Ireland



Neogen Corporation

620 Leshar Place Lansing, MI 48912 USA
www.neogen.com

Neogen is a trademark of Neogen Corporation.

© Neogen Corporation 2024.

All rights reserved.

FS00834A

Informacje o produkcie

Sucha gąbka

Wilgotna gąbka

OPIS PRODUKTU

Sucha lub wstępnie nasączona i wolna od środków biobójczych gąbka o wymiarach 3,8 x 7,6 cm w torbie na próbki. Nasączona odpowiednim środkiem. Z rękawiczkami lub bez. Wyłącznie do użytku laboratoryjnego. Dostępna jest karta charakterystyki substancji niebezpiecznej.

BEZPIECZEŃSTWO

Użytkownik powinien zapoznać się, zrozumieć i przestrzegać wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa, zamieszczonych w instrukcji. Należy zachować wskazówki bezpieczeństwa, aby można było z nich korzystać w przyszłości.

⚠ OSTRZEŻENIE Wskazuje sytuację niebezpieczną, która, jeżeli nie uda się jej zapobiec, może prowadzić do śmierci, poważnych obrażeń i/lub zniszczenia majątku.

UWAGA Wskazuje sytuację potencjalnie niebezpieczną, która, jeżeli nie uda się jej zapobiec, może prowadzić do zniszczenia majątku.

⚠ OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko związane ze skażeniem środowiska:

- Należy śledzić bieżące normy przemysłowe i obowiązujące lokalnie przepisy dotyczące utylizacji zanieczyszczonych odpadów.

Aby zmniejszyć ryzyko związane z ekspozycją na chemikalia:

- Utylizacja próbek zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami krajowymi i mającymi zastosowanie procedurami laboratoryjnymi.

Aby zmniejszyć ryzyko związane z fałszywymi wynikami prowadzącymi do stosowania zanieczyszczonych ciał zwierzęcych lub powierzchni środowiskowych w produktach żywnościowych i napojach:

- Należy zawsze korzystać z etykiety na opakowaniu, aby określić datę przydatności i zalecenia dotyczące magazynowania.
- Należy zawsze korzystać z instrukcji obsługi produktu aby uzyskać informacje na temat jego użytkowania.

Aby zmniejszyć ryzyko związane z narażeniem na substancje chemiczne i zagrożenia biologiczne:

- Należy zawsze przestrzegać standardowych praktyk dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP¹ lub ISO 17025²), łącznie z prawidłowymi procedurami dotyczącymi przygotowywania próbek, noszenia odpowiedniej odzieży ochronnej w trakcie wykonywania wszelkich czynności z badanymi materiałami i badanymi próbkami.

UWAGA

Aby zmniejszyć ryzyko fałszywych wyników dodatknych będących wynikiem krzyżowego zanieczyszczenia ciał zwierzęcych lub powierzchni środowiskowych w produktach żywnościowych lub napojach, mogących być przyczyną ponownego przeprowadzania badań lub odrzucenia produktu żywnościowego lub napoju:

- Nie wolno dotykać gąbką żadnej niepożądanego powierzchni.
- Nie wkładać rąk do torby zawierającej gąbkę.

Aby zmniejszyć ryzyko krzyżowego zanieczyszczenia wynikającego z powtórnego użycia przyrządu:

- Nie wolno wielokrotnie używać tej samej gąbki.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z instrukcjami oraz informacjami dotyczącymi produktu. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej pod adresem www.neogen.com lub zachęcamy do skontaktowania się z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem firmy Neogen.

Przy wyborze metody badawczej należy pamiętać, że takie czynniki zewnętrzne, jak metody próbkowania, protokoły testowania, przygotowanie próbek, dalsze postępowanie i technika laboratoryjna mogą wpływać na uzyskiwane wyniki.

Obowiązkiem użytkownika przy wyborze jakiegokolwiek metody badawczej lub produktu do prowadzenia badania jest poddanie ocenie dostatecznej liczby próbek z właściwymi matrycami i z uwzględnieniem zagrożeń wywołanych przez mikroorganizmy, tak aby zastosowana metoda spełniała ustalone przez użytkownika kryteria.

Użytkownik ma także obowiązek dopilnować, aby zastosowane metody badawcze i uzyskane wyniki spełniały wymagania klientów i dostawców.

Podobnie, jak w przypadku każdej metody badawczej, wyniki uzyskiwane za pomocą produktu Neogen Food Safety nie stanowią gwarancji jakości testowanych matryc lub procesów.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI / OGRANICZONE ŚRODKI NAPRAWCZE

JEŚLI NIE ZOSTAŁO TO WYRAŹNIE OKREŚLONE W ROZDZIALE DOT. OGRANICZONEJ GWARANCJI POJEDYNCZYCH OPAKOWAŃ PRODUKTÓW, FIRMA NEOGEN WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSZYSTKICH JAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W SZCZEGÓLNOŚCI WSZELKICH GWARANCJI ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Jeśli jakikolwiek produkt do badania Bezpieczeństwa żywności Neogen jest wadliwy, firma Neogen lub jej autoryzowany dystrybutor wymieni bądź naprawi taki produkt lub, wedle własnego uznania, zwróci koszty zakupu tego produktu. Są to jedyne przysługujące środki naprawcze. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Neogen lub autoryzowanym dystrybutorem firmy Neogen.



OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY NEOGEN

FIRMA NEOGEN NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY, ZARÓWNO BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, UBOCZNE LUB NASTĘPCZE, W SZCZEGÓLNOŚCI Z TYTUŁU UTRACONYCH ZYSKÓW. W żadnym wypadku odpowiedzialność ustawowa firmy Neogen nie może przekroczyć ceny zakupu produktu, wobec którego domniemywa się, że jest wadliwy.

PRZECHOWYWANIE I UTYLIZACJA

Przechowywanie: Należy skorzystać z etykiety znajdującej się na opakowaniu aby znaleźć informacje dotyczące przechowywania produktu.

Utylizacja: Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących norm i obowiązujących lokalnie przepisów prawnych dotyczących utylizacji zanieczyszczonych odpadów. Dodatkowe informacje znajdują się w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

Opis PRODUKTU	Objętość	REF	Objętość torby	Rękawiczki
Neogen® Sucha gąbka	0 ml	BP133ES	0,9 l (30 oz.)	0
Neogen® Sucha gąbka z rękawiczką	0 ml	BP237SPG	0,9 l (30 oz.)	1
Neogen® Wilgotna gąbka z bulionem na bazie zbuforowanej wody peptonowej (BPW)	10 ml	HS10BPW	0,9 l (30 oz.)	0
Neogen® Wilgotna gąbka z bulionem na bazie zbuforowanej wody peptonowej (BPW), 2 rękawice	10 ml	HS10BPW2G	0,9 l (30 oz.)	2
Neogen® Wilgotna gąbka z buforem neutralizującym D/E, 2 rękawice	10 ml	HS10DE2G	0,9 l (30 oz.)	2
Neogen® Wilgotna gąbka z bulionem Lethen (LB)	10 ml	HS10LET	0,9 l (30 oz.)	0
Neogen® Wilgotna gąbka z bulionem Lethen (LB), 2 rękawice	10 ml	HS10LET2G	0,9 l (30 oz.)	2
Neogen® Wilgotna gąbka z buforem neutralizującym	10 ml	HS10NB	0,9 l (30 oz.)	0
Neogen® Wilgotna gąbka z buforem neutralizującym, 2 rękawice	10 ml	HS10NB2G	0,9 l (30 oz.)	2

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Strząsnąć gąbkę do końca torby.
2. Rozerwać i otworzyć torebkę.
UWAGA: Dodać sterylny rozcieńczalnik lub bulion, aby wysuszyć do suchej gąbki.
3. Wycisnąć gąbkę tak, aby wysunęła się z torby.
4. Zgiąć niebieskie przewody tak, aby utworzyły one otwartą torbę.
5. Założyć sterylne rękawiczki.
6. Wyjąć gąbkę w warunkach aseptycznych.
7. Zachowując warunki aseptyczne, pobrać wymaz wzdłuż całej powierzchni próbki^{3,4,5,6}.
8. Obrócić gąbkę. Zmienić kierunek o 90°. Zachowując warunki aseptyczne, pobrać wymaz wzdłuż tej samej powierzchni próbki.
9. Zachowując warunki aseptyczne, umieścić gąbkę w torbie.
10. Złożyć torbę tak, aby ją zamknąć.
11. Zagiąć końcówki niebieskich drutów do wewnątrz.
12. Postępując zgodnie z procedurami określonymi przez użytkownika, usunąć wszelkie pozostałości bulionu wzbogacającego lub roztworu zobojętniającego z powierzchni z której pobierana była próbka.












ŹRÓDŁA

1. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków. Code of Federal Regulations, Title 21, Part 58. Good Laboratory Practice for Nonclinical Laboratory Studies (Kodeks Przepisów Federalnych, tytuł 21, część 58. Dobra praktyka laboratoryjna w nieklinicznych badaniach laboratoryjnych).
2. ISO/IEC 17025. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcowych.
3. Amerykańskie Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Publicznego - Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods (Kompendium Metod Mikrobiologicznego Badania Żywności - Rozdział 3): Mikrobiologiczne Monitorowanie Środowiska Przetwórstwa Żywności, 4. wydanie (Microbiological Monitoring of the Food Processing Environment, 4th Edition).
4. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków - Bakteriologiczna Metoda Analityczna (Bacteriological Analytical Method (dostępna online pod adresem <https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/bacteriological-analytical-manual-bam>).
5. Amerykańskie Ministerstwo Rolnictwa - Przewodnik po Laboratorium Mikrobiologicznym (Microbiological Lab Guidebook) - rozdziały 4.04, 5.04 i 8.07.
6. Amerykańskie Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Publicznego - Standardowe Metody Badania Produktów Mleczarskich - Rozdział 13 (Standard Methods for the Examination of Dairy Products): Badania Mikrobiologiczne Przyrządów, Pojemników, Wody i Powietrza, 17. wydanie (Microbiological Tests for Equipment, Containers, Water and Air, 17th Edition).

Należy korzystać z aktualnych wersji metod standardowych wymienionych powyżej.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI

info.neogen.com/symbols

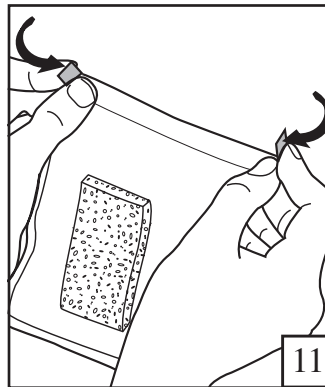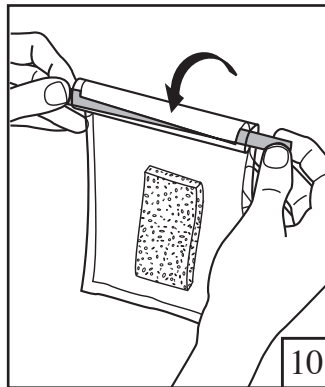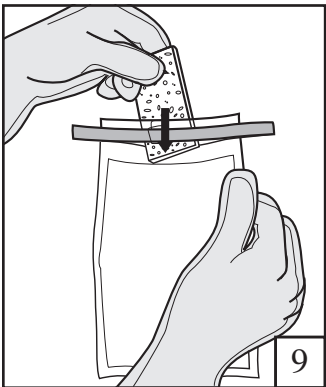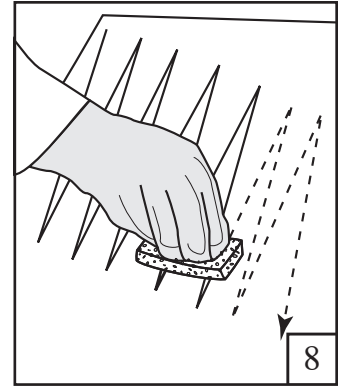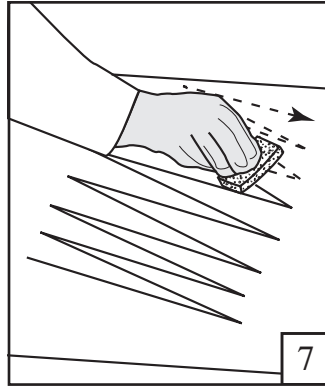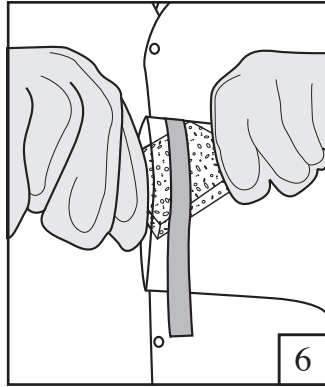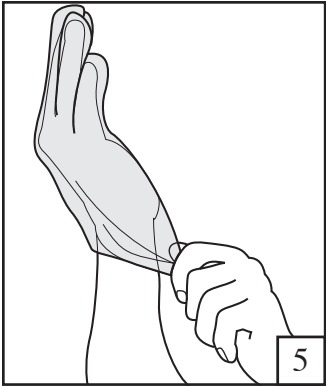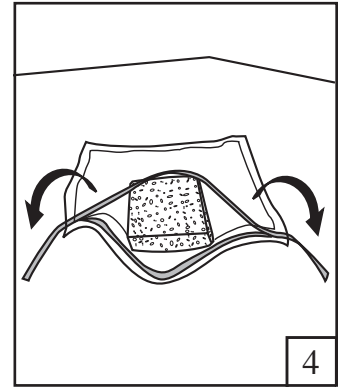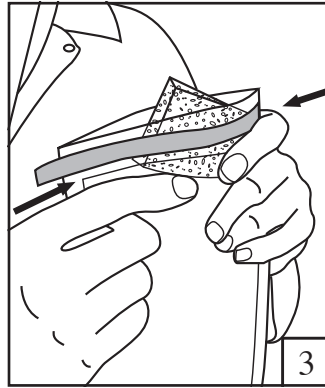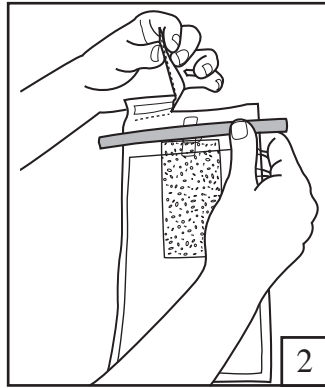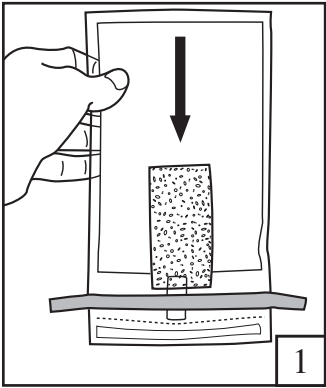

Neogen Food Safety

Neogen Corporation

620 Leshar Place
Lansing, MI 48912 USA
neogen.com

Neogen Europe Ltd.

The Dairy School
Auchincruive
Ayr, KA6 5HU
Scotland, UK

Neogen Ireland, Ltd.

Bray Business Park, Bray
Co. Wicklow
A98YV29, Ireland



Neogen Corporation

620 Leshar Place Lansing, MI 48912 USA
www.neogen.com

Neogen is a trademark of Neogen Corporation.

© Neogen Corporation 2024.

All rights reserved.

FS00834A

Termékhasználati útmutató

Dry-Sponge száraz szivacs Hidratált szivacs

TERMÉKLEÍRÁS

Száraz vagy előnedvesített és biocidmentes, 3,8 x 7,6 cm (1,5 x 3 hüvelyk) szivacs mintagyűjtő tasakban. Előre meghatározott oldattal előnedvesítve. Kesztyűvel vagy anélkül.

Kizárólag laboratóriumi felhasználásra. A termék biztonsági adatlappal rendelkezik.

BIZTONSÁG

A felhasználónak tanácsos elolvasnia, megértenie és követnie a használati útmutatóban leírt biztonsági információkat. Őrizze meg ezen utasításokat jövőbeli alkalmazás céljából.

⚠ VIGYÁZAT Veszélyes helyzetet jelöl, amely – ha bekövetkezik – halált, illetve komoly sérülést és/vagy anyagi kárt eredményezhet.

MEGJEGYZÉS Potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, amely – ha bekövetkezik – anyagi kárt eredményezhet.

⚠ VIGYÁZAT

A környezetszennyezéssel kapcsolatos kockázat csökkentéséhez:

- A szennyezett hulladék ártalmatlanításakor kövesse az érvényes ipari előírásokat és helyi rendelkezéseket.

A biológiailag veszélyes anyagoknak való kitettség kockázatának csökkentése érdekében:

- A mintákat az összes vonatkozó kormányrendeletnek és laboratóriumi eljárásnak megfelelően ártalmatlanítsa.

A szennyezett tetemek vagy környezeti felszínek használatából adódó élelmiszeripari vagy italtermékek álnegatív eredményeivel kapcsolatos kockázat csökkentéséhez:

- Mindig olvassa el a csomag címkéjén található tárolási adatokat és a lejáratí időt.
- Használathoz mindig olvassa el a termék használati útmutatójához.

A vegyszereknek és biológiailag veszélyes anyagoknak való kitettséggel kapcsolatos kockázat csökkentéséhez:

- Mindig kövesse a szabványos helyes laboratóriumi biztonságos gyakorlatokat (GLP¹ vagy ISO 17025²), beleértve a megfelelő tárolási eljárásokat, a megfelelő védőfelszerelés használatát a vizsgálati anyagok és vizsgálati minták kezelése során.

MEGJEGYZÉS

A szennyezett tetemek vagy környezeti felszínek használatából adódó élelmiszeripari vagy italtermékek álnegatív eredményeivel kapcsolatos kockázat csökkentéséhez, amely az élelmiszeripari vagy italtermék ismételt vizsgálatához vagy elutasításához vezethet:

- Kizárólag a kívánt felületet érintheti meg a szivaccsal.
- Ne nyúljon a szivacs tasakjába.

A mintakezelő eszköz ismételt használatából adódó szennyezéssel kapcsolatos kockázat csökkentéséhez:

- Egy szivacsot kizárólag egyszer használjon fel.

A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE

A felhasználók kötelesek megismerkedni a termék használati útmutatójával és tájékoztatójával. További információkért látogassa meg a www.neogen.com weboldalt, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi Neogen képviselővel vagy forgalmazóval.

A tesztelési eljárás kiválasztásakor fel kell ismerni azokat a külső tényezőket, mint pl. a mintavételi módszerek, tesztelési protokollok, minta-előkészítés, kezelés és laboratóriumi technikák, melyek befolyásolhatják az eredményt.

A tesztelési módszer vagy termék kiválasztásakor a felhasználó felelőssége, hogy a megfelelő mátrixokkal és mikrobiális kihívásokkal elegendő számú mintát értékeljen ki, hogy a választott tesztelési módszer eleget tegyen a felhasználó elvárásainak.

A felhasználó felelőssége továbbá annak meghatározása, hogy a tesztelési módszerek és eredmények megfelelnek-e az ügyfél és a szállító elvárásainak.

Más tesztelési módszerekhez hasonlóan, a Neogen élelmiszer-biztonsági termékeinek használata során nyert eredmények nem nyújtanak garanciát a tesztelt mátrixok vagy eljárások minőségére vonatkozóan.

A SZAVATOSSÁG KORLÁTOZÁSA/KORLÁTOZOTT JOGORVOSLAT

AZ ADOTT TERMÉKCSOMAGOLÁS KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEIBEN KIFEJEZETTEN ELŐÍRTAK KIVÉTELÉVEL, A NEOGEN CÉG KIZÁR MINDEN KIFEJEZETT ÉS HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALMAZHATÓSÁGRA VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT. Amennyiben bármely Neogen élelmiszer-biztonsági termék hibásnak bizonyulna, a Neogen cég vagy annak meghatalmazott forgalmazója – saját döntése szerint – az adott terméket kicseréli vagy a vételárat visszatéríti az ügyfélnek. Egyéb jogorvoslatnak nincs helye. További kérdéseivel forduljon a Neogen képviselőjéhez vagy a Neogen hivatalos forgalmazójához.



A NEOGEN FELELŐSSÉGÉNEK KORLÁTOZÁSA

A NEOGEN NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, SPECIÁLIS, KÖVETKEZMÉNYES VAGY VÉLETLENSZERŰ VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELMARADT HASZNOT IS. A Neogen cég felelősségének mértéke semmilyen jogelv szerint nem haladhatja meg a hibásnak mondott termék vételárát.

TÁROLÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

Tárolás: Tárolással kapcsolatos információ a csomag címkéjén található.

Hulladékként történő kezelés: A szennyezett hulladék ártalmatlanításakor kövesse az érvényes ipari előírásokat és helyi rendelkezéseket. További információért forduljon a termék biztonsági adatlapjához.

Termékleírás	Térfogat	REF	A tasak térfogata	Kesztyű
Neogen® Dry-Sponge száraz szivacs	0 ml	BP133ES	0,9 l (30 oz)	0
Neogen® Dry-Sponge száraz szivacs kesztyűvel	0 ml	BP237SPG	0,9 l (30 oz)	1
Neogen® Hidratált szivacs puffertelt peptonvízzel	10 ml	HS10BPW	0,9 l (30 oz)	0
Neogen® Hidratált szivacs puffertelt peptonvízzel, 2 kesztyű	10 ml	HS10BPW2G	0,9 l (30 oz)	2
Neogen® Hidratált szivacs D/E semlegesítő pufferral, 2 kesztyű	10 ml	HS10DE2G	0,9 l (30 oz)	2
Neogen® Hidratált szivacs letheen táptalajjal	10 ml	HS10LET	0,9 l (30 oz)	0
Neogen® Hidratált szivacs letheen oldattal, 2 kesztyű	10 ml	HS10LET2G	0,9 l (30 oz)	2
Neogen® Hidratált szivacs semlegesítő pufferral	10 ml	HS10NB	0,9 l (30 oz)	0
Neogen® Hidratált szivacs semlegesítő pufferral, 2 kesztyű	10 ml	HS10NB2G	0,9 l (30 oz)	2

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Rázza a szivacsot a tasak végébe.
- Tépje fel a tasakot.
MEGJEGYZÉS: Adjon steril oldószert vagy táptalajt a száraz szivacsához.
- Tolja ki a szivacsot úgy, hogy kilógjon a tasakból.
- Hajlítsa úgy a kék drótokat, hogy a tasakot nyitva tartsák.
- Húzza fel a steril kesztyűt.
- Vegye ki sterilen a szivacsot.
- Törölje át sterilen az egész mintavételi felszínt^{3,4,5,6}.
- Fordítsa át a szivacsot. Változtassa meg a törlés irányát 90 fokkal. Törölje át ugyanazt a mintavételi felszínt.
- Helyezze vissza sterilen a szivacsot a tasakba.
- A tasak behajtásával zárja be a tasakot.
- Hajlítsa a kék drótok végeit befelé.
- A felhasználó által meghatározott eljárásokat követve távolítsa el a visszamaradt táptalajt vagy a maradék semlegesítő oldatot a mintavételi felszínről.












HIVATKOZÁSOK

- U.S. Food and Drug Administration. Code of Federal Regulations, Title 21, Part 58. Good Laboratory Practice for Nonclinical Laboratory Studies.
- ISO/IEC 17025. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.
- American Public Health Association - Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - Chapter 3: Microbiological Monitoring of the Food Processing Environment, 4th edition.
- US Food and Drug Administration - Bacteriological Analytical Method (az interneten az alábbi címen elérhető: <https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/bacteriological-analytical-manual-bam>).
- United States Department of Agriculture - Microbiological Lab Guidebook - Chapters 4.04, 5.04, and 8.07.
- American Public Health Association - Standard Methods for the Examination of Dairy Products - Chapter 13: Microbiological Tests for Equipment, Containers, Water, and Air, 17th edition.

A fent felsorolt szabványos módszerek legújabb verzióit kell figyelembe venni.

SZIMBÓLUMMAGYARÁZAT

info.neogen.com/symbols

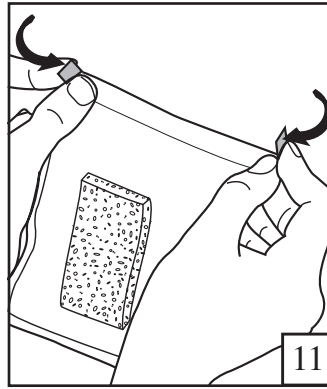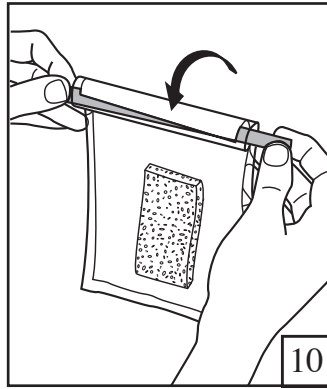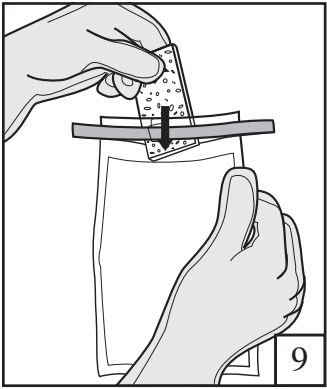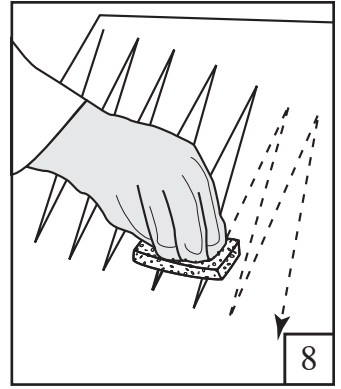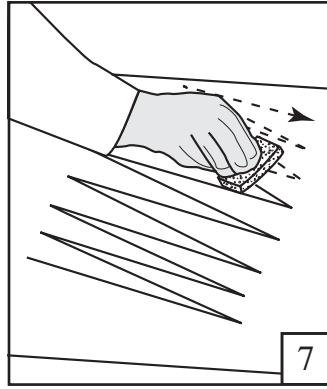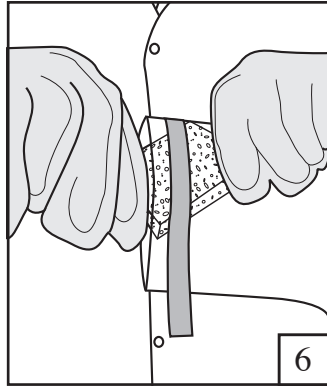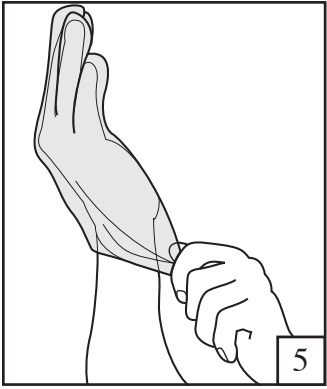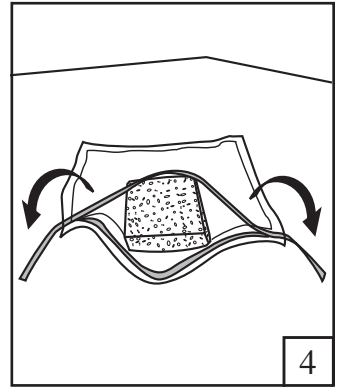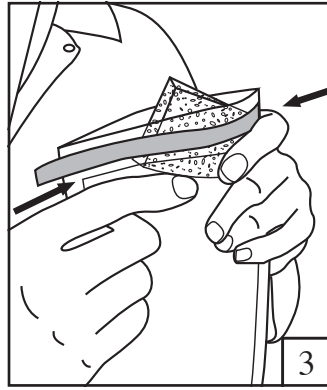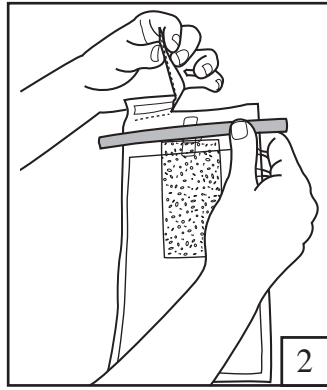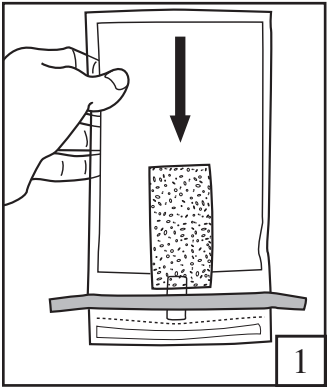

Neogen Food Safety

Neogen Corporation

620 Leshar Place
Lansing, MI 48912 USA
neogen.com

Neogen Europe Ltd.

The Dairy School
Auchincruive
Ayr, KA6 5HU
Scotland, UK

Neogen Ireland, Ltd.

Bray Business Park, Bray
Co. Wicklow
A98YV29, Ireland



Neogen Corporation

620 Leshar Place Lansing, MI 48912 USA
www.neogen.com

Neogen is a trademark of Neogen Corporation.

© Neogen Corporation 2024.

All rights reserved.

FS00834A

Pokyny k výrobku

Suchá houbička

Navlhčená houbička

POPIS VÝROBKU

Suchá nebo předběžně navlhčená houbička 3,8 x 7,6 cm (1,5 x 3 palce) neobsahující biocidy ve vzorkovacím sáčku. Předběžně navlhčená specifikovaným přípravkem. S nebo bez rukavic.

Pouze pro laboratorní použití. K dispozici je materiálový bezpečnostní list.

BEZPEČNOST

Uživatel si musí přečíst, pochopit a řídit se všemi bezpečnostními pokyny uvedenými v návodu. Uchovejte si bezpečnostní pokyny pro budoucí použití.

VAROVÁNÍ Označuje nebezpečné situace, kterých je nutno se vyvarovat, jinak hrozí nebezpečí smrti nebo vážného poranění a/nebo poškození majetku.

UPOZORNĚNÍ Označuje potenciálně nebezpečné situace, kterých je nutno se vyvarovat, jinak hrozí nebezpečí poškození majetku.

VAROVÁNÍ

Pro snížení rizik spojených s kontaminací životního prostředí:

- Dodržujte platné oborové normy a místní předpisy pro likvidaci kontaminovaného odpadu.

Pro snížení rizik spojených s vystavením biologickým nebezpečím:

- Zlikvidujte vzorky podle všech platných vládních nařízení a platných laboratorních postupů.

Pro snížení rizika spojeného s falešně negativními výsledky majícími za následek použití kontaminovaného mrtvého zvířecího těla nebo kontaminovaných povrchů v prostředí pro potravinářské nebo nápojové výrobky:

- Vždy si přečtěte pokyny pro skladování a datum expirace uvedené na štítku na obalu.
- Vždy si přečtěte návod k použití výrobku.

Pro snížení rizik spojených s vystavením vlivu chemických látek a biologických nebezpečí:

- Vždy dodržujte standardní správnou laboratorní bezpečnostní praxi (GLP¹ nebo ISO 17025²), včetně řádných izolačních postupů, používání vhodného ochranného ošacení při manipulaci se zkušebními materiály a zkušebními vzorky.

UPOZORNĚNÍ

Pro snížení rizika falešně pozitivních výsledků v důsledku křížové kontaminace mrtvého zvířecího těla nebo povrchů v prostředí pro potravinářské nebo nápojové výrobky, které mohou mít za následek opakované testování nebo odmítnutí potravinářského nebo nápojového výrobku:

- Nedoťkejte se houbičkou žádného nezamýšleného povrchu.
- Nesahejte do sáčku s houbičkami.

Pro snížení rizika křížové kontaminace v důsledku opakovaného použití prostředku pro manipulaci se vzorkem:

- Nepoužívejte tutéž houbičku více než jednou.

ODPOVĚDNOST UŽIVATELE

Uživatelé jsou zodpovědní za to, že se seznámí s pokyny k výrobku a s informacemi o něm. Podrobnější informace naleznete na naší webové stránce www.neogen.com nebo se obraťte na svého místního zástupce Neogen či distributora.

Při volbě zkušební metody je třeba mít na paměti, že na výsledek mohou mít vliv vnější faktory, jako je odběrová metoda, protokol testu, příprava vzorku, manipulace a práce v laboratoři.

Je zodpovědností uživatele, aby při volbě jakékoli zkušební metody nebo produktu vyhodnotil dostatečný počet vzorků s příslušnými maticemi a s příslušnými typy mikrobů a ujistil se tak, že zvolená zkušební metoda splňuje jeho kritéria.

Zodpovědností uživatele také je, aby zjistil, zda jakékoli metody a výsledky testů splňují požadavky zákazníků a dodavatelů.

Stejně jako u jakékoli jiné testovací metody, ani výsledky získané při použití jakéhokoli produktu společnosti Neogen Food Safety nepředstavují záruku kvality testovaných matic nebo procesů.

OMEZENÍ ZÁRUKY / OMEZENÍ NÁHRADY ŠKODY

POKUD NENÍ V USTANOVENÍ O OMEZENÉ ZÁRUCE K BALENÍ DANÉHO PRODUKTU VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK, NENESE SPOLEČNOST NEOGEN ŽÁDNOU VÝSLOVNOU ANI PŘEDPOKLÁDANOU ZÁRUKU, VČETNĚ NAPŘÍKLAD JAKÉKOLI ZÁRUKY PRODEJNOSTI ČI VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU. Pokud je jakýkoli výrobek společnosti Neogen Food Safety vadný, společnost Neogen nebo její autorizovaný distributor podle svého uvážení buď výrobek vymění, nebo uhradí jeho kupní cenu. Jiné opravné prostředky společnost neposkytuje. PV případě jakýchkoli dalších dotazů se obraťte na zástupce společnosti Neogen nebo na autorizovaného distributora společnosti Neogen.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI NEOGEN

SPOLEČNOST NEOGEN NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNOU ŠKODU, AŽ JIŽ PŘÍMOU ČI NEPŘÍMOU, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNOU NEBO NÁSLEDNOU, VČETNĚ NAPŘÍKLAD UŠLÉHO ZISKU. V žádném případě nepřekročí odpovědnost společnosti Neogen podle jakékoli právní teorie kupní cenu výrobku, u něhož je uplatňována vada.

SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE

Skladování: Informace o skladování viz štítek obalu.

Likvidace: Dodržujte platné oborové normy a místní předpisy pro likvidaci kontaminovaného odpadu. Další informace najdete v materiálovém bezpečnostním listu.

Popis výrobku	Objem	Kat. č.	Objem sáčku	Rukavice
Neogen® Suchá houbička	0 ml	BP133ES	0,9 l (30 uncí)	0
Neogen® Suchá houbička s rukavicí	0 ml	BP237SPG	0,9 l (30 uncí)	1
Neogen® Houbička navlhčená v pufrované peptonové vodě	10 ml	HS10BPW	0,9 l (30 uncí)	0
Neogen® Houbička navlhčená v pufrované peptonové vodě, 2 rukavice	10 ml	HS10BPW2G	0,9 l (30 uncí)	2
Neogen® Houbička navlhčená v neutralizující živné půdě D/E, 2 rukavice	10 ml	HS10DE2G	0,9 l (30 uncí)	2
Neogen® Houbička navlhčená v živné půdě Lethéen	10 ml	HS10LET	0,9 l (30 uncí)	0
Neogen® Houbička navlhčená v živné půdě Lethéen, 2 rukavice	10 ml	HS10LET2G	0,9 l (30 uncí)	2
Neogen® Houbička navlhčená v neutralizující živné půdě	10 ml	HS10NB	0,9 l (30 uncí)	0
Neogen® Houbička navlhčená v neutralizující živné půdě, 2 rukavice	10 ml	HS10NB2G	0,9 l (30 uncí)	2

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Setřepete houbičku k okraji sáčku.
2. Odtržením sáček otevřete.
POZNÁMKA: Na suchou houbičku přidejte sterilní ředidlo nebo bujon.
3. Postrčte houbičku, aby vyčnívala ze sáčku.
4. Ohněte modré dráty, aby vytvořily otevřený sáček.
5. Navlečte si sterilní rukavice.
6. Asepticky vyjměte houbičku.
7. Asepticky stírejte po celé ploše odběru^{3,4,5,6}.
8. Obráťte houbičku. Změňte směr o 90°. Asepticky stírejte tutéž plochu odběru.
9. Asepticky vložte houbičku do sáčku.
10. Přehnutím sáček uzavřete.
11. Konce modrých drátů přehněte směrem dovnitř.
12. Podle uživatelských zavedených postupů odstraňte veškeré zbývající zbytky obohacovacího bujonu nebo neutralizačního roztoku z plochy odběru.












REFERENCE

1. Úřad pro kontrolu potravin a léčiv USA (U.S. Food and Drug Administration). Sbíрка federálních zákonů, titul 21, část 58 – Správná laboratorní praxe pro neklinické laboratorní studie (Code of Federal Regulations, Title 21, Part 58. Good Laboratory Practice for Nonclinical Laboratory Studies).
2. ISO/IEC 17025. Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.
3. Americká asociace veřejného zdravotnictví (American Public Health Association) – Kompéndium metod pro mikrobiologické zkoušení potravin – Kapitola 3: Mikrobiologické monitorování prostředí zpracování potravin, 4. vydání.
4. Úřad pro kontrolu potravin a léčiv USA – Metoda bakteriologické analýzy (k dispozici online na <https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/bacteriological-analytical-manual-bam>).
5. Ministerstvo zemědělství USA – Příručka pro mikrobiologické laboratoře – Kapitoly 4.04, 5.04 a 8.07 (United States Department of Agriculture – Microbiological Lab Guidebook).
6. Americká asociace veřejného zdravotnictví – Standardní metody pro zkoušení mléčných výrobků – Kapitola 13: Mikrobiologické testy zařízení, obalů, vody a vzduchu, 17. vydání.

Viz aktuální verze standardních metod uvedených výše.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

info.neogen.com/symbols

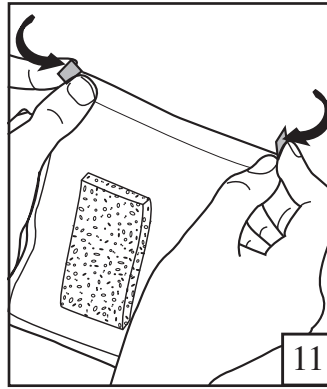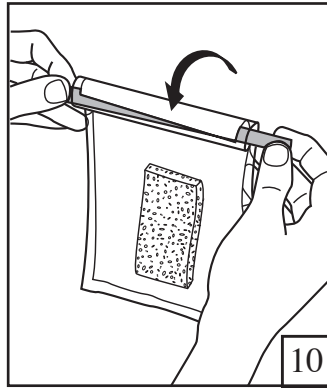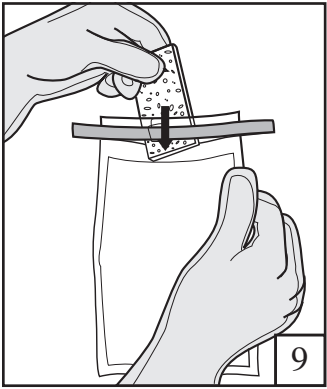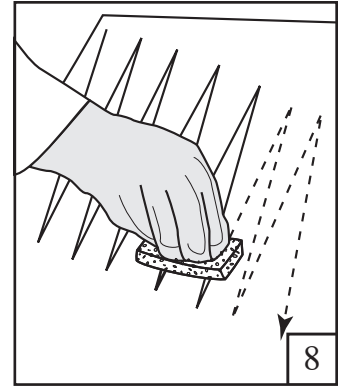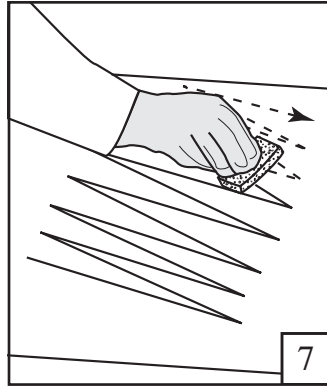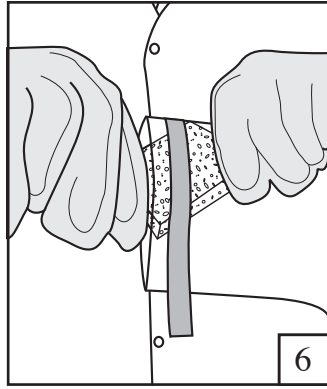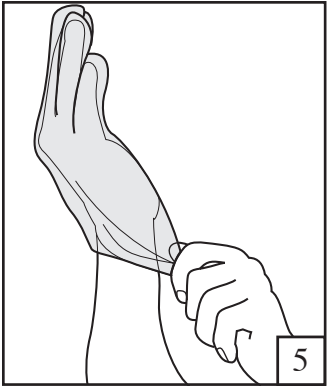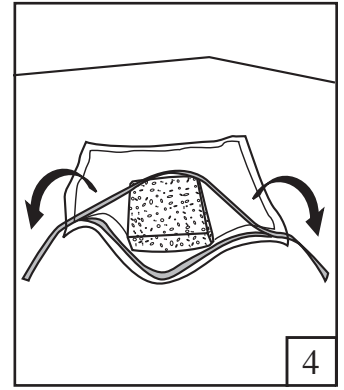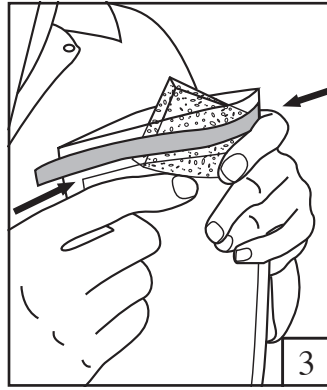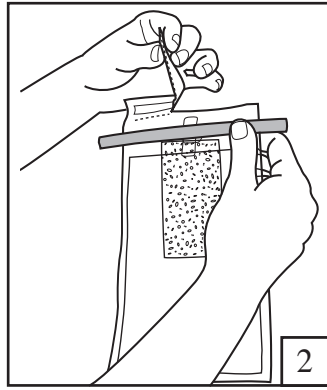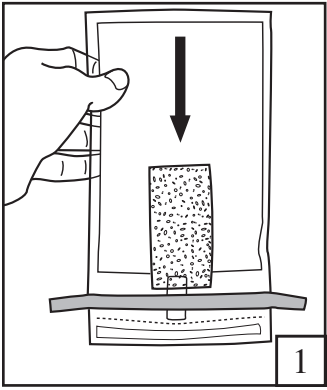

Neogen Food Safety

Neogen Corporation

620 Leshar Place
Lansing, MI 48912 USA
neogen.com

Neogen Europe Ltd.

The Dairy School
Auchincruive
Ayr, KA6 5HU
Scotland, UK

Neogen Ireland, Ltd.

Bray Business Park, Bray
Co. Wicklow
A98YV29, Ireland



Neogen Corporation

620 Leshar Place Lansing, MI 48912 USA
www.neogen.com

Neogen is a trademark of Neogen Corporation.

© Neogen Corporation 2024.

All rights reserved.

FS00834A

Instrucțiuni despre produs

Burete uscat

Burete hidratat

DESCRIEREA PRODUSULUI

Burete uscat sau pre-hidratat și fără biocid, 3,8 x 7,6 cm (1,5 x 3 inchi), în pungă de plastic. Pre-hidratat cu agentul specificat. Cu sau fără mănuși.

Exclusiv pentru utilizare în laborator. Este disponibil un prospect cu date privind securitatea materialelor.

SIGURANȚA

Utilizatorul trebuie să citească, să înțeleagă și să respecte toate informațiile despre siguranță din aceste instrucțiuni. Păstrați instrucțiunile de siguranță pentru consultare ulterioară.

⚠️ AVERTISMENT Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea avea ca rezultat decesul sau rănirea gravă și/sau deteriorarea bunurilor.

AVIZ Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea avea ca rezultat deteriorarea bunurilor.

⚠️ AVERTISMENT

Pentru a reduce riscurile asociate cu contaminarea mediului:

- Respectați standardele actuale din domeniu și reglementările locale privind eliminarea deșeurilor contaminate.

Pentru a reduce riscurile asociate cu expunerea la pericole biologice:

- Eliminați mostrele la deșeurile în conformitate cu toate reglementările guvernamentale aplicabile și cu toate procedurile de laborator aplicabile.

Pentru a reduce riscul asociat cu rezultatele fals negative care au ca rezultat utilizarea de carcase sau suprafețe ambiante contaminate pentru alimente sau băuturi:

- Consultați întotdeauna eticheta produsului pentru instrucțiunile de păstrare și data de expirare.
- Consultați întotdeauna instrucțiunile de utilizare a produsului.

Pentru a reduce riscurile asociate cu expunerea la substanțe chimice și pericole biologice:

- Respectați întotdeauna bunele practici standard de laborator privind siguranța (GLP¹ sau ISO 17025²), inclusiv procedurile adecvate pentru păstrarea în siguranță a materialelor periculoase, purtarea de echipamente și dispozitive de protecție adecvate atunci când manipulați materiale de testare și mostre pentru testare.

AVIZ

Pentru a reduce riscul asociat cu rezultatele fals pozitive care se datorează carcaselor sau suprafețelor ambiante contaminate pentru alimente sau băuturi și care pot avea ca rezultat re-testarea sau respingerea alimentelor sau băuturilor:

- Nu atingeți buretele de nicio suprafață pe care nu intenționați să o utilizați.
- Nu atingeți interiorul pungii pentru burete.

Pentru a reduce riscul de contaminare încrucișată ca urmare a reutilizării dispozitivului de manipulare a mostrelor:

- Nu utilizați un burete decât o singură dată.

RESPONSABILITATEA UTILIZATORULUI

Utilizatorii au responsabilitatea de a se familiariza cu instrucțiunile despre produs și cu informațiile despre produs. Vizitați site-ul nostru web la adresa www.neogen.com sau contactați reprezentantul sau distribuitorul dumneavoastră local Neogen pentru mai multe informații.

În momentul selectării unei metode de testare, este important să rețineți faptul că factorii externi, cum ar fi metodele de prelevare a mostrelor, protocoalele de testare, prepararea și manipularea mostrelor, precum și tehnicile de laborator, pot influența rezultatele testelor.

Este responsabilitatea utilizatorului să selecteze orice metodă de testare sau produs în vederea evaluării unui număr suficient de mostre, cu matricele corespunzătoare și condițiile microbiene adecvate, astfel încât metoda de testare aleasă să corespundă criteriilor sale.

Este, de asemenea, responsabilitatea utilizatorului să se asigure că toate metodele de testare și rezultatele acestora satisfac cerințele clienților și ale furnizorilor săi.

Ca în cazul oricărei metode de testare, rezultatele obținute în urma utilizării oricărui produs Neogen Food Safety (Siguranța alimentară) nu constituie o garanție a calității matricelor sau proceselor supuse testării.

LIMITAREA GARANȚIEI/DESPĂGUBIRE LIMITATĂ

CU EXCEPȚIA CELOR MENȚIONATE ÎN MOD EXPRES ÎN SECȚIUNEA PRIVIND GARANȚIA LIMITATĂ A AMBALAJELOR PRODUSELOR INDIVIDUALE, NEOGEN NU RECUNOAȘTE NICIO GARANȚIE EXPRESĂ ȘI IMPLICITĂ, INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, ORICE GARANȚII DE VANDABILITATE SAU DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Dacă orice produs Neogen Food Safety este defect, Neogen sau distribuitorul său autorizat, la alegerea sa, va înlocui produsul sau va rambursa prețul de achiziție al produsului. Acestea sunt singurele măsuri ce se vor lua. Dacă aveți întrebări suplimentare, contactați reprezentantul Neogen local sau distribuitorul autorizat Neogen.



LIMITAREA RĂSPUNDERII NEOGEN

NEOGEN NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERI SAU DAUNE, INDIFERENT DACĂ ACESTEA SUNT DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, ACCIDENTALE SAU REZULTATE PE CALE DE CONSECINȚĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, PIERDERI DE PROFIT. În niciun caz răspunderea Neogen nu va depăși, sub nicio ipoteză legală, prețul de achiziție al produsului bănuț a fi defect.

PĂSTRAREA ȘI ELIMINAREA LA DEȘEURI

Păstrarea: Consultați eticheta ambalajului pentru informații privind păstrarea.

Eliminarea la deșeur: Respectați standardele actuale din domeniu și reglementările locale privind eliminarea deșeurilor contaminate. Consultați prospectul cu date privind securitatea materialelor pentru informații suplimentare.

Descrierea PRODUSULUI	Volu	REF	Volu	Mănuși
Neogen® Burete uscat	0 ml	BP133ES	0,9l (30 uncii)	0
Neogen® Burete uscat cu mănușă	0 ml	BP237SPG	0,9l (30 uncii)	1
Neogen® Burete hidratat cu bulion cu apă peptonată tamponată	10 ml	HS10BPW	0,9l (30 uncii)	0
Neogen® Burete hidratat cu bulion cu apă peptonată tamponată, 2 mănuși	10 ml	HS10BPW2G	0,9l (30 uncii)	2
Neogen® Burete hidratat cu substanță tampon neutralizantă D/E, 2 mănuși	10 ml	HS10DE2G	0,9l (30 uncii)	2
Neogen® Burete hidratat cu bulion Lethen	10 ml	HS10LET	0,9l (30 uncii)	0
Neogen® Burete hidratat cu bulion Lethen, 2 mănuși	10 ml	HS10LET2G	0,9l (30 uncii)	2
Neogen® Burete hidratat cu substanță tampon neutralizantă	10 ml	HS10NB	0,9l (30 uncii)	0
Neogen® Burete hidratat cu substanță tampon neutralizantă, 2 mănuși	10 ml	HS10NB2G	0,9l (30 uncii)	2

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Agitați buretele către capătul pungii.
2. Deschideți punga prin rupere.
NOTĂ: La buretele uscat adăugați diluant steril sau bulion steril.
3. Împingeți buretele pentru a ieși parțial din pungă.
4. Îndoiiți firele albastre pentru a forma punga deschisă.
5. Folosiți mănuși sterile.
6. Scoateți buretele printr-o tehnică aseptice.
7. Treceți buretele printr-o tehnică aseptice peste întreaga suprafață de prelevare de mostre^{3,4,5,6}.
8. Întoarceți buretele. Schimbați direcția cu 90°. Treceți buretele printr-o tehnică aseptice peste aceeași suprafață de prelevare de mostre.
9. Puneți buretele printr-o tehnică aseptice înapoi în pungă.
10. Plișiți punga pentru închidere.
11. Plișiți capetele firelor albastre către interior.
12. Respectând procedurile stabilite ale utilizatorului, îndepărtați de pe suprafața de pe care s-au prelevat mostrele orice reziduu rămas de bulion de îmbogățire sau de soluție neutralizantă.












REFERINȚE

1. U.S. Food and Drug Administration. Code of Federal Regulations, Title 21, Part 58. Good Laboratory Practice for Nonclinical Laboratory Studies. (Administrația pentru Alimentație și Medicamente a Statelor Unite, Codul Reglementărilor Federale, Titlul 21, Partea 58, Bunele practici de laborator pentru studiile de laborator non-clinice.)
2. ISO/IEC 17025. Cerințe generale privind competența laboratoarelor de testare și calibrare.
3. American Public Health Association - Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods (Asociația Americană pentru Sănătate Publică - Compendiu de metode pentru examinarea microbiologică a alimentelor) - cap. 3: Microbiological Monitoring of the Food Processing Environment (Monitorizarea microbiologică a mediului de procesare a alimentelor), ediția a 4-a.
4. US Food and Drug Administration - Bacteriological Analytical Method (Administrația pentru Alimentație și Medicamente a Statelor Unite - Metode analitice bacteriologice) (document disponibil online la adresa <https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/bacteriological-analytical-manual-bam>).
5. United States Department of Agriculture - Microbiological Lab Guidebook (Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite - Ghid pentru laboratoarele de microbiologie) - cap. 4.04, 5.04 și 8.07.
6. American Public Health Association - Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods (Asociația Americană pentru Sănătate Publică - Compendiu de metode pentru examinarea microbiologică a alimentelor) - cap. 13: Microbiological Tests for Equipment, Containers, Water, and Air (Teste microbiologice pentru echipamente, containere, apă și aer), ediția a 17-a.

Consultați versiunea curentă a metodelor standard menționate mai sus.

EXPLICAREA SIMBOLURILOR

info.neogen.com/symbols

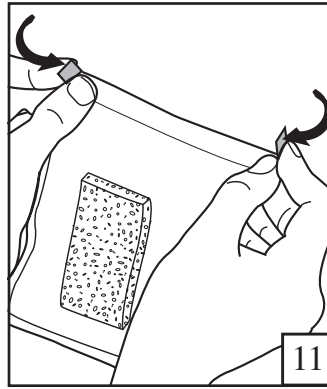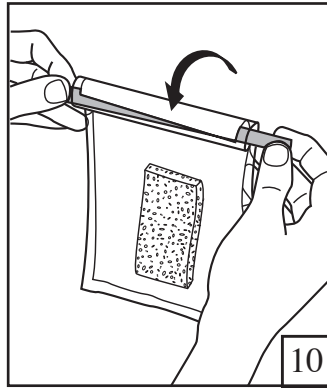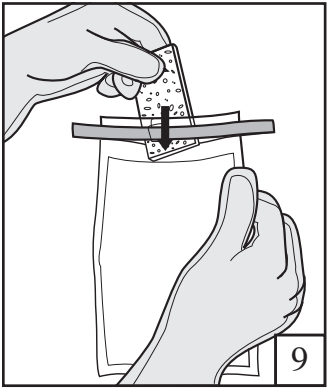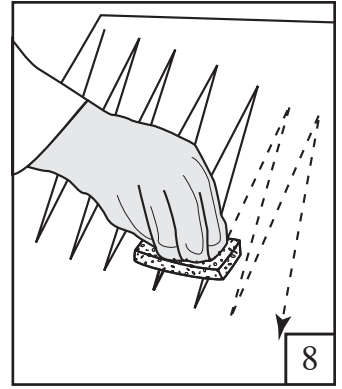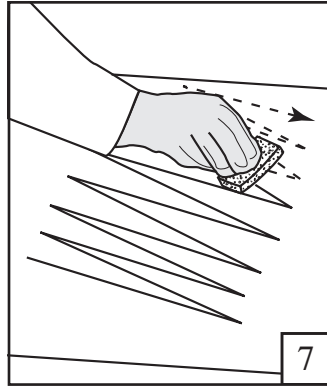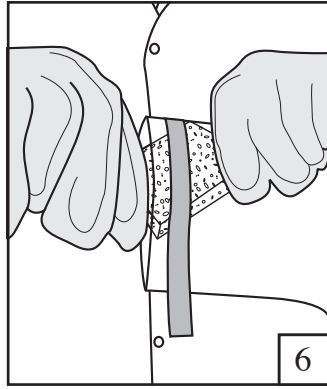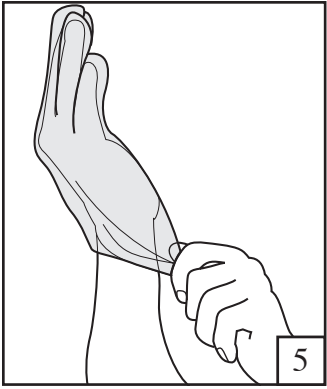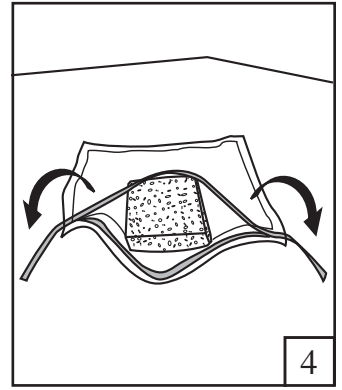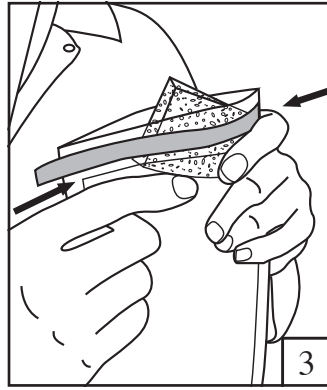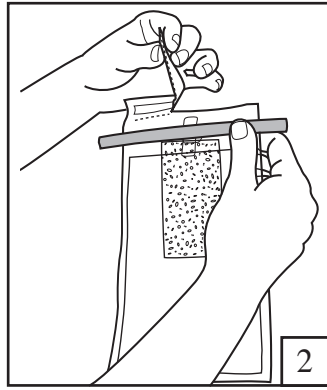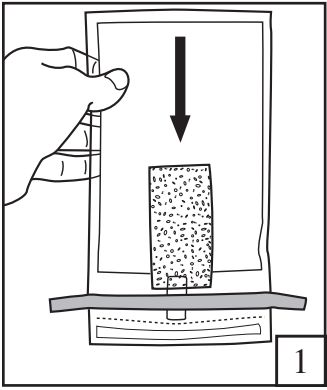

Neogen Food Safety

Neogen Corporation

620 Leshar Place
Lansing, MI 48912 USA
neogen.com

Neogen Europe Ltd.

The Dairy School
Auchincruive
Ayr, KA6 5HU
Scotland, UK

Neogen Ireland, Ltd.

Bray Business Park, Bray
Co. Wicklow
A98YV29, Ireland



Neogen Corporation

620 Leshar Place Lansing, MI 48912 USA
www.neogen.com

Neogen is a trademark of Neogen Corporation.

© Neogen Corporation 2024.

All rights reserved.

FS00834A

Инструкции по применению

Губка сухая для отбора проб Губка увлажненная

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Сухая или предварительно увлажненная и не содержащая биоцидов губка размером 3,8 x 7,6 см (1,5 x 3 дюйма) в пакете для проб. Предварительно увлажнена указанным веществом. С перчатками или без.

Только для использования в лабораторных условиях. Есть паспорт безопасности материалов.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите и следуйте всем указаниям по технике безопасности, приведенным в инструкциях. Сохраните инструкции по технике безопасности для дальнейшего использования.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Указывает на опасную ситуацию, которая может привести к смерти или серьезной травме и/или повреждению имущества.

ПРИМЕЧАНИЕ Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к повреждению имущества.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для снижения риска загрязнения окружающей среды придерживайтесь нижеперечисленных рекомендаций.

- Соблюдайте текущие стандарты в отрасли и местные нормы по утилизации загрязненных отходов.

Для снижения рисков, связанных с воздействием биологически опасных веществ, придерживайтесь нижеперечисленных рекомендаций.

- Утилизируйте пробы в соответствии со всеми применимыми нормативными актами и лабораторными процедурами.

Для снижения рисков, связанных с использованием зараженных туш или поверхностей для производства продуктов питания или напитков вследствие ложноотрицательных результатов, придерживайтесь нижеперечисленных рекомендаций.

- Всегда см. инструкции по хранению и срок годности на упаковке.
- Всегда см. инструкции по применению.

Для снижения рисков, связанных с воздействием химических и биологически опасных веществ, придерживайтесь нижеперечисленных рекомендаций.

- Всегда соблюдайте стандартные надлежащие меры безопасности в лаборатории (GLP¹ или ISO 17025²), в том числе надлежащие процедуры локализации, а также надевайте подходящую защитную одежду во время обращения с тестовыми материалами и пробами.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для снижения риска ложноположительных результатов вследствие перекрестного загрязнения туш или поверхностей для производства продуктов питания или напитков, которые могут привести к повторному тестированию или отбраковке продукта питания или напитка, придерживайтесь нижеперечисленных рекомендаций.

- Не касайтесь губкой случайных поверхностей.
- Избегайте манипуляций внутри пакета с губкой.

Для снижения риска перекрестного загрязнения вследствие повторного использования средства отбора проб придерживайтесь нижеперечисленных рекомендаций.

- Не используйте одну губку более одного раза.

ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пользователи несут полную ответственность за ознакомление с инструкцией по эксплуатации и информацией об оборудовании. Дополнительные сведения вы можете получить на нашем веб-сайте www.neogen.com или у местного представителя или дистрибьютора компании Neogen.

При выборе метода анализа важно понимать, что на результаты исследования могут повлиять внешние факторы, например метод отбора проб, протокол анализа, подготовка проб к анализу, способы обработки проб, а также используемое оборудование.

За выбор метода анализа и исследуемого продукта отвечает потребитель. Потребитель должен на основании исследования достаточного количества образцов с помощью надлежащих матриц и микробных провокационных проб определить, отвечает ли выбранный метод анализа необходимым ему критериям.

Кроме того, потребитель обязан установить, отвечают ли методы и результаты проводимых им анализов требованиям его клиентов и поставщиков.

Результаты, полученные с помощью какого бы то ни было средства компании Neogen Food Safety (как и при использовании любого другого метода исследований), не гарантируют качество анализируемых матриц или технологических процессов.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИЙ И СРЕДСТВ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ

ЕСЛИ ИНОЕ ЯВНО НЕ УКАЗАНО В РАЗДЕЛЕ ОБ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ НА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, КОМПАНИЯ NEOGEN НЕ ПРИЗНАЕТ ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИЮ ТОВАРНЫХ КАЧЕСТВ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ. Если качество



продукта отдела безопасности пищевой продукции компании Neogen не является надлежащим, компания Neogen или уполномоченный этой компанией дистрибьютор обязуется по своему усмотрению заменить этот продукт или возместить стоимость покупки этого продукта. Это единственный способ разрешения конфликтов. По любым дополнительным вопросам обращайтесь к представителю или официальному дилеру Neogen.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ NEOGEN

КОМПАНИЯ NEOGEN НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ БЫ ТО НИ БЫЛО УЩЕРЬ ИЛИ УБЫТКИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРЯМЫМИ, КОСВЕННЫМИ, РЕАЛЬНЫМИ ИЛИ ПОБОЧНЫМИ, ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ. Ответственность компании Neogen ни при каких обстоятельствах и несмотря ни на какие требования какой бы то ни было правовой теории не может превышать покупную цену предположительно дефектного продукта.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение. См. информацию о хранении на упаковке.

Утилизация. Соблюдайте текущие стандарты в отрасли и местные нормы по утилизации загрязненных отходов. Дополнительную информацию см. в паспорте безопасности материала.

Описание ПРОДУКТА	Объем	АРТ	Объем пакета	Перчатки
Neogen® Губка сухая для отбора проб	0 мл	BP133ES	0,9 л (30 унций)	0
Neogen® Губка сухая для отбора проб с перчаткой	0 мл	BP237SPG	0,9 л (30 унций)	1
Neogen® Губка увлажненная в буфелированном пептонном бульоне	10 мл	HS10BPW	0,9 л (30 унций)	0
Neogen® Губка увлажненная в буфелированном пептонном бульоне, 2 перчатки	10 мл	HS10BPW2G	0,9 л (30 унций)	2
Neogen® Губка увлажненная с нейтрализующим буфером Ди-Ингли, 2 перчатки	10 мл	HS10DE2G	0,9 л (30 унций)	2
Neogen® Губка увлажненная в легиновом бульоне	10 мл	HS10LET	0,9 л (30 унций)	0
Neogen® Губка увлажненная в легиновом бульоне, 2 перчатки	10 мл	HS10LET2G	0,9 л (30 унций)	2
Neogen® Губка увлажненная с нейтрализующим буфером	10 мл	HS10NB	0,9 л (30 унций)	0
Neogen® Губка увлажненная с нейтрализующим буфером, 2 перчатки	10 мл	HS10NB2G	0,9 л (30 унций)	2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Встряхните пакет, чтобы губка оказалась на дне.
2. Раскройте пакет.
ПРИМЕЧАНИЕ. Добавьте стерильный растворитель или бульон на сухую губку.
3. Вытолкните губку так, чтобы она выступала из пакета.
4. Согните синие проволочные элементы, чтобы придать пакету открытую форму.
5. Наденьте стерильные перчатки.
6. Соблюдая правила асептики, извлеките губку.
7. Соблюдая правила асептики, проведите по всей поверхности отбора пробы^{3,4,5,6}.
8. Переверните губку. Измените направление на 90°. Соблюдая правила асептики, проведите по той же поверхности отбора пробы.
9. Соблюдая правила асептики, поместите губку в пакет.
10. Сверните пакет, чтобы закрыть его.
11. Загните концы синих проволочных элементов внутрь.
12. Следуя установленным пользователем процедурам, удалите все остатки бульона обогащения или нейтрализующего раствора с поверхности отбора пробы.












ССЫЛКИ

1. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США. Свод федеральных нормативных актов, раздел 21, часть 58. Надлежащие лабораторные практики неклинических лабораторных исследований.
2. ISO/IEC 17025. Общие требования по подготовке испытательных и калибровочных лабораторий.
3. Американская государственная ассоциация здравоохранения. Сборник методов микробиологического изучения пищевых продуктов. Глава 3: «Микробиологический мониторинг мест обработки продуктов»; 4-е издание.
4. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США. Бактериологический аналитический метод (доступен в Интернете по адресу <https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/bacteriological-analytical-manual-bam>).
5. Министерство сельского хозяйства США. Лабораторное руководство по микробиологии. Главы 4.04, 5.04 и 8.07.
6. Американская государственная ассоциация здравоохранения. Стандартные методы изучения молочных продуктов. Глава 13: «Микробиологические тесты для обораживания, емкостей, воды и воздуха»; 17-е издание.

См. текущие версии перечисленных выше стандартных методов.

ПОЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ

info.neogen.com/symbols

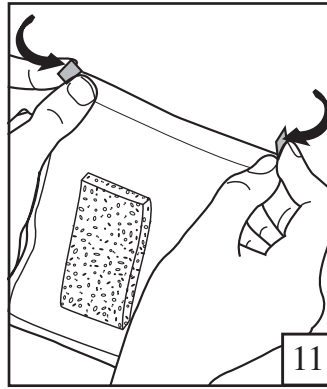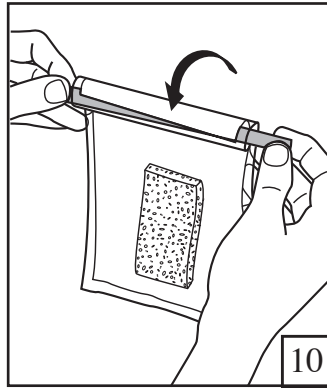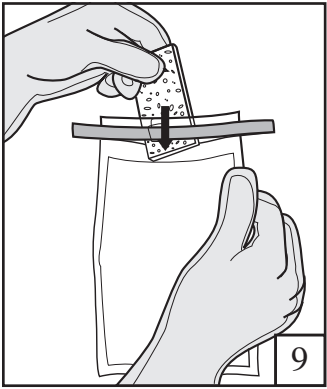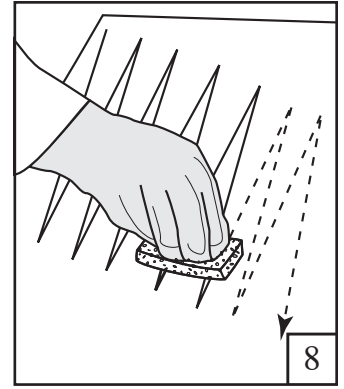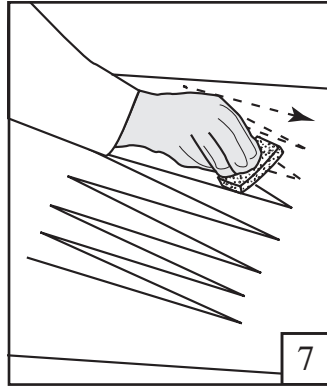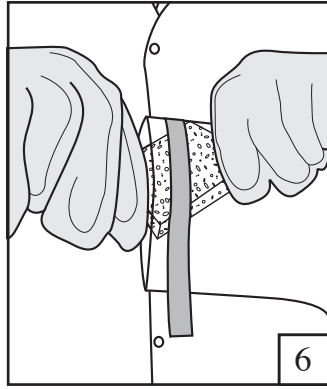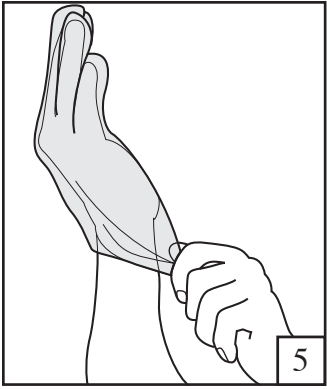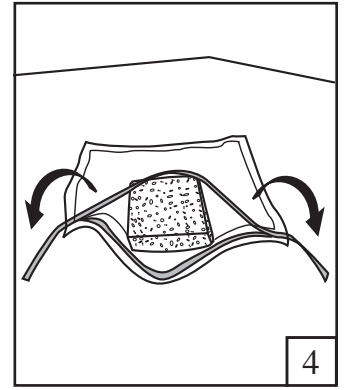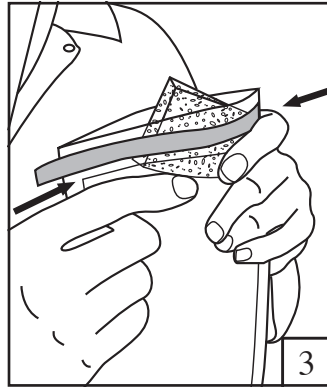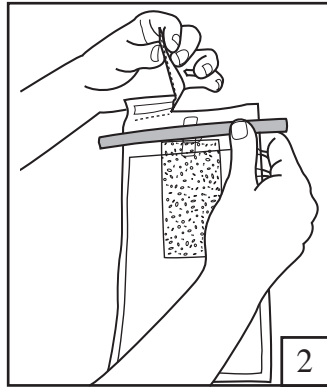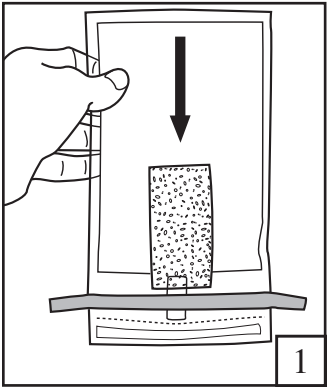

Neogen Food Safety

Neogen Corporation

620 Leshar Place
Lansing, MI 48912 USA
neogen.com

Neogen Europe Ltd.

The Dairy School
Auchincruive
Ayr, KA6 5HU
Scotland, UK

Neogen Ireland, Ltd.

Bray Business Park, Bray
Co. Wicklow
A98YV29, Ireland



Neogen Corporation

620 Leshar Place Lansing, MI 48912 USA
www.neogen.com

Neogen is a trademark of Neogen Corporation.

© Neogen Corporation 2024.

All rights reserved.

FS00834A

Ürün Talimatları

Dry-Sponge

Hidrate-Sünger

ÜRÜN TANIMI

Numune torbası içinde Kuru veya Önceden Hidrate ve biyositsiz 3,8 x 7,6 cm (1,5 x 3 inç) sünger. Belirli bir ajanla önceden hidrate edilmiş. Eldivenli veya eldivensiz.

Yalnızca Laboratuvarda Kullanım İçindir. Malzeme Güvenliği Veri Sayfası mevcuttur.

GÜVENLİK

Kullanıcı, yönergelerdeki tüm güvenlik bilgilerini okumalı, anlamalı ve takip etmelidir. İleride başvurmak üzere güvenlik talimatlarını saklayın.



UYARI Önlenmemesi halinde, ölüm veya ciddi yaralanma ve/veya mal zararı ile sonuçlanabilen tehlikeli bir durumu gösterir.

NOT Önlenmemesi halinde, mal zararı ile sonuçlanabilen tehlikeli bir durumu gösterir.

UYARI

Çevre kontaminasyonu ile ilişkili riskleri azaltmak için:

- Kontamine atığın atılmasına yönelik güncel endüstri standartlarına ve yerel yönetmeliklere uyun.

Biyolojik tehlikelere maruz kalınmasıyla ilişkili riskleri azaltmak için:

- Numuneleri geçerli tüm hükümet düzenlemeleri ve uygun laboratuvar prosedürlerine göre atın.

Yiyecek ve içecek ürünleri için kontamine kalıntı veya çevresel yüzeylerin kullanımına yol açan yanlış negatif sonuçlarla ilişkili riski azaltmak için:

- Saklama talimatı ve son kullanma tarihi için daima ambalaj etiketine bakın.
- Daima ürün kullanım talimatına bakın.

Kimyasallara ve biyolojik tehlikelere maruziyet ile ilişkili riskleri azaltmak için:

- Test malzemelerini ve test numunelerini kullanırken uygun sınırlama prosedürleri, uygun koruyucu kıyafet giyme dahil, standart iyi laboratuvar güvenlik uygulamalarına (GLP¹ veya ISO 17025²) daima uyun.

NOT

Yiyecek ve içecek ürünlerinin yeniden test edilmesi veya reddedilmesiyle sonuçlanabilen yiyecek ve içecek ürünleri için çapraz kontamine kalıntı veya çevresel yüzeylere bağlı yanlış pozitif sonuçlarla ilişkili riski azaltmak için:

- Süngeri istenmeyen yüzeylere temas ettirmeyin.
- Sünger torbasının içine elinizi sokmayın.

Numune işleme cihazının yeniden kullanımından kaynaklanan çapraz kontaminasyon riskini azaltmak için:

- Aynı süngeri bir defadan fazla kullanmayın.

KULLANICININ SORUMLULUĞU

Kullanıcılar ürün yönergeleri ve bilgileri hakkında bilgi edinmekle yükümlüdür. Daha fazla bilgi için www.neogen.com adresini ziyaret edin veya yerel Neogen temsilcinizle ya da distribütörünüzle iletişime geçin.

Test yöntemi seçilirken, numune alma yöntemleri, test protokolleri, numunenin hazırlanması, işlem yapılması ve laboratuvar tekniği gibi dış faktörlerin sonuçları etkileyebileceğinin bilinmesi gerekir.

Seçilen test yönteminin kullanıcının kriterlerini karşıladığı konusunda kullanıcıyı tatmin edecek uygun matrisler ve mikrobiyal zorluklarla yeterli sayıda numuneyi değerlendirmek üzere herhangi bir test yönteminin veya ürününün seçilmesi kullanıcının sorumluluğundadır.

Tüm test yöntemleri ve sonuçlarının müşterilerin ve tedarikçilerin gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığına karar vermek yine kullanıcının sorumluluğundadır.

Tüm test yöntemlerinde olduğu gibi, herhangi bir Neogen Gıda Güvenliği ürününün kullanılmasıyla elde edilen sonuçlar, test edilen matrislerin veya süreçlerin kalitesi konusunda bir garanti oluşturmaz.

GARANTİLERİN SINIRLANDIRILMASI/SINIRLI ÇÖZÜM

NEOGEN, HER BİR ÜRÜN AMBALAJININ ÜZERİNDEKİ SINIRLI GARANTİ KISMINDA AÇIKÇA BELİRTİLENLER HARİCİNDE, PAZARLANABİLİRLİK VEYA BELİRLİ BİR KULLANIMA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HİÇBİR AÇIK VEYA ZİMNİ GARANTİYİ KABUL ETMEMEKTEDİR. Herhangi bir Neogen Gıda Güvenlik Ürünü'nün kusurlu olması durumunda, Neogen veya yetkili dağıtıcısı, tercihe göre ürünü değiştirecek veya ürün satış tutarını iade edecektir. Tarafınıza münhasır çözümler bunlardır. Diğer her türlü sorunuz için lütfen Neogen temsilciniz veya yetkili Neogen distribütörünüz ile iletişim kurun.



(Türkçe)



NEOGEN SINIRLI SORUMLULUĐU

NEOGEN DOĐRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ VEYA NETİCE KABİLİNDEN DOĐMUŐ, KAYBEDİLMİŐ KAZANÇLAR DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR KAYIP VEYA ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. Hiçbir durumda Neogen'in herhangi bir hukuk kuramı altındaki sorumluluđu, kusurlu olduđu iddia edilen ürünün satış fiyatını aşamaz.

SAKLAMA VE ATMA

Saklama: Saklama bilgisi için ambalaj etiketine başvurun.

Atma: Kontamine atığın atılmasına yönelik güncel endüstri standartlarına ve yerel yönetmeliklere uyun. Ek bilgiler için Malzeme Güvenliđi Veri Sayfasına başvurun.

ÜRÜN Tanımı	Hacim	REF	Torba Hacmi	Eldivenler
Neogen® Dry-Sponge	0 mL	BP133ES	0,9 L (30 ons)	0
Neogen® Eldivenli Dry-Sponge	0 mL	BP237SPG	0,9 L (30 ons)	1
Neogen® Hidrate-Sünger Tamponlanmış Pepton Su Besiyeriyle birlikte	10 mL	HS10BPW	0,9 L (30 ons)	0
Neogen® Hidrate-Sünger Tamponlanmış Pepton Su Besiyeriyle birlikte, 2 Eldivenli	10 mL	HS10BPW2G	0,9 L (30 ons)	2
Neogen® Hidrate-Sünger D/E Nötrale Edici Tamponla birlikte, 2 Eldivenli	10 mL	HS10DE2G	0,9 L (30 ons)	2
Neogen® Hidrate-Sünger Letheen Besiyeriyle birlikte	10 mL	HS10LET	0,9 L (30 ons)	0
Neogen® Hidrate-Sünger Letheen Besiyeriyle birlikte, 2 Eldivenli	10 mL	HS10LET2G	0,9 L (30 ons)	2
Neogen® Hidrate-Sünger Nötrale Edici Tamponla birlikte	10 mL	HS10NB	0,9 L (30 ons)	0
Neogen® Hidrate-Sünger Nötrale Edici Tamponla birlikte, 2 Eldivenli	10 mL	HS10NB2G	0,9 L (30 ons)	2

KULLANIM TALİMATLARI

- Sünger torbanın sonuna gelinceye kadar torbayı sallayın.
- Açmak için torbayı yırtın.
NOT: Kuru süngere steril seyreltici veya besiyeri ekleyin.
- Süngeri torbadan çıkacak şekilde itin.
- Torbayı açık şekilde tutmak için mavi telleri бүkүн.
- Steril eldiven giyin.
- Süngeri aseptik olarak çıkarın.
- Tüm numune yüzeyi boyunca aseptik olarak sürün^{3,4,5,6}.
- Süngeri çevirin. 90° yön deđiştirin. Aynı numune alma yüzeyine aseptik olarak sürün.
- Süngeri aseptik olarak torbanın içine yerleştirin.
- Kapatmak için torbayı kıvrın.
- Mavi tellerin ucunu içe dođru katlayın.
- Kullanıcının belirlediđi prosedürleri izleyerek, kalan tüm zenginleştirme besiyerini veya nötrale edici çözelti artığını numune alınan yüzeyden uzaklaştırın.












REFERANSLAR

- U.S. Food and Drug Administration. Code of Federal Regulations, Title 21, Part 58. Good Laboratory Practice for Nonclinical Laboratory Studies.
- ISO/IEC 17025. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.
- American Public Health Association - Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - Chapter 3: Microbiological Monitoring of the Food Processing Environment, 4th edition.
- US Food and Drug Administration - Bacteriological Analytical Method (available online at <https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/bacteriological-analytical-manual-bam>).
- United States Department of Agriculture - Microbiological Lab Guidebook - Chapters 4.04, 5.04, and 8.07.
- American Public Health Association - Standard Methods for the Examination of Dairy Products - Chapter 13: Microbiological Tests for Equipment, Containers, Water, and Air, 17th edition.

Yukarıda listelenen standart yöntemlerin güncel versiyonlarına başvurun.

SİMGELERİN AÇIKLAMASI

info.neogen.com/symbols

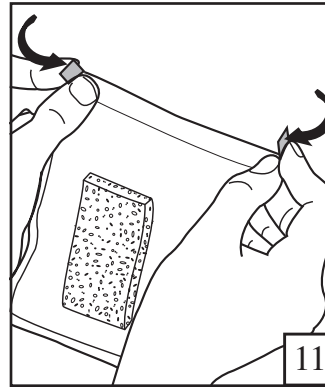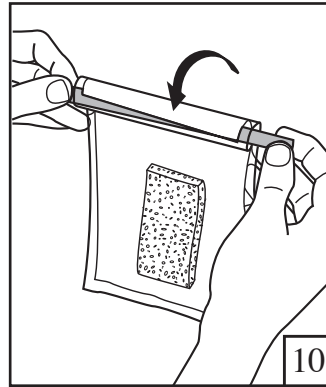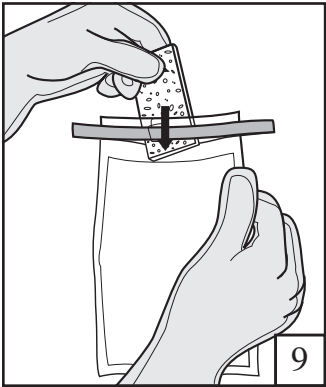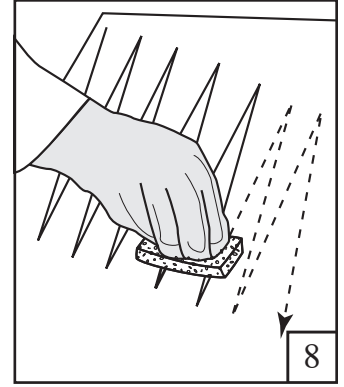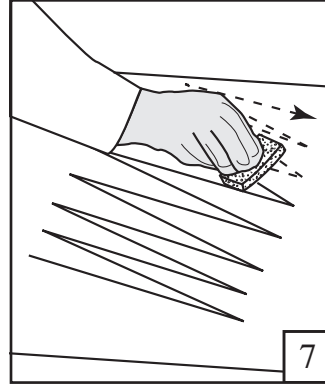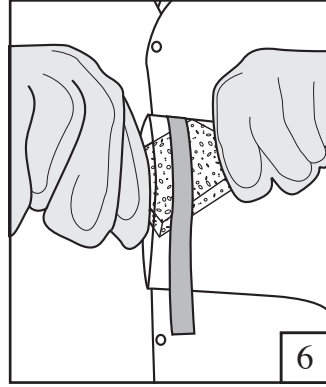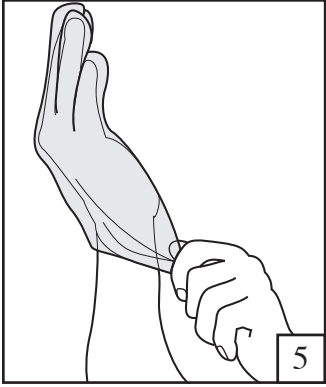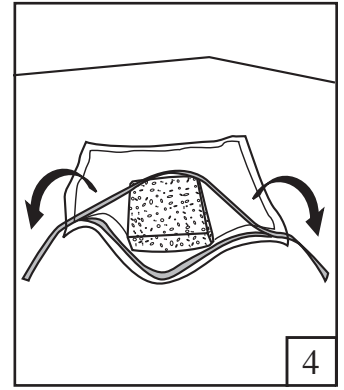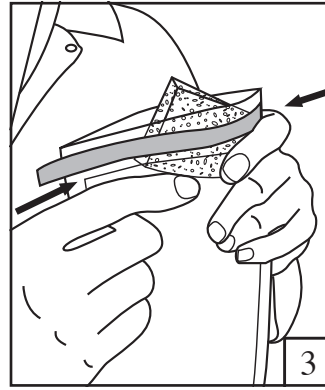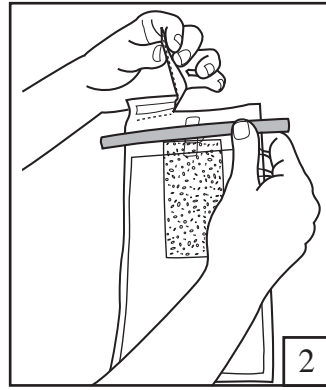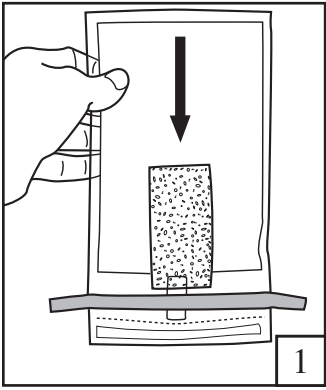

Neogen Food Safety

Neogen Corporation

620 Leshar Place
Lansing, MI 48912 USA
neogen.com

Neogen Europe Ltd.

The Dairy School
Auchincruive
Ayr, KA6 5HU
Scotland, UK

Neogen Ireland, Ltd.

Bray Business Park, Bray
Co. Wicklow
A98YV29, Ireland



Neogen Corporation

620 Leshar Place Lansing, MI 48912 USA
www.neogen.com

Neogen is a trademark of Neogen Corporation.

© Neogen Corporation 2024.

All rights reserved.

FS00834A

ドライスポンジ

ハイドラ - スポンジ

製品説明

ドライタイプまたは前水和処理タイプ、バイオサイドフリー 3.8 x 7.6 cm (1.5 x 3 in.)スポンジはサンプルバッグ入り。特定試験で前水和処理済み。手袋付き／手袋なし。

研究／試験専用です。MSDS（製品安全シート）をご利用いただけます。

安全性

お客様は、説明書に記載のすべての安全情報を読み、理解し、遵守する必要があります。またこれらの情報は大切に保管してください。

警告 回避できない場合、死亡または重篤な傷害や、物的損害が発生する可能性のある危険な状況を示します。

注記 回避できない場合、物的損害が起こり得る危険な状況を示します。

警告

環境汚染に伴う危険を回避するために：

- 汚染廃棄物は、現行の産業基準または地域の規制に従って廃棄してください。

化学物質の曝露に伴う危険を回避するために：

- サンプルは、適用される政府規制および検査施設の手順に従って処分してください。

食品、飲料用に汚染された物体や環境表面を使用することにつながる偽陰性の判定に伴う危険を回避するために：

- 保管方法と使用期限については必ずパッケージラベルを参照してください。
- 使用については製品情報を必ず参照してください。

化学物質およびバイオハザードへの曝露に伴う危険を回避するために：

- 試験材料およびサンプルの取り扱いには、正しい封じ込め手順、適切な防護服の着用を含めて、必ず標準的な GLP（Good Laboratory Practice¹またはISO 17025²）を遵守してください。

注記

食品や飲料の再検査や廃棄につながる食品、飲料用に交差汚染された物体や環境表面による偽陽性のリスクを回避するために：

- スポンジで想定外の表面に触れないでください。
- スポンジバッグに手を入れしないでください。

サンプル取り扱い器具の再利用による交差汚染の危険を回避するために：

- 同じスポンジを繰り返し使用しないでください。

お客様のご責任

お客様には、使用前に添付文書および製品情報を熟読し、情報に精通する責任があります。詳細につきましては、当社ウェブサイト www.neogen.com をご覧いただくか、お近くのNeogenの代理店または販売店までお問い合わせください。

試験方法を選択する際には、サンプル採取方法、テストプロトコル、サンプルの準備、取り扱い、および検査手技などの外的要因が結果に影響することを認識することが重要です。

お客様の基準を満たすように、適切なマトリックスおよび微生物チャレンジを用いた十分な数の検体を評価するための検査方法または製品を選択することは、お客様の責任となります。

また、その検査方法および結果が顧客あるいは供給業者の要求を満たしているかについても、お客様の判断となります。

どの検査方法を使用した場合でも、Neogen食品衛生管理製品を使用して得られた結果により、試験で使用したマトリックスまたはプロセスの品質を保証するものではありません。

保証の限定／限定的救済手段

個々の製品パッケージの限定保証条項に明示されている場合を除き、NEOGENは明示または黙示を問わず、商品性または特定の目的への適合性に関する保証を含むがこれに限定されない、あらゆる種類の保証も負いかねます。Neogen食品衛生部門の製品に欠陥があった場合、Neogenまたは取扱販売店で交換あるいは返品処理をいたします。対応は上記のみとさせていただきます。ご不明な点がございましたら、Neogenの担当者またはNeogenの正規卸売業者にお問い合わせください。

NEOGENの保証責任範囲

NEOGENは、直接的・間接的、特殊、偶発的または必然的を問わず、利益損失を含むがこれに限定されないあらゆる損失に対しての責任を放棄します。いかなる場合においても、あらゆる法的理論に対しても、Neogenの保証責任範囲は、欠陥と認められた製品の購入金額を超えることはありません。

保管と廃棄

保管： 保管情報についてはパッケージラベルを参照してください。

廃棄方法： 汚染廃棄物は、現行の産業基準または地域の規制に従って廃棄してください。その他の詳細については、MSDS（製品安全シート）をご覧ください。

製品説明	容量	参考	バッグの容量	手袋
Neogen® ドライスポンジ	0 mL	BP133ES	0.9 L (30 oz.)	0
Neogen® ドライスポンジ（グローブ付き）	0 mL	BP237SPG	0.9 L (30 oz.)	1
Neogen® ハイドラ - スポンジバッファーププトン水ブロス入り	10 mL	HS10BPW	0.9 L (30 oz.)	0
Neogen® ハイドラ - スポンジバッファーププトン水ブロス入り 手袋2組付き	10 mL	HS10BPW2G	0.9 L (30 oz.)	2
Neogen® ハイドラ - スポンジ D/E ニュートライジングバッファ入り 手袋2組付き	10 mL	HS10DE2G	0.9 L (30 oz.)	2
Neogen® ハイドラ - スポンジ リージンブロス入り	10 mL	HS10LET	0.9 L (30 oz.)	0
Neogen® ハイドラ - スポンジ リージンブロス入り 手袋2組付き	10 mL	HS10LET2G	0.9 L (30 oz.)	2
Neogen® ハイドラ - スポンジ ニュートライジングバッファ入り	10 mL	HS10NB	0.9 L (30 oz.)	0
Neogen® ハイドラ - スポンジ ニュートライジングバッファ入り 手袋2組付き	10 mL	HS10NB2G	0.9 L (30 oz.)	2

使用方法

1. スポンジをバッグの底の部分で振ります。
2. バッグを切って開封します。
注：滅菌希釈剤またはブロスをドライスポンジに添加してください。
3. スポンジをバッグから押し出します。
4. 青色のワイヤを曲げてバッグの口を開いた状態に保ちます。
5. 滅菌手袋を着用します。
6. 無菌的にスポンジを取り出します。
7. 無菌的にサンプリング対象表面^{3,4,5,6}全体を拭き取ります。
8. スポンジを裏返します。90°向きを変えます。無菌的に同じサンプリング対象表面を拭き取ります。
9. 無菌的にスポンジをバッグに戻し入れます。
10. バッグの口を折って閉じます。
11. 青色のワイヤの先端を内側に曲げます。
12. 規定の手順に従って、残った増菌ブロスや中和液の残渣をすべてサンプリング対象表面から除去します。












参考文献

1. U.S. Food and Drug Administration. Code of Federal Regulations, Title 21, Part 58. Good Laboratory Practice for Nonclinical Laboratory Studies.
2. ISO/IEC 17025. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.
3. American Public Health Association - Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - Chapter 3: Microbiological Monitoring of the Food Processing Environment, 4th edition.
4. US Food and Drug Administration - Bacteriological Analytical Method（オンラインでアクセス可能：<https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/bacteriological-analytical-manual-bam>）。
5. United States Department of Agriculture - Microbiological Lab Guidebook - Chapters 4.04, 5.04, and 8.07.
6. American Public Health Association - Standard Methods for the Examination of Dairy Products - Chapter 13: Microbiological Tests for Equipment, Containers, Water, and Air, 17th edition.

上述の標準試験法については、現行の最新版を参照してください。

記号について

info.neogen.com/symbols

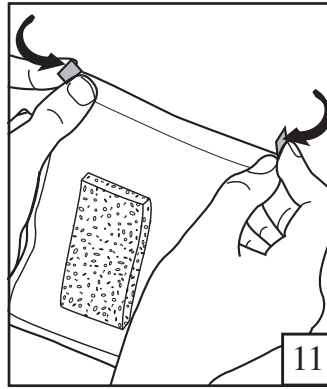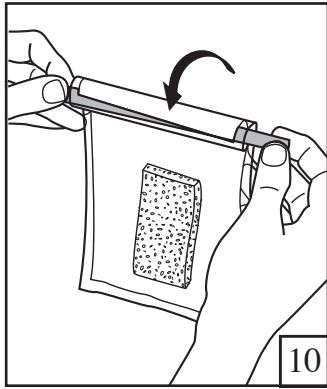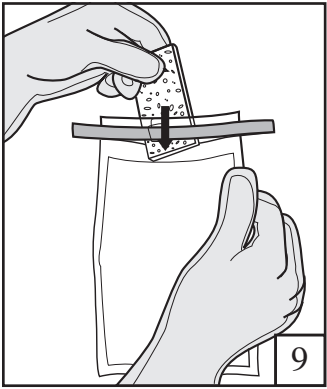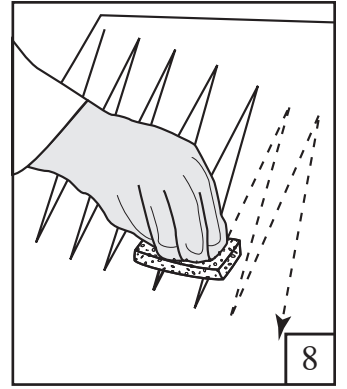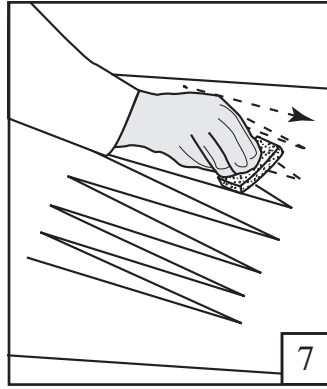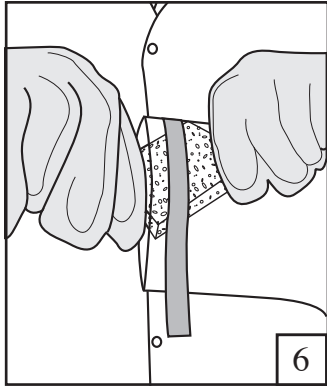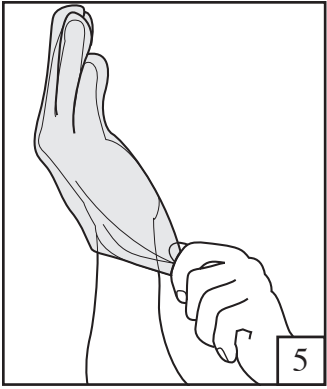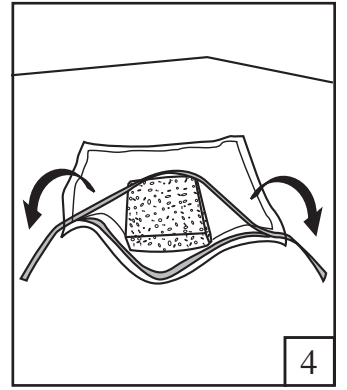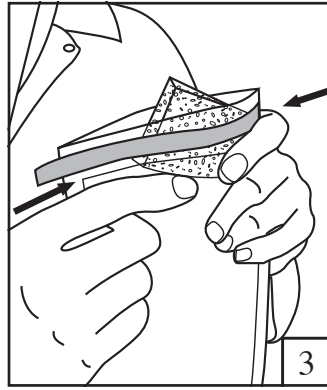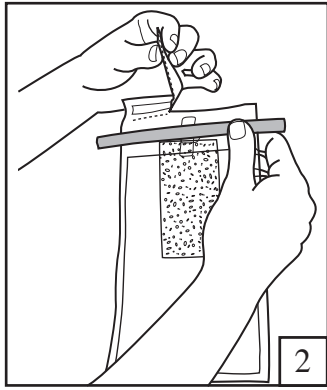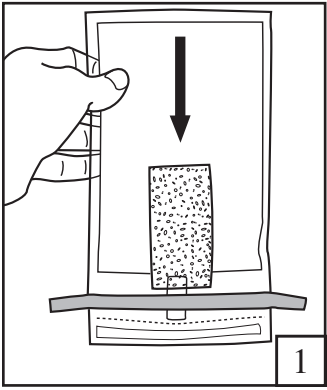

Neogen Food Safety

Neogen Corporation

620 Leshar Place
Lansing, MI 48912 USA
neogen.com

Neogen Europe Ltd.

The Dairy School
Auchincruive
Ayr, KA6 5HU
Scotland, UK

Neogen Ireland, Ltd.

Bray Business Park, Bray
Co. Wicklow
A98YV29, Ireland



Neogen Corporation

620 Leshar Place Lansing, MI 48912 USA
www.neogen.com

Neogen is a trademark of Neogen Corporation.

© Neogen Corporation 2024.

All rights reserved.

FS00834A

干海绵

涂抹海绵

产品说明

取样袋中的干海绵或预涂抹海绵及无菌海绵，规格 3.8 x 7.6 cm (1.5 x 3 in.)。含指定药剂的预涂抹海绵。附带手套或不附手套。

仅限实验室使用。有材料安全数据表可供参考。

安全

用户应该阅读、理解并遵守说明中的所有安全信息。保存好安全说明书，以备日后查阅。

警告 表示危险情况，如果不注意避免，可能造成死亡或严重的人身伤害和/或财产损失。

注意 表示潜在的危险情况，如果不注意避免，可能导致财产损失。

警告

为了降低与环境污染相关的风险，请注意以下事项：

- 遵守适用于处置受污染废物的当前行业标准和本地法规。

为了减少与生物危害暴露相关联的风险，请注意以下事项：

- 根据所有适用政府法规和适用实验室程序处置样品。

为了降低与假阴性结果关联的风险，避免使用受污染躯体或者食品或饮料产品的受污染环境表面，请注意以下事项：

- 欲知存储说明和有效期，请始终查阅包装标签。
- 有关用途信息，请始终查阅产品说明。

为了降低与化学品和生物危害暴露相关的风险，请注意以下事项：

- 始终遵守标准优良实验室安全规范（GLP¹ 或 ISO 17025²），包括正确的围堵程序，在处理测试材料和测试样品时穿戴适当的防护服。

注意

为了降低由于交叉污染躯体或者食品或饮料产品的环境表面而导致的假阴性结果相关联的风险，避免重新测试或者食品或饮料产品剔除，请注意以下事项：

- 切勿让海绵意外接触任何其他表面。
- 切勿伸进海绵袋中。

为了降低因重复使用样品处理设备而导致的交叉污染风险，请注意以下事项：

- 同一海绵仅限使用一次。

用户责任

用户负责熟悉产品说明和信息。请访问我们的网站 www.neogen.com 或联系您当地的 Neogen 代表或经销商，以了解更多信息。

选择检测方法时，务必认识到各种外部因素（如取样方法、检测方案、样品制备、处理和实验室技术）都可能会影响结果。

用户在选择检测方法或产品时，应自行负责选用合适的基质和微生物激发试验对足够多的样品进行评估，以确保所选择的检测方法符合用户的标准。

检测方法及其结果能否满足客户及供应商的要求也由用户负责。

同所有检测方法一样，使用任何 Neogen 食品安全产品得到的结果，并不保证受检样品或程序的质量。

保证限制/有限补救措施

除非各个产品包装的有限保证部分明确声明，NEOGEN 就所有明示或默示保证做出免责声明，包括但不限于适销性及适合某种特定用途的保证。如果证明任何 Neogen 食品安全产品存在缺陷，Neogen 或其授权经销商可以进行换货或者由其决定是否为该产品进行退款。这些都是专门针对您而设计的解决方案。如有任何疑问，请联系 Neogen 代表或 Neogen 授权经销商。

NEOGEN 责任限制

NEOGEN 不会对任何损失或损害负责，无论造成的损害是直接、间接、特殊、偶然或随后产生的，包括但不限于利润损失。根据法律理论，Neogen 对所谓存在缺陷的产品的赔付不可能超过产品的购买价格。



存储和弃置

存储环境： 请查阅包装标签，了解存储信息。

弃置： 遵守适用于处置受污染废物的当前行业标准和本地法规。请参阅材料安全数据表以了解其他信息。

产品说明	体积	参考编号	袋子容积	手套
Neogen® 干海绵	0 mL	BP133ES	0.9 L (30 oz.)	0
Neogen® 干海绵 (含手套)	0 mL	BP237SPG	0.9 L (30 oz.)	1
Neogen® 涂抹海绵 (含有 10mL 缓冲蛋白胨水)	10 mL	HS10BPW	0.9 L (30 oz.)	0
Neogen® 涂抹海绵 (含有 10mL 缓冲蛋白胨水, 附带 2 只无菌手套)	10 mL	HS10BPW2G	0.9 L (30 oz.)	2
Neogen® 涂抹海绵 (含有 10mL D/E 缓冲液, 附带 2 只手套)	10 mL	HS10DE2G	0.9 L (30 oz.)	2
Neogen® 涂抹海绵 (含有 10mL 李氏肉汤)	10 mL	HS10LET	0.9 L (30 oz.)	0
Neogen® 涂抹海绵 (含有 10mL 李氏肉汤, 附带 2 只无菌手套)	10 mL	HS10LET2G	0.9 L (30 oz.)	2
Neogen® 涂抹海绵 (含有 10mL 中和缓冲液)	10 mL	HS10NB	0.9 L (30 oz.)	0
Neogen® 涂抹海绵 (含有 10mL 中和缓冲液, 附带 2 只手套)	10 mL	HS10NB2G	0.9 L (30 oz.)	2

使用说明












1. 抖动海绵，将之甩到袋子底部。
2. 将袋子撕开。
注意：向干海绵添加无菌稀释剂或清夜。
3. 推动海绵，将之挤出袋子。
4. 拉弯蓝色丝带，使袋子打开。
5. 戴上无菌手套。
6. 在无菌条件下取出海绵。
7. 在无菌条件下涂抹整个取样表面^{3、4、5、6}。
8. 翻转海绵。方向变换 90°。在无菌条件下涂抹同一取样表面。
9. 在无菌条件下将海绵塞入袋中。
10. 折叠袋子，使之关闭。
11. 向内折叠蓝色丝带末端。
12. 按照用户建立的程序，从取样表面去除所有剩余的增菌肉汤或中和溶液残留物。

参考资料

1. 美国食品药品监督管理局。美国《联邦规章典集》(Code of Federal Regulations) 第 21 篇，第 58 部。非临床优良实验室研究规范。
 2. ISO/IEC 17025。用于检验和定标实验室能力的一般要求。
 3. 美国公共卫生协会 - 食品微生物检验方法纲要 - 第 3 章：《食品加工环境微生物监测》第 4 版。
 4. 美国食品药品监督管理局 - 细菌学分析方法（可在线获取：<https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/bacteriological-analytical-manual-bam>）。
 5. 美国农业部 - 微生物实验室指南 - 4.04 章、5.04 章和 8.07 章。
 6. 美国公共卫生协会 - 乳制品检验标准方法 - 第 13 章：《设备、容器、水和空气的微生物检测》第 17 版。
- 请参考以上所列标准方法的现行版本。

符号说明

info.neogen.com/symbols

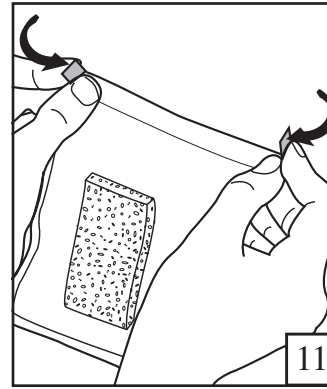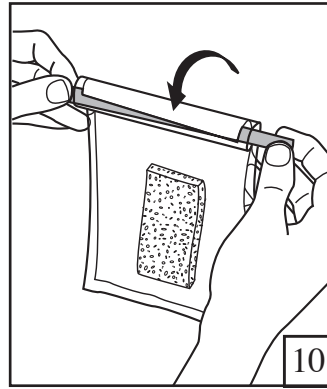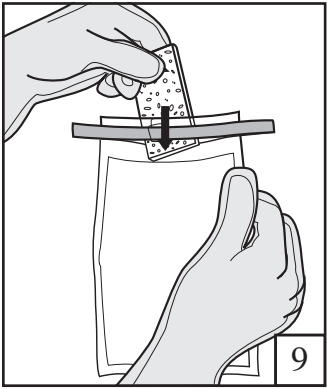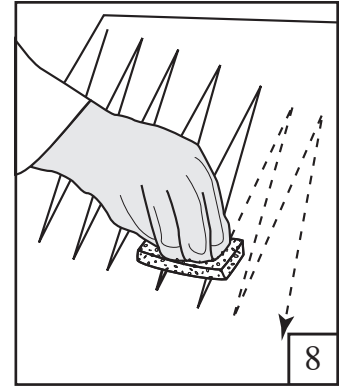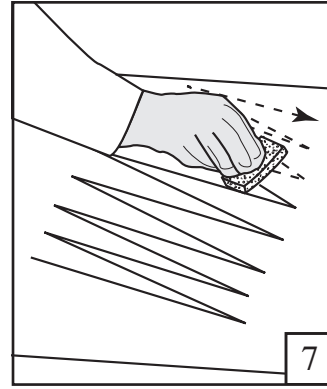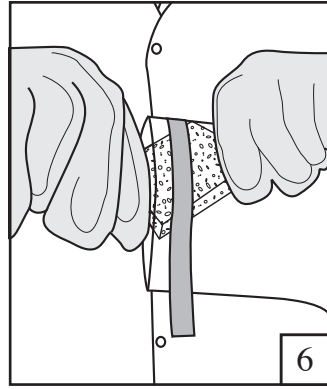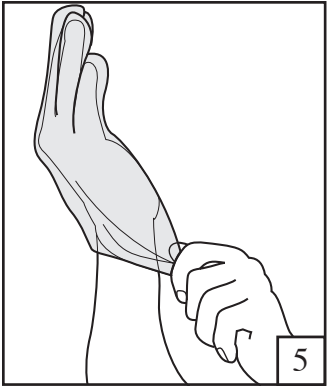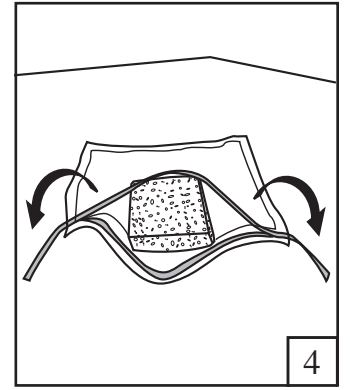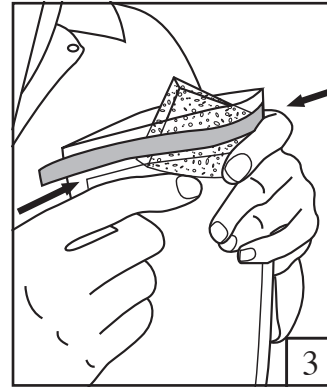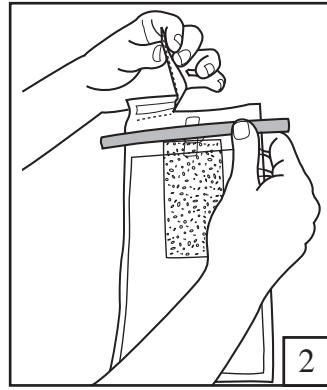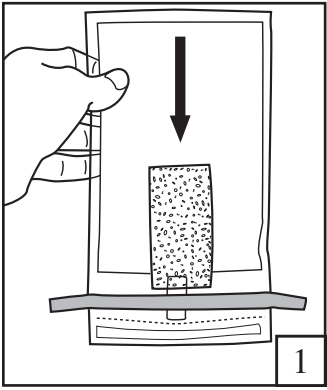

Neogen Food Safety

Neogen Corporation

620 Leshar Place
Lansing, MI 48912 USA
neogen.com

Neogen Europe Ltd.

The Dairy School
Auchincruive
Ayr, KA6 5HU
Scotland, UK

Neogen Ireland, Ltd.

Bray Business Park, Bray
Co. Wicklow
A98YV29, Ireland



Neogen Corporation

620 Leshar Place Lansing, MI 48912 USA
www.neogen.com

Neogen is a trademark of Neogen Corporation.

© Neogen Corporation 2024.

All rights reserved.

FS00834A

คำแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์

ตราสัญลักษณ์

ฟองน้ำชุบหมาด

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

ฟองน้ำแบบแห้งหรือแบบเปียก/ชุบหมาด (Pre-hydrated) ปราศจากสารฆ่าจุลชีพ (Biocide-free) ขนาด 3.8 x 7.6 ซม. (1.5 x 3 นิ้ว) พร้อมใช้งานในถุงเก็บตัวอย่าง มีบัฟเฟอร์ให้เลือกหลายชนิด รวมถึงมีหรือไม่มีถุงมือในชุด

สำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการเท่านั้น มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) พร้อมให้บริการ

ความปลอดภัย

ผู้ใช้ควรศึกษา ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามข้อมูลด้านความปลอดภัยทั้งหมดในคำแนะนำการใช้งานเหล่านี้ เก็บคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยเหล่านี้ไว้เพื่อใช้ในการอ้างอิงครั้งต่อไป

คำเตือน บ่งชี้ถึงสถานการณ์ที่เป็นอันตรายซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยงแล้วอาจส่งผลให้ถึงแก่ชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัส และ/หรือ ทรัพย์สินชำรุดเสียหายได้

ข้อสังเกต บ่งชี้ถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยงแล้วอาจส่งผลให้ทรัพย์สินชำรุดเสียหายได้

เตือน

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปนเปื้อนทางสภาพแวดล้อม ให้ปฏิบัติตามนี้

- ปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและระเบียบข้อบังคับระดับท้องถิ่นในปัจจุบันสำหรับการกำจัดของเสียที่มีการปนเปื้อน

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสโดนชีววัตถุอันตราย ให้ปฏิบัติตามนี้

- กำจัดตัวอย่างทิ้งตามระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่หน่วยงานภาครัฐใช้บังคับและขั้นตอนดำเนินการทั้งหมดที่ห้องปฏิบัติการใช้บังคับ

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่เป็นลบซึ่งส่งผลให้เกิดการนำซากสัตว์หรือพื้นผิวทางสภาพแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนมาใช้สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องมือ ให้ปฏิบัติตามนี้

- อ้างอิงคำแนะนำในการจัดเก็บและวันหมดอายุจากฉลากบรรจุภัณฑ์เสมอ
- อ้างอิงการใช้งานจากคำแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์เสมอ

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสโดนสารเคมีและชีววัตถุอันตราย ให้ปฏิบัติตามนี้

- ปฏิบัติตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีเพื่อความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ (GLP¹ หรือ ISO 17025²) อยู่เสมอ โดยรวมถึงขั้นตอนการจำกัดพื้นที่อย่างถูกต้อง และการสวมเครื่องป้องกันที่เหมาะสมขณะปฏิบัติงานจัดการกับสารทดสอบและตัวอย่างทดสอบ

ข้อสังเกต

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลลัพธ์ที่เป็นบวกเท็จอันเนื่องมาจากการนำซากสัตว์หรือพื้นผิวทางสภาพแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนเข้ามาใช้สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องมือซึ่งอาจจะส่งผลให้ต้องทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องมือนั้นซ้ำหรือคัดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทิ้ง ให้ปฏิบัติตามนี้

- ห้ามนำฟองน้ำไปสัมผัสกับพื้นผิวใดๆ โดยไม่ตั้งใจ
- ห้ามสัมผัสเข้าไปในถุงบรรจุฟองน้ำ

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดการปนเปื้อนข้ามจากการนำอุปกรณ์จัดการตัวอย่างกลับมาใช้ซ้ำ ให้ปฏิบัติตามนี้

- ห้ามนำฟองน้ำชิ้นเดียวกันกลับมาใช้ซ้ำ

หน้าที่รับผิดชอบของผู้ใช้

ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำความเข้าใจกับคำแนะนำและข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.neogen.com หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดการจำหน่ายของบริษัท Neogen ในท้องถิ่นของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อเลือกวิธีการทดสอบ สิ่งสำคัญคือจะต้องเข้าใจว่าปัจจัยภายนอก อาทิเช่น วิธีการสุ่มตัวอย่าง เกณฑ์วิธีการทดสอบ การเตรียมตัวอย่าง การปฏิบัติตามจัดการ และเทคนิคทางห้องปฏิบัติการ อาจส่งผลกระทบต่อการทดสอบได้

ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเลือกวิธีการทดสอบหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ เพื่อประเมินตัวอย่างในงานที่เพียงพอโดยมีเมทริกซ์และอุปสรรคปัญหาทางจุลินทรีย์ที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ใช้พึงพอใจว่าวิธีการทดสอบที่เลือกใช้นั้นสอดคล้องกับเกณฑ์ของผู้ใช้เอง

นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาตัดสินด้วยว่าวิธีการทดสอบและผลลัพธ์ที่ได้ใดๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าและของผู้จัดส่งสินค้า

สำหรับวิธีการทดสอบใดๆ ก็ตาม ผลที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆ ในกลุ่ม Neogen Food Safety จะไม่ใช่การรับประกันคุณภาพของเมทริกซ์หรือกระบวนการที่ทดสอบเหล่านั้น

การจำกัดการรับประกัน/การชดใช้แบบจำกัด

เว้นแต่จะระบุอย่างชัดแจ้งในข้อจำกัดการรับประกันเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ของสินค้าแต่ละประเภท นี้โอเนจขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันใดๆ ไม่ ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันใดๆ ในความสามารถในการค้าขายได้ (Merchantability) หรือ การใช้สอยสินค้าให้สมประโยชน์ตามความมุ่งหมายเฉพาะ (Fitness) หากสินค้าใดๆ ของนีโอเนจ มีข้อบกพร่องในความปลอดภัยเกี่ยวกับ

อาหาร นีโอเจนหรือตัวแทนจัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจากนีโอเจนจะเลือกที่จะเปลี่ยนสินค้าทดแทนหรือคืนเงินค่าสินค้า ซึ่งเป็นการเยียวยาเฉพาะตัวแก่ลูกค้าหากมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อตัวแทนของนีโอเจนหรือตัวแทนจัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจากนีโอเจน

การจำกัดความรับผิดชอบของ NEOGEN

บริษัท NEOGEN จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะ เป็นความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม โดยกรณีพิเศษ โดยอุบัติเหตุ หรือโดยสืบเนื่อง ทั้งนี้โดยรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การสูญเสียผลกำไร ไม่มีกรณีใดเลยที่บริษัท Neogen จำต้องรับผิดชอบภายใต้ทฤษฎีใดๆ ทางกฎหมายเกินกว่าราคาซื้อของผลิตภัณฑ์ที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีตำหนิกพร่องนั้น

การเก็บรักษาและการกำจัดทิ้ง

การเก็บรักษา: ดูข้อมูลการเก็บรักษาบนฉลากบรรจุภัณฑ์

การกำจัดทิ้ง: ปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและระเบียบข้อบังคับระดับท้องถิ่นในปัจจุบันสำหรับการกำจัดของเสียที่มีการปนเปื้อน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัยของวัสดุ

คำอธิบายผลิตภัณฑ์	ปริมาตร	รหัสอ้างอิง	ปริมาตรของถุง	ถุงมือ
Neogen® ทรายสปีนจ์	0 มล.	BP133ES	0.9 ลิตร (30 ออนซ์)	0
Neogen® ทรายสปีนจ์พร้อมถุงมือ	0 มล.	BP237SPG	0.9 ลิตร (30 ออนซ์)	1
Neogen® ฟองน้ำชุบหมาดด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ Buffered Peptone	10 มล.	HS10BPW	0.9 ลิตร (30 ออนซ์)	0
Neogen® ฟองน้ำชุบหมาดด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ Buffered Peptone พร้อมถุงมือ 2 คู่	10 มล.	HS10BPW2G	0.9 ลิตร (30 ออนซ์)	2
Neogen® ฟองน้ำชุบหมาดด้วยสารละลาย D/E Neutralizing พร้อมถุงมือ 2 คู่	10 มล.	HS10DE2G	0.9 ลิตร (30 ออนซ์)	2
Neogen® ฟองน้ำชุบหมาดด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ Lethen	10 มล.	HS10LET	0.9 ลิตร (30 ออนซ์)	0
Neogen® ฟองน้ำชุบหมาดด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ Lethen พร้อมถุงมือ 2 คู่	10 มล.	HS10LET2G	0.9 ลิตร (30 ออนซ์)	2
Neogen® ฟองน้ำชุบหมาดด้วยสารละลาย Neutralizing Buffer	10 มล.	HS10NB	0.9 ลิตร (30 ออนซ์)	0
Neogen® ฟองน้ำชุบหมาดด้วยสารละลาย Neutralizing Buffer พร้อมถุงมือ 2 คู่	10 มล.	HS10NB2G	0.9 ลิตร (30 ออนซ์)	2

คำแนะนำสำหรับการใช้งาน

1. เขย่าฟองน้ำให้ลงไปถึงก้นถุง
2. ฉีกเพื่อเปิดถุง
หมายเหตุ: เติมสารเจือจางหรืออาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ที่ปราศจากเชื้อลงในทรายสปีนจ์
3. กดฟองน้ำให้ดันตัวออกจากถุง
4. งอแถบสีน้ำเงินเพื่อให้ถุงเปิด
5. สวมถุงมือที่ปราศจากเชื้อ
6. นำฟองน้ำออกมาด้วยวิธีแบบปลอดเชื้อ
7. เช็ดถูตลอดทั่วทุกแนวของพื้นผิวที่สัมผัสตัวอย่างด้วยวิธีแบบปลอดเชื้อ^{3,4,5,6}
8. พลิกฟองน้ำกลับด้านเปลี่ยนทิศทาง 90° เช็ดถูพื้นผิวที่สัมผัสตัวอย่างเดียวกันด้วยวิธีแบบปลอดเชื้อ
9. ใส่ฟองน้ำลงในถุงด้วยวิธีแบบปลอดเชื้อ
10. พับถุงให้ปิดลง
11. พับปลายของแถบสีน้ำเงินเข้าด้านใน
12. ปฏิบัติตามขั้นตอนดำเนินการที่กำหนดไว้ของผู้ใช้ในการกำจัดอาหารเพิ่มจำนวนเชื้อจุลินทรีย์ส่วนที่เหลือหรือสารละลายสำหรับทำให้เป็นกลางที่ตกค้างใดๆ ออกจากพื้นผิวที่สัมผัสตัวอย่าง












เอกสารอ้างอิง

1. U.S. Food and Drug Administration. Code of Federal Regulations, Title 21, Part 58. Good Laboratory Practice for Nonclinical Laboratory Studies
2. ISO/IEC 17025. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
3. American Public Health Association - Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - บทที่ 3: Microbiological Monitoring of the Food Processing Environment, ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4
4. US Food and Drug Administration - Bacteriological Analytical Method (พร้อมใช้งานออนไลน์ที่ <https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/bacteriological-analytical-manual-bam>)
5. United States Department of Agriculture - Microbiological Lab Guidebook - บทที่ 4.04, 5.04 และ 8.07
6. American Public Health Association - Standard Methods for the Examination of Dairy Products - บทที่ 13: Microbiological Tests for Equipment, Containers, Water, and Air, ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 17

โปรดดูวิธีการมาตรฐานฉบับปัจจุบันที่แสดงรายการไว้ข้างต้น

คำอธิบายสัญลักษณ์

info.neogen.com/symbols

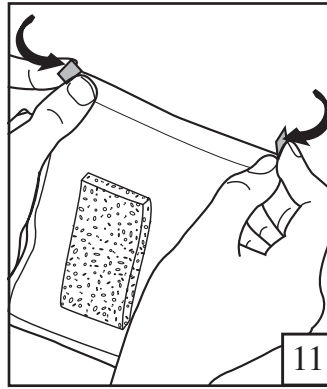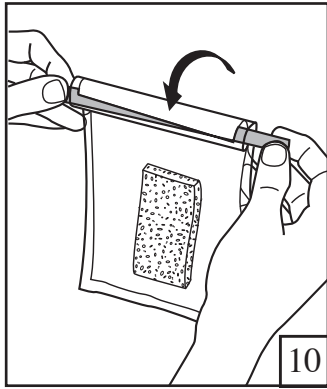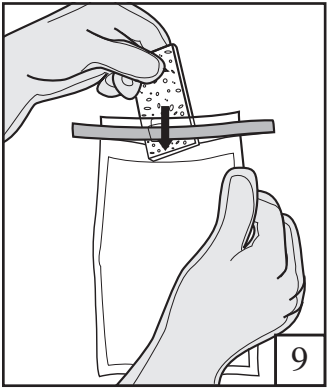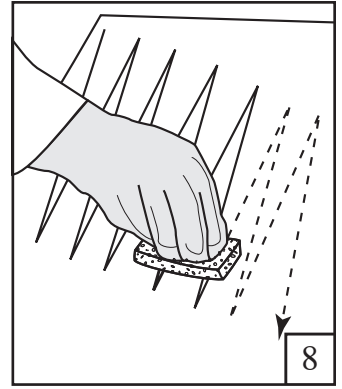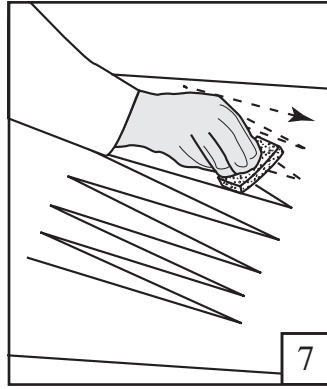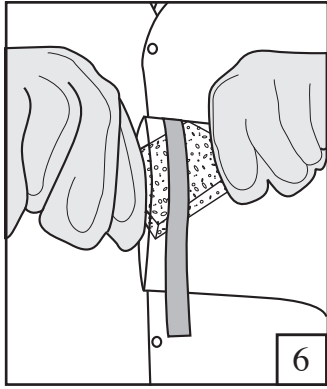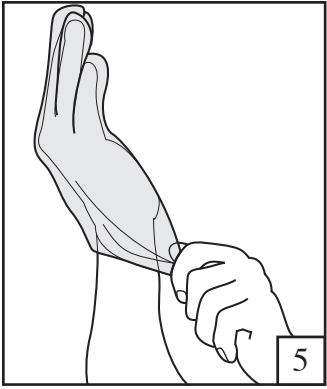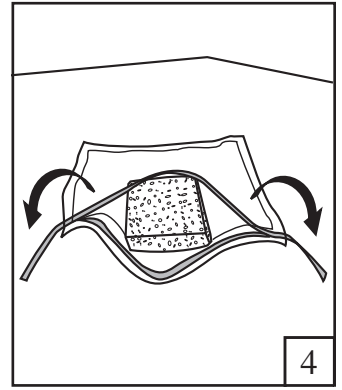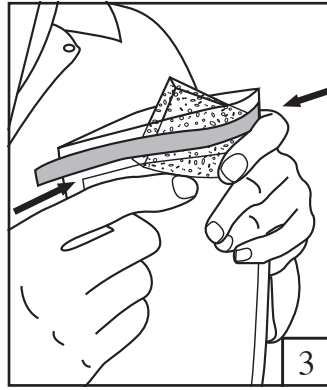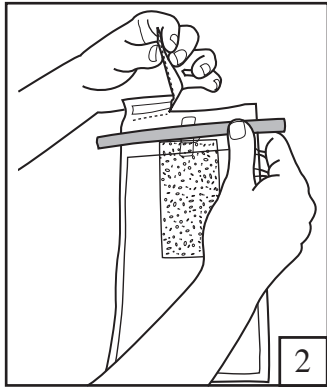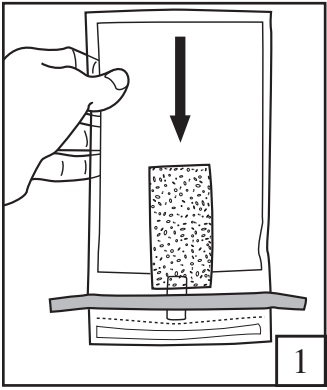

Neogen Food Safety

Neogen Corporation

620 Leshar Place
Lansing, MI 48912 USA
neogen.com

Neogen Europe Ltd.

The Dairy School
Auchincruive
Ayr, KA6 5HU
Scotland, UK

Neogen Ireland, Ltd.

Bray Business Park, Bray
Co. Wicklow
A98YV29, Ireland



Neogen Corporation

620 Leshar Place Lansing, MI 48912 USA
www.neogen.com

Neogen is a trademark of Neogen Corporation.

© Neogen Corporation 2024.

All rights reserved.

FS00834A

제품 설명서

드라이-스폰지 수화 스폰지

제품 설명

드라이 또는 사전 수화되고 무살생제 3.8 x 7.6 cm (1.5 x 3 in.) 시료 백에 들어 있는 스폰지. 지정된 제제로 사전 수화됨. 장갑 포함 또는 제외.

실험실에서만 사용하십시오. MSDS(물질안전보건자료)가 제공됩니다.

안전

사용자는 본 설명서의 모든 안전 정보를 읽고 이해하며 따라야 합니다. 나중에 참조할 수 있도록 안전 지침을 보관하십시오.

⚠ 경고 피하지 못하면 사망이나 심각한 부상 및/또는 재산상의 피해를 초래할 수 있는 위험한 상황을 나타냅니다.

참고 피하지 못하면 재산상의 피해를 초래할 수 있는 잠재적으로 위험한 상황을 나타냅니다.

⚠ 경고

환경 오염 관련 위험을 줄이려면:

- 오염 폐기물의 처리에 대한 최신 산업 표준과 현지 규제를 준수하십시오.

생물학적 유해 물질 노출 관련 위험을 줄이려면:

- 모든 해당 정부 규제 및 실험실 절차에 따라 시료를 폐기하십시오.

식품 제품에 오염된 잔해나 환경 표면을 사용하게 만드는 허위 음성 관련 위험을 줄이려면:

- 보관 지침 및 유효 기간은 항상 포장 라벨을 참조하십시오.
- 사용법에 대해서는 항상 제품 설명서를 참조하십시오.

화학물질 및 생물학적 유해 물질 노출 관련 위험을 줄이려면:

- 시험 물질과 시험 시료를 취급하는 동안 항상 적절한 오염 관리 절차, 적절한 보호의 착용 등 표준 우수실험실안전기준(GLP¹ 또는 ISO 17025²)을 따르십시오.

참고

식품 제품에 대해 교차 오염된 잔해물이나 환경 표면으로 인한 허위 양성 결과로 식품 제품의 재시험이나 거부가 발생할 수 있는 위험을 줄이려면:

- 의도하지 않은 표면에 스폰지가 닿지 않도록 하십시오.
- 스폰지 백 안에 손을 넣지 마십시오.

시료 처리 장치의 재사용으로 인한 교차 오염 위험을 줄이려면:

- 동일한 스폰지를 두 번 이상 사용하지 마십시오.

사용자의 책임

사용자는 제품 설명서와 정보를 숙지할 책임이 있습니다. 자세한 정보는 당사의 웹사이트 www.neogen.com를 참조하거나 현지 Neogen 영업 대리점이나 판매업체로 문의하십시오.

시험 방법을 선택할 때, 시료 추출 방법, 시험 프로토콜, 시료 준비, 취급, 실험 기법과 같은 외적 요인들이 결과에 영향을 미칠 수 있음을 인식하는 것이 중요합니다.

시험 방법이나 제품을 선택할 때 선택된 시험 방법이 사용자의 기준을 충족할 수 있도록 적합한 매트릭스와 미생물 제거 시험을 사용하여 충분한 수의 시료를 평가하는 것은 사용자의 책임입니다.

또한 사용자는 모든 시험 방법 및 결과가 고객 및 공급자의 요구사항을 충족하는지 확인할 책임이 있습니다.

다른 시험 방법과 마찬가지로 Neogen Food Safety 제품을 사용하여 얻은 결과가 시험된 매트릭스나 프로세스의 품질을 보장하는 것은 아닙니다.

보증의 한계 / 제한적 구제

개별 제품 포장의 제한적 보증 부분에 명시된 경우를 제외하고, NEOGEN은 상품성 또는 특정 용도 적합성에 대한 보증을 포함할 어떤 명시적이거나 암묵적인 보증도 거부합니다. Neogen Food Safety 제품에 결함이 있을 경우, Neogen이나 그의 공식 판매업체는 자체 판단에 따라 제품을 교체하거나 구매 금액을 환불해 드립니다. 다음은 귀하의 유일한 구제 방법입니다. 추가 질문이 있으면 Neogen 담당자 또는 Neogen 공인 대리점에 문의하십시오.

NEOGEN 책임의 제한

NEOGEN은 수익의 상실을 포함하여 어떤 직접적인, 간접적인, 특별한, 부수적인, 결과적인 손해나 손실에 대해서도 책임지지 않습니다. 법 이론에 따른 NEOGEN의 책임은 어떤 경우에도 결함이 있다고 주장된 제품의 구매 대금을 초과하지 않습니다.

보관 및 폐기

보관: 보관 정보는 포장 라벨을 참조하십시오.

폐기: 오염 폐기물의 처리에 대한 최신 산업 표준 및 현지 규제를 준수하십시오. 자세한 내용은 물질안전보건자료를 참조하십시오.

제품 설명	부피	참조	백 부피	장갑
Neogen® 드라이-스폰지	0mL	BP133ES	0.9L(30oz.)	0
Neogen® 드라이-스폰지, w/ Glove	0mL	BP237SPG	0.9L(30oz.)	1
Neogen® 완충 펌프수가 포함된 수화 스폰지	10mL	HS10BPW	0.9L(30oz.)	0
Neogen® 완충 펌프수가 포함된 수화 스폰지 및 장갑 2개	10mL	HS10BPW2G	0.9L(30oz.)	2
Neogen® D/E 중화 버퍼가 포함된 수화 스폰지 및 장갑 2개	10mL	HS10DE2G	0.9L(30oz.)	2
Neogen® 레틴 액체 배지가 포함된 수화 스폰지	10mL	HS10LET	0.9L(30oz.)	0
Neogen® 레틴 액체 배지가 포함된 수화 스폰지 및 장갑 2개	10mL	HS10LET2G	0.9L(30oz.)	2
Neogen® 중화 버퍼가 포함된 수화 스폰지	10mL	HS10NB	0.9L(30oz.)	0
Neogen® 중화 버퍼가 포함된 수화 스폰지 및 장갑 2개	10mL	HS10NB2G	0.9L(30oz.)	2

사용 지침

1. 백의 끝부분까지 스폰지를 흔드십시오.
2. 백을 뜯어 여십시오.
참고: 멸균된 희석액이나 액체 배지를 드라이 스폰지에 추가하십시오.
3. 백에서 나오도록 스폰지를 미십시오.
4. 백이 열리도록 파란색 와이어를 구부리십시오.
5. 멸균 장갑을 착용하십시오.
6. 스폰지를 무균 상태로 꺼내십시오.
7. 시료 채취 표면^{3,4,5,6} 전체를 무균 상태로 문지르십시오.
8. 스폰지를 뒤집으십시오. 방향을 90° 바꾸십시오. 시료 채취된 동일한 표면을 무균 상태로 문지르십시오.
9. 스폰지를 무균 상태로 백에 넣으십시오.
10. 백을 접어 닫으십시오.
11. 파란색 와이어의 양쪽 끝을 안쪽으로 접으십시오.
12. 사용자 설정 절차에 따라 남은 부유 액체 배지나 중성 용액 잔류물을 시료 채취된 표면에서 제거하십시오.












참고 자료

1. U.S. Food and Drug Administration(미국 식품의약청). Code of Federal Regulations, Title 21, Part 58. Good Laboratory Practice for Nonclinical Laboratory Studies(연방 규정, 비임상 실험 연구를 위한 의약품안전성 시험 관리 기준).
2. ISO/IEC 17025. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories(시험 및 교정 기관의 자격에 관한 일반 요건).
3. American Public Health Association - Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - Chapter 3(미국 공공보건협회 - 식품의 미생물 검사를 위한 방법 개론 - 제3장): Microbiological Monitoring of the Food Processing Environment, 4th edition(식품 가공 환경에서 미생물 모니터링, 제4판).
4. US Food and Drug Administration - Bacteriological Analytical Method(미국 식품의약청 - 세균 분석 방법)
(<https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/bacteriological-analytical-manual-bam>에서 온라인으로 제공).
5. United States Department of Agriculture - Microbiological Lab Guidebook - Chapters 4.04, 5.04, and 8.07(미국 농무부 - 미생물 실험실 가이드북 - 4.04, 5.04 및 8.07장).
6. American Public Health Association - Standard Methods for the Examination of Dairy Products - Chapter 13(미국 공공보건협회 - 유제품 검사를 위한 표준 방법 - 제13장): Microbiological Tests for Equipment, Containers, Water, and Air, 17th edition(장비, 용기, 물 및 대기의 미생물 시험, 제17판).

위에 열거된 표준 방법의 최신 버전을 참조하십시오.

기호 설명

info.neogen.com/symbols

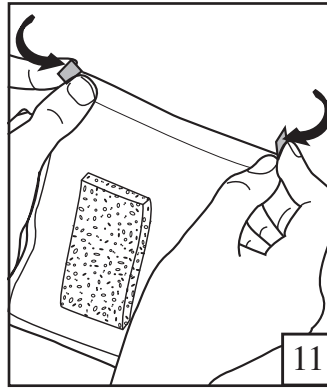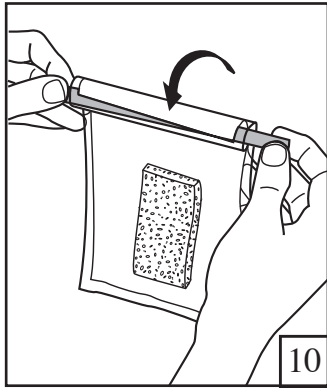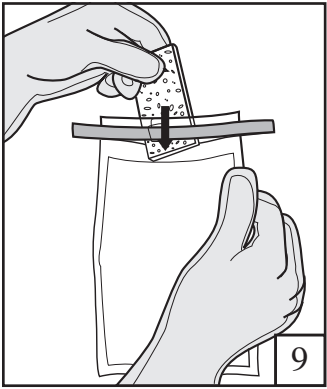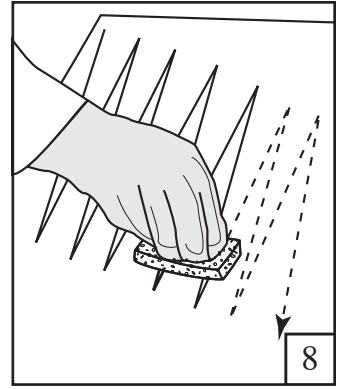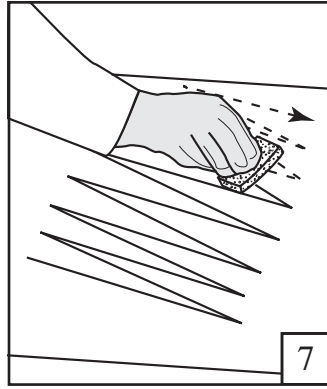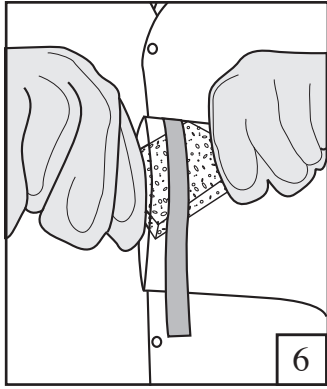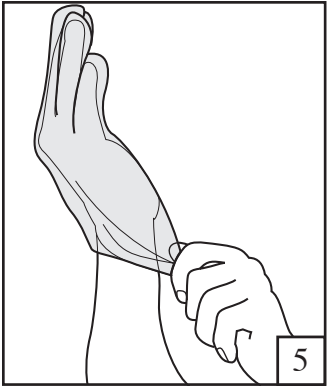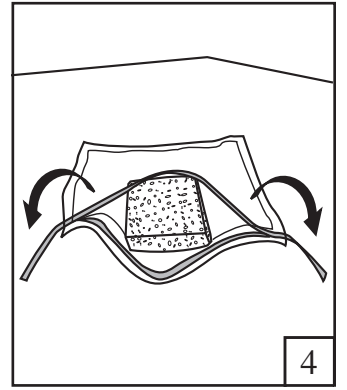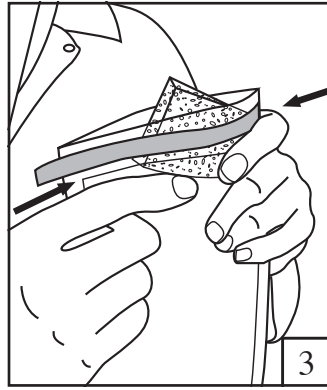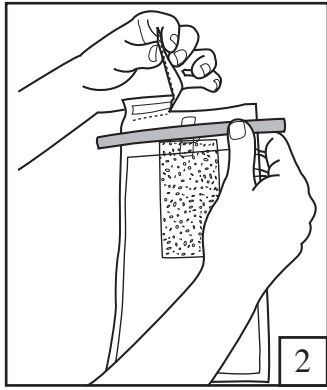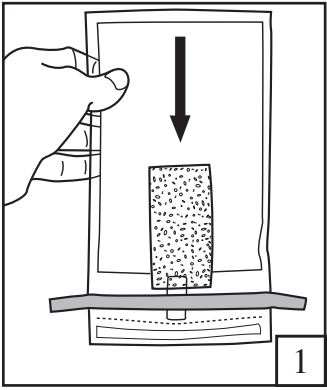

Neogen Food Safety

Neogen Corporation

620 Leshar Place
Lansing, MI 48912 USA
neogen.com

Neogen Europe Ltd.

The Dairy School
Auchincruive
Ayr, KA6 5HU
Scotland, UK

Neogen Ireland, Ltd.

Bray Business Park, Bray
Co. Wicklow
A98YV29, Ireland



Neogen Corporation

620 Leshar Place Lansing, MI 48912 USA
www.neogen.com

Neogen is a trademark of Neogen Corporation.

© Neogen Corporation 2024.

All rights reserved.

FS00834A