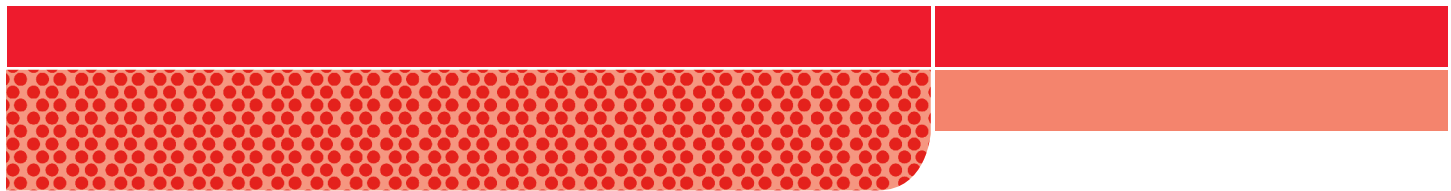


- 
- A decorative header bar consisting of a solid red top section and a bottom section with a red-to-white gradient background overlaid with a pattern of small red dots.
-  **(EN) Rappaport-Vassiliadis R10 Broth**
 -  **(FR) Bouillon Rappaport-Vassiliadis (R10)**
 -  **(ES) Caldo Rappaport-Vassilidias R10**
 -  **(PT) Caldo Rappaport-Vassilidias R10**

Product Instructions

Rappaport-Vassiliadis R10 Broth

DESCRIPTION

Medium used for the selective enrichment of *Salmonella* from meat products, polluted water, sewage and feces.

APPLICATIONS

For Laboratory Use Only. Safety Data Sheet available.

PREPARATION OF THE MEDIUM

Suspend 26.6 grams of the powder in 1.0 L of purified water. Mix thoroughly. Warm gently to dissolve powder. Dispense 10.0 mL amounts. Autoclave at 116°C (10 pounds pressure) for 15 minutes.

Final pH 5.1 +/- 0.2 at 25°C

COMPOSITION OF THE MEDIUM

Pancreatic Digest of Casein 4.54 g, Sodium Chloride 7.2 g, Monopotassium Phosphate 1.45 g, Magnesium Chloride, Anhydrous 13.4 g, Malachite Green Oxylate 0.036 g.

Formulation may be adjusted and/ or supplemented to meet performance requirements.

STORAGE

2-30°C Hygroscopic. Keep container tightly closed.

DISPOSAL

Follow established laboratory practices.

Disclaimer: Neogen disclaims all express and implied warranties including warranties of merchantability or fitness for a particular use. If product is defective, the exclusive remedy is, at Neogen's option, replacement, or refund. Except where prohibited by law, Neogen will not be liable for any further loss or damage arising from use of this product.

User Responsibility: Users are responsible for familiarizing themselves with product instructions and information. Visit our website at www.neogen.com, or contact your local Neogen representative or distributor for more information.

EXPLANATION OF SYMBOLS

info.neogen.com/symbols

Neogen Food Safety

Neogen Corporation

620 Leshar Place
Lansing, MI 48912 USA
neogen.com

Neogen Europe Ltd.

The Dairy School
Auchincruive
Ayr, KA6 5HU
Scotland, UK

Neogen Ireland, Ltd.

Bray Business Park, Bray
Co. Wicklow
A98YV29, Ireland



Neogen Corporation

620 Leshar Place Lansing, MI 48912 USA
www.neogen.com

Neogen is a trademark of Neogen Corporation.

© Neogen Corporation 2024.

All rights reserved.

FS00857A

Instructions relatives au produit

Bouillon Rappaport-Vassiliadis (R10)

DESCRIPTION

Milieu utilisé pour l'enrichissement sélectif de *Salmonella* dans les produits carnés, l'eau polluée, les eaux usées et les selles.

APPLICATIONS

Destiné uniquement à l'usage en laboratoire. Fiche de données de sécurité disponible.

PRÉPARATION DU MILIEU

Suspendre 26,6 grammes de poudre dans 1,0 l d'eau purifiée. Mélanger soigneusement. Chauffer doucement pour dissoudre la poudre. Distribuer des quantités de 10,0 ml. Stériliser à l'autoclave à 116 °C (pression de 4,5 kilos (10 livres)) pendant 15 minutes.

pH final 5,1 +/- 0,2 à 25 °C

COMPOSITION DU MILIEU

Digestat pancréatique de caséine 4,54 g, chlorure de sodium 7,2 g, phosphate monopotassique 1,45 g, chlorure de magnésium, Anhydre 13,4 g, oxalate de vert de malachite 0,036 g.

La formule peut être ajustée et/ou complétée afin de respecter les exigences en matière de performance.

STOCKAGE

Entre 2 et 30 °C, hygroscopique. Maintenir le récipient hermétiquement fermé.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Suivre les pratiques établies en laboratoire.

Renonciation : Neogen décline toute garantie explicite et implicite de commercialisation ou d'adaptation dans un but spécifique. Si le produit présente un défaut, le recours exclusif, à l'entière discrétion de Neogen, est le remplacement ou le remboursement. Sauf interdiction par la loi, Neogen ne sera pas responsable de tout autre préjudice ou dommage découlant de l'utilisation de ce produit.

Responsabilité de l'utilisateur : Il incombe aux clients et aux utilisateurs de connaître les instructions et les informations. Veuillez visiter notre site www.neogen.com pour consulter les instructions les plus récentes ou contacter votre représentant ou distributeur Neogen.

EXPLICATION DES SYMBOLES

info.neogen.com/symbols

Neogen Food Safety

Neogen Corporation

620 Leshar Place
Lansing, MI 48912 USA
neogen.com

Neogen Europe Ltd.

The Dairy School
Auchincruive
Ayr, KA6 5HU
Scotland, UK

Neogen Ireland, Ltd.

Bray Business Park, Bray
Co. Wicklow
A98YV29, Ireland



Neogen Corporation

620 Leshar Place Lansing, MI 48912 USA
www.neogen.com

Neogen is a trademark of Neogen Corporation.

© Neogen Corporation 2024.

All rights reserved.

FS00857A

Instrucciones del producto

Caldo Rappaport-Vassilidias R10

DESCRIPCIÓN

Medio usado para el enriquecimiento selectivo de *Salmonella* de productos cárnicos, agua contaminada, cloacas y heces.

APLICACIONES

Solo para uso de laboratorio. Hoja de datos sobre seguridad disponible.

PREPARACIÓN DEL MEDIO

Suspenda 26,6 g del polvo en 1 l de agua purificada. Mezcle bien. Caliente suavemente para disolver el polvo. Dispense cantidades de 10 ml. Esterilice en autoclave a 116 °C (10 libras de presión) durante 15 minutos.

pH final 5,1 +/- 0,2 a 25 °C

COMPOSICIÓN DEL MEDIO

Digerido pancreático de caseína 4,54 g; cloruro de sodio 7,2 g; fosfato monopotásico 1,45 g; cloruro de magnesio; anhidro 13,4 g; oxalato de malaquita verde 0,036 g.

La fórmula se puede ajustar y/o suplementar para satisfacer los requisitos de rendimiento.

ALMACENAMIENTO

2 a 30 °C higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado.

DESECHO

Siga los procedimientos de laboratorio establecidos.

Descargo de responsabilidades: Neogen renuncia a todas las garantías expresas y tácitas, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un uso específico. Si el producto es defectuoso, el único remedio es, a elección de Neogen, el reemplazo o el reembolso. Salvo cuando lo prohíba la ley, Neogen no será responsable de ninguna pérdida ni daño adicional que surja del uso de este producto.

Responsabilidad del usuario: Los usuarios son responsables de familiarizarse con las instrucciones e información del producto. Visite nuestro sitio web en www.neogen.com o póngase en contacto con su representante o distribuidor local de Neogen para obtener más información.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

info.neogen.com/symbols

Neogen Food Safety

Neogen Corporation

620 Leshar Place
Lansing, MI 48912 USA
neogen.com

Neogen Europe Ltd.

The Dairy School
Auchincruive
Ayr, KA6 5HU
Scotland, UK

Neogen Ireland, Ltd.

Bray Business Park, Bray
Co. Wicklow
A98YV29, Ireland



Neogen Corporation

620 Leshar Place Lansing, MI 48912 USA
www.neogen.com

Neogen is a trademark of Neogen Corporation.

© Neogen Corporation 2024.

All rights reserved.

FS00857A

Instruções do produto

Caldo Rappaport-Vassilidias R10

DESCRIÇÃO

Meio utilizado para o enriquecimento seletivo de *Salmonella* a partir de subprodutos de carne, água poluída, esgoto e fezes.

APLICAÇÕES

Apenas para uso no laboratório. Ficha de Dados de Segurança disponível.

PREPARAÇÃO DO MEIO

Suspender 26,6 gramas do pó em 1,0 L de água purificada. Misture vigorosamente. Aquecer levemente para dissolver o pó. Aplicar quantidades de 10,0 mL. Esterilizar em autoclave a 116°C (pressão de 10 libras) por 15 minutos.

pH final 5,1 +/- 0,2 a 25°C

COMPOSIÇÃO DO MEIO

Digestão pancreática de caseína 4,54 g, cloreto de sódio 7,2 g, fosfato monopotássico 1,45 g, cloreto de magnésio, anidro 13,4 g, verde de malaquita oxalato 0,036 g.

A formulação pode ser ajustada e / ou completada para atender os requisitos de desempenho.

ARMAZENAMENTO

De 2 a 30°C higroscópico. Mantenha o recipiente totalmente fechado.

DESCARTE

Siga práticas laboratoriais estabelecidas.

Rejeição de Responsabilidade: A Neogen não reconhece quaisquer garantias explícitas e implícitas, incluindo garantias de comercialização ou adequação para determinada finalidade. Se o produto estiver com defeito, o único recurso é, a critério da Neogen, a substituição ou reembolso. A menos que proibido por lei, a Neogen não será responsabilizada por qualquer prejuízo ou dano adicional decorrente do uso deste produto.

Responsabilidade do usuário: Os usuários são responsáveis por se familiarizar com as instruções e informações do produto. Visite nosso website em www.neogen.com, ou contate o seu representante ou distribuidor Neogen local para obter mais informações.

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

info.neogen.com/symbols

Neogen Food Safety

Neogen Corporation

620 Leshar Place
Lansing, MI 48912 USA
neogen.com

Neogen Europe Ltd.

The Dairy School
Auchincruive
Ayr, KA6 5HU
Scotland, UK

Neogen Ireland, Ltd.

Bray Business Park, Bray
Co. Wicklow
A98YV29, Ireland



Neogen Corporation

620 Leshar Place Lansing, MI 48912 USA
www.neogen.com

Neogen is a trademark of Neogen Corporation.

© Neogen Corporation 2024.

All rights reserved.

FS00857A