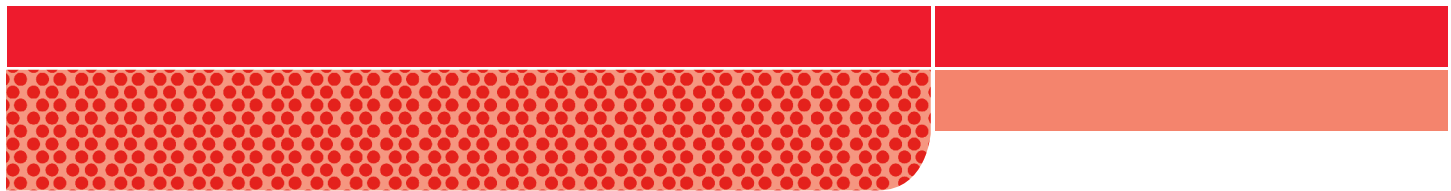


- 
- A decorative header bar consisting of a solid red top section and a bottom section with a red-to-white gradient and a pattern of small red dots.
-  **(EN) Standard Methods Agar**
 -  **(FR) Gélose méthodes standard**
 -  **(ES) Agar de métodos estándares**
 -  **(PT) Agar métodos padrão**

Product Instructions

Standard Methods Agar

DESCRIPTION

Medium for obtaining microbial counts from food, dairy and water samples.

APPLICATIONS

For Laboratory Use Only. Safety Data Sheet available.

PREPARATION OF THE MEDIUM

Suspend 23.5 grams of the powder in 1.0 L of purified water. Mix thoroughly. Heat with frequent agitation. Boil 1 minute to completely dissolve the powder. Autoclave at 121°C for 15 minutes. Additive required for roll tube method, add 1% agar.

Final pH 7.0 +/- 0.2 at 25°C

COMPOSITION OF THE MEDIUM

Casein Digest Peptone 5.0 g, Glucose 1.0 g, Yeast Extract 2.5 g, Agar 15.0 g.

Formulation may be adjusted and/or supplemented to meet performance requirements.

STORAGE

2-30°C Hygroscopic. Keep container tightly closed.

DISPOSAL

Follow established laboratory practices.

Disclaimer: Neogen disclaims all express and implied warranties including warranties of merchantability or fitness for a particular use. If product is defective, the exclusive remedy is, at Neogen's option, replacement, or refund. Except where prohibited by law, Neogen will not be liable for any further loss or damage arising from use of this product.

User Responsibility: Users are responsible for familiarizing themselves with product instructions and information. Visit our website at www.neogen.com, or contact your local Neogen representative or distributor for more information.

EXPLANATION OF SYMBOLS

info.neogen.com/symbols

Neogen Food Safety

Neogen Corporation

620 Leshar Place
Lansing, MI 48912 USA
neogen.com

Neogen Europe Ltd.

The Dairy School
Auchincruive
Ayr, KA6 5HU
Scotland, UK

Neogen Ireland, Ltd.

Bray Business Park, Bray
Co. Wicklow
A98YV29, Ireland



Neogen Corporation

620 Leshar Place Lansing, MI 48912 USA
www.neogen.com

Neogen is a trademark of Neogen Corporation.

© Neogen Corporation 2024.

All rights reserved.

FS00860A

Instructions relatives au produit

Gélose méthodes standard

DESCRIPTION

Milieu utilisé pour l'obtention des numérations microbiennes sur les aliments, les produits laitiers et l'eau.

APPLICATIONS

Destiné uniquement à l'usage en laboratoire. Fiche de données de sécurité disponible.

PRÉPARATION DU MILIEU

Suspendre 23,5 grammes de poudre dans 1,0 l d'eau purifiée. Mélanger soigneusement. Chauffer en agitant fréquemment. Faire bouillir pendant 1 minute pour une dissolution complète de la poudre. Stériliser à l'autoclave à 121 °C pendant 15 minutes. Additif nécessaire pour la méthode des tubes roulants, ajouter 1 % de gélose.

pH final 7,0 +/- 0,2 à 25 °C

COMPOSITION DU MILIEU

Digestat de peptone de caséine 5,0 g, glucose 1,0 g, extrait de levure 2,5 g, gélose 15,0 g.

La formule peut être ajustée et/ou complétée afin de respecter les exigences en matière de performance.

STOCKAGE

Entre 2 et 30 °C, hygroscopique. Maintenir le récipient hermétiquement fermé.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Suivre les pratiques établies en laboratoire.

Renonciation : Neogen décline toute garantie explicite et implicite de commercialisation ou d'adaptation dans un but spécifique. Si le produit présente un défaut, le recours exclusif, à l'entière discrétion de Neogen, est le remplacement ou le remboursement. Sauf interdiction par la loi, Neogen ne sera pas responsable de tout autre préjudice ou dommage découlant de l'utilisation de ce produit.

Responsabilité de l'utilisateur : Il incombe aux clients et aux utilisateurs de connaître les instructions et les informations. Veuillez visiter notre site www.neogen.com pour consulter les instructions les plus récentes ou contacter votre représentant ou distributeur Neogen.

EXPLICATION DES SYMBOLES

info.neogen.com/symbols

Neogen Food Safety

Neogen Corporation

620 Leshar Place
Lansing, MI 48912 USA
neogen.com

Neogen Europe Ltd.

The Dairy School
Auchincruive
Ayr, KA6 5HU
Scotland, UK

Neogen Ireland, Ltd.

Bray Business Park, Bray
Co. Wicklow
A98YV29, Ireland



Neogen Corporation

620 Leshar Place Lansing, MI 48912 USA
www.neogen.com

Neogen is a trademark of Neogen Corporation.

© Neogen Corporation 2024.

All rights reserved.

FS00860A

Instrucciones del producto

Agar de métodos estándares

DESCRIPCIÓN

Medio para la obtención de recuentos microbianos en alimentos, productos lácteos y agua.

APLICACIONES

Solo para uso de laboratorio. Hoja de datos sobre seguridad disponible.

PREPARACIÓN DEL MEDIO

Suspenda 23,5 g del polvo en 1 l de agua purificada. Mezcle bien. Caliente agitando con frecuencia. Hierva por 1 minuto para disolver el polvo por completo. Esterilice en autoclave a 121 °C durante 15 minutos. Aditivo requerido para el método de tubo enrollado, agregar 1% de agar.

pH final 7 +/- 0,2 a 25 °C

COMPOSICIÓN DEL MEDIO

Digerido de peptona de caseína 5 g; glucosa 1 g; extracto de levaduras 2,5 g; agar 15 g.

La fórmula se puede ajustar y/o suplementar para satisfacer los requisitos de rendimiento.

ALMACENAMIENTO

2 a 30 °C higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado.

DESECHO

Siga los procedimientos de laboratorio establecidos.

Descargo de responsabilidades: Neogen renuncia a todas las garantías expresas y tácitas, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un uso específico. Si el producto es defectuoso, el único remedio es, a elección de Neogen, el reemplazo o el reembolso. Salvo cuando lo prohíba la ley, Neogen no será responsable de ninguna pérdida ni daño adicional que surja del uso de este producto.

Responsabilidad del usuario: Los usuarios son responsables de familiarizarse con las instrucciones e información del producto. Visite nuestro sitio web en www.neogen.com o póngase en contacto con su representante o distribuidor local de Neogen para obtener más información.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

info.neogen.com/symbols

Neogen Food Safety

Neogen Corporation

620 Leshar Place
Lansing, MI 48912 USA
neogen.com

Neogen Europe Ltd.

The Dairy School
Auchincruive
Ayr, KA6 5HU
Scotland, UK

Neogen Ireland, Ltd.

Bray Business Park, Bray
Co. Wicklow
A98YV29, Ireland



Neogen Corporation

620 Leshar Place Lansing, MI 48912 USA
www.neogen.com

Neogen is a trademark of Neogen Corporation.

© Neogen Corporation 2024.

All rights reserved.

FS00860A

Instruções do produto

Agar métodos padrão

DESCRIÇÃO

Meio para obtenção de contagens de micróbios em alimentos, laticínios e água.

APLICAÇÕES

Apenas para uso no laboratório. Ficha de Dados de Segurança disponível.

PREPARAÇÃO DO MEIO

Suspender 23,5 gramas do pó em 1,0 L de água purificada. Misture vigorosamente. Aquecer com agitação frequente. Ferver por 1 minuto para dissolver o pó completamente. Autoclave a 121°C por 15 minutos. Aditivo requerido para o método de tubo de rolo, adicionar agar 1%.

pH final 7,0 +/- 0,2 a 25°C

COMPOSIÇÃO DO MEIO

Digestão peptona de caseína 5,0 g, glicose 1,0 g, extrato de levedura 2,5 g, agar 15,0 g.

A formulação pode ser ajustada e / ou completada para atender os requisitos de desempenho.

ARMAZENAMENTO

De 2 a 30°C higroscópico. Mantenha o recipiente totalmente fechado.

DESCARTE

Siga práticas laboratoriais estabelecidas.

Rejeição de Responsabilidade: A Neogen não reconhece quaisquer garantias explícitas e implícitas, incluindo garantias de comercialização ou adequação para determinada finalidade. Se o produto estiver com defeito, o único recurso é, a critério da Neogen, a substituição ou reembolso. A menos que proibido por lei, a Neogen não será responsabilizada por qualquer prejuízo ou dano adicional decorrente do uso deste produto.

Responsabilidade do usuário: Os usuários são responsáveis por se familiarizar com as instruções e informações do produto. Visite nosso website em www.neogen.com, ou contate o seu representante ou distribuidor Neogen local para obter mais informações.

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

info.neogen.com/symbols

Neogen Food Safety

Neogen Corporation

620 Leshar Place
Lansing, MI 48912 USA
neogen.com

Neogen Europe Ltd.

The Dairy School
Auchincruive
Ayr, KA6 5HU
Scotland, UK

Neogen Ireland, Ltd.

Bray Business Park, Bray
Co. Wicklow
A98YV29, Ireland



Neogen Corporation

620 Leshar Place Lansing, MI 48912 USA
www.neogen.com

Neogen is a trademark of Neogen Corporation.

© Neogen Corporation 2024.

All rights reserved.

FS00860A