


# Velocidade e simplicidade em testes de patógenos

## Neogen® Sistema de Detecção Molecular

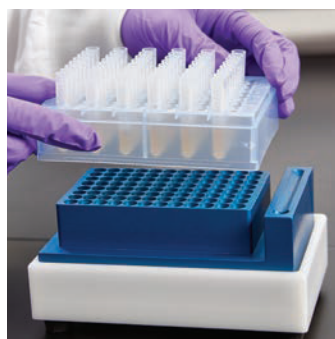

### Neogen Ensaio de Detecção Molecular 2 (MDA 2)

Cada ensaio contém dois componentes principais:

#### Tubos de reagentes prontos para uso

- Um único protocolo de ensaio pós-enriquecimento para ajudar a melhorar a produtividade
- Detecta 1-5 UFC do patógeno alvo por amostra original

#### Solução de lise pronta para uso

- Química avançada baseada em nanotecnologia
- Controle de processo com mudanças de cor para melhorar a confiança

### Interface simples

- Interface de usuário intuitiva para configuração rápida e fácil
- Todos os testes podem ser executados simultaneamente para eficiência ideal
- Resultados em tempo real ajudam a tomar decisões críticas com mais rapidez

### Instrumento compacto

- Design que economiza espaço e cabe em qualquer laboratório
- 96 amostras por execução
- Neogen fornece serviço global com equipes de suporte locais

### Tubos de reagentes codificados por cores por organismo para fácil identificação:



MDA 2 - *Salmonella*



MDA 2 - *E. coli* O157 (incluindo H7)



MDA 2 - *Listeria*



MDA 2 - *Listeria monocytogenes*



MDA 2 - *Cronobacter*



MDA 2 - *Campylobacter*




MDA 2 - Triagem do STEC (*stx*)



MDA 2 - Triagem do STEC (*stx* e *eae*)

## Como funciona

Neogen utiliza tecnologias avançadas – Amplificação Isotérmica de DNA e Detecção de Bioluminescência – para guiá-lo para a próxima geração de Testes de Detecção Molecular e fornecer uma solução molecular precisa e confiável com maior produtividade. Ele permite que você tome decisões críticas com mais rapidez, otimize seus processos e proteja seus negócios – e lucro líquido.

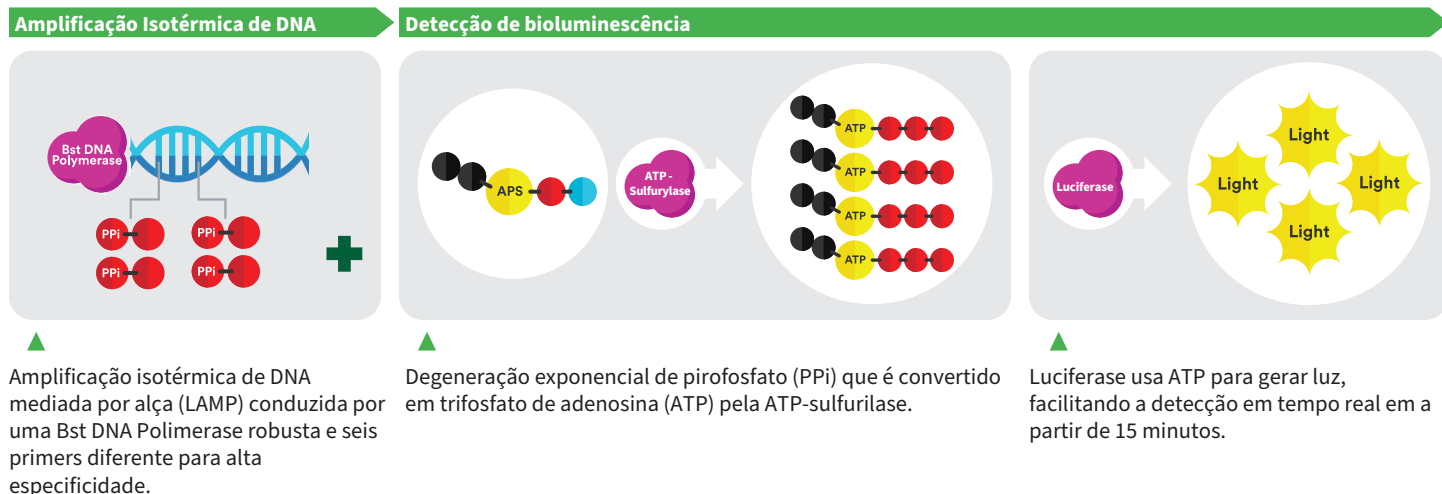

## Informação do pedido

| Núm. CAT     | Descrição                                                         | Tamanho         | Conteúdo  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| MDA2SAL96    | Ensaio de Detecção Molecular 2 – <i>Salmonella</i>                | 96 testes/kit   | 1         |
| MDA2LIS96    | Ensaio de Detecção Molecular 2 – <i>Listeria</i>                  | 96 testes/kit   | 1         |
| MDA2LMO96    | Ensaio de Detecção Molecular 2 – <i>Listeria monocytogenes</i>    | 96 testes/kit   | 1         |
| MDA2ECO96    | Ensaio de Detecção Molecular 2 – <i>E. coli</i> O157 (incluye H7) | 96 testes/kit   | 1         |
| MDA2CRO96    | Ensaio de Detecção Molecular 2 – <i>Cronobacter</i>               | 96 testes/kit   | 1         |
| MDA2CAM96    | Ensaio de Detecção Molecular 2 – <i>Campylobacter</i>             | 96 testes/kit   | 1         |
| MDA2STX96    | Ensaio de Detecção Molecular 2 – STEC ( <i>stx</i> )              | 96 testes/kit   | 1         |
| MDA2STXEAE48 | Ensaio de Detecção Molecular 2 – STEC ( <i>stx</i> e <i>eae</i> ) | 48 testes/kit   | 1         |
| CE250        | Caldo de enriquecimento para <i>Campylobacter</i>                 | Frasco de 250 g | 1         |
| MDMC96       | Controle de Matriz de Detecção Molecular                          | 96 testes/kit   | 1         |
| BPW500       | Água Peptonada Tamponada (ISO)                                    | 500 g           | 1         |
| BP0118500    | Caldo Demi-Fraser Base                                            | Frasco de 500 g | 1         |
| BP0210500    | Caldo Base Fraser                                                 | Frasco de 500 g | 1         |
| ESS10WSN     | Scrub sampler stick 10 mL                                         | —               | 100/caixa |
| HES10WSN2G   | Scrub sampler 10 mL                                               | —               | 100/caixa |

Saiba mais na [info.neogen.com/MDS](http://info.neogen.com/MDS)



Neogen Corporation, 620 Lesher Place, Lansing, MI 48912 USA.

© Neogen Corporation 2023. All rights reserved. Neogen is a registered trademark of Neogen Corporation.

FS00035\_0523