

# Cuando se trata de *B. cereus*, usted debe estar seguro.

## Placa Neogen® Petrifilm® para Recuento de *Bacillus cereus*


Diga adiós a las molestias del método de referencia MYP con las placas Petrifilm. Listas para usar directamente desde el paquete, las placas Petrifilm no requieren preparación, lo que evita que su equipo se exponga a suplementos antibióticos. Además, el tamaño compacto combinado con menos diluciones y tiempo de secado libera espacio valioso en el laboratorio y la incubadora.

Las placas Petrifilm ofrecen resultados claros y confiables de manera eficiente para ayudarlo a combatir la amenaza persistente de *B. cereus*.

**Es fácil de usar. Fácil de leer.\* Fácil de interpretar.\***

Para solicitar una muestra o aprender más, visite [info.neogen.com/Petrifilm](http://info.neogen.com/Petrifilm)

\*En comparación con el agar del método de referencia.

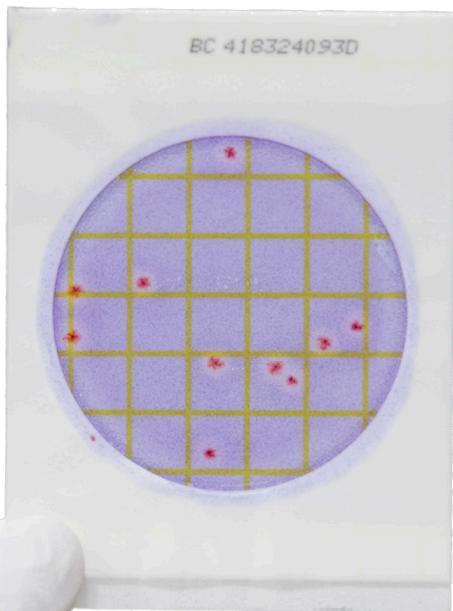

**BC**

Placa de Conteo de *Bacillus cereus*

# Placa Neogen Petrifilm para Recuento de *Bacillus cereus*

## Beneficios para usted



### Sencillo

Placas listas para usar.  
No requiere la manipulación de suplementos antibióticos.



### Exhaustivo

Pruebas para todo el grupo de *Bacillus cereus sensu lato*, incluyendo *B. cytotoxicus*.




### Completo


Un medio selectivo y diferencial que permite el conteo de *Bacillus cereus* sin confirmación.

## Claramente la mejor opción.

La Placa Neogen Petrifilm de Recuento BC es fácil de interpretar, ya que presenta colonias claras en lugar de las morfologías enjambre que se obtienen con el método tradicional de referencia.

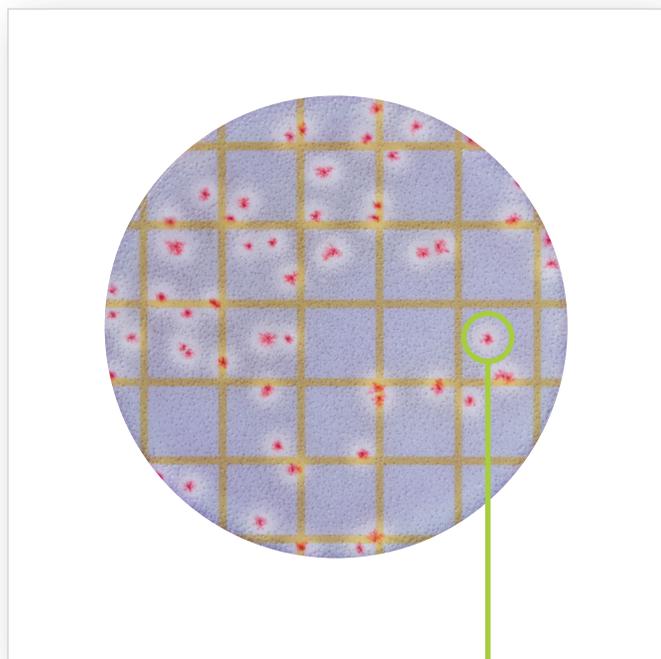

Colonias típicas de *Bacillus cereus* color violeta rojizo con presencia de una zona blanca.

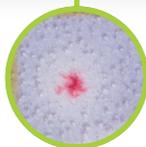

### Información del producto

Altura del apilado	10 placas o menos
Rango óptimo de pH	>5
Rango de conteo recomendado	≤100 UFC
Área de conteo	30cm <sup>2</sup>
Temperatura de incubación	30°C ± 1°C o 35°C ± 1°C
Tiempo para los resultados	20–24 h

Descripción	SKU	Contenido
Placas Neogen Petrifilm de Recuento de <i>Bacillus cereus</i>	700006920   6482	50 placas/ caja
Placas Neogen Petrifilm de Recuento de <i>Bacillus cereus</i>	700006921   6483	500 placas/ caja
Esparcidor plano Petrifilm	700002099   6425	2 esparcidores/ caja

